

欣维尔专利产品2025204895739


1. 内螺纹厚壁耐压管，瓶身采用3.3高硼硅高强度，加厚玻璃管制得，管壁厚实且均匀。
2. 产品出厂前逐一进行加压检测，室温环境下，瓶体可承受0.6 MPa压力。该瓶可用于压力反应。



耐压管，厚壁高强度，密封环

标配有四氟螺纹盖以及可替换四氟密封环。

货号	容量 (mL)	瓶身外径×螺纹口 以下长度 (mm)	螺纹口规格	价格
E160001	15	26×70	15#	
E160020	20	26×110	15#	
E160002	35	26×125	15#	
E160003	38	26×135	15#	
E160004	48	46×70	15#	
E160005	100	46×110	15#	
E160006	120	46×130	15#	
标配配件：				
B500015	15#内螺纹,全四氟塞,含密封圈			

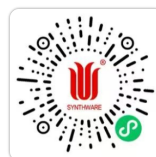

扫码查看，今日实时
优惠价



推荐组装产品：

B100015	#15 具O型圈外螺纹盖（含EP材质O型圈）
B100015F	#15 具O型圈外螺纹盖（含四氟包覆O型圈）
B510015	#15 PE外螺纹盖（含四氟密封盖）
B100015T	#15 具导气管/真空接口外螺纹盖（含EP材质O型圈）
B100015TF	#15 具导气管/真空接口外螺纹盖（含四氟包覆O型圈）
B500015Y	#15具密封环外螺纹盖（含压力表）
B500015Z	#15具密封环外螺纹盖（含真空表）
B530015Y	#15具密封环外螺纹盖（含真空/压力表）
B680015	#15具密封环外螺纹盖（含耐压PEEK接头）
B520015-6	#15具密封环外螺纹盖（含0.6 MPa泄压阀）
B520015-4	#15具密封环外螺纹盖（含0.4 MPa泄压阀）

使用提示：反应液不要超过耐压管/瓶身体积的1/3。需给反应液留有足够的膨胀及冷凝回流空间，一旦空间不足需立刻终止反应。

安全提示：由于本产品的耐压性质及使用后产品状况不定性（特别是内壁划伤 磕伤），一定要确保排除所有不确定性安全隐患，且处于三重防护（护目镜，通风橱，防爆盾）状态下再开始使用。

综上所述，欣维尔不能保证本产品多因素导致的不确定性安全隐患及由此带来的损伤，将无法承担损害责任。

- 2

欣维尔专利产品2025204895739

1. 内螺纹厚壁耐压瓶，瓶身采用3.3高硼硅高强度，加厚玻璃管制得，管壁厚实且均匀。
2. 产品出厂前逐一进行加压检测，室温环境下，瓶体可承受0.6 MPa压力。

耐压瓶，厚壁高强度，密封环

标配有四氟螺纹盖以及可替换四氟密封环



15#螺纹口

货号	容量 (mL)	瓶身外径×螺纹口 以下长度(mm)	螺纹口 规格	价格
E180001	75	46×90	15#	 扫码查看，今日实时 优惠价
E180100	100	46*110	15#	
E180003	150	60×100	15#	
E180005	350	80×115	15#	
E180500	500	80×150	15#	
标配配件： B500015 15#内螺纹,全四氟塞,含密封圈				

25#螺纹口

E180002	75	46×90	25#
E182100	100	46*110	25#
E180004	150	60×100	25#
E180006	350	80×115	25#
E182500	500	80×150	25#
E18251L	1000	110*160	25#
E18252L	2000	150×170	25#
标配配件：			
B500025 25#内螺纹,全四氟塞,含密封圈			



扫码查看，今日实时
优惠价

推荐组装产品：

适配15#螺纹口

B100015	#15 具O型圈外螺纹盖（含EP材质O型圈）
B100015F	#15 具O型圈外螺纹盖（含四氟包覆O型圈）
B510015	#15 PE外螺纹盖（含四氟密封盖）
B100015T	#15 具导气管/真空接口外螺纹盖（含EP材质O型圈）
B100015TF	#15 具导气管/真空接口外螺纹盖（含四氟包覆O型圈）
B500015Y	#15具密封环外螺纹盖（含压力表）
B500015Z	#15具密封环外螺纹盖（含真空表）
B530015Y	#15具密封环外螺纹盖（含真空/压力表）
B680015	#15具密封环外螺纹盖（含耐压PEEK接头）
B520015-6	#15具密封环外螺纹盖（含0.6 MPa泄压阀）
B520015-4	#15具密封环外螺纹盖（含0.4 MPa泄压阀）

适配25#螺纹口

B100025	#25 具O型圈外螺纹盖（含EP材质O型圈）
B100025F	#25 具O型圈外螺纹盖（含四氟包覆O型圈）
B510025	#25 PE外螺纹盖（含四氟密封盖）
B500025Y	#25具密封环外螺纹盖（含压力表）
B500025Z	#25具密封环外螺纹盖（含真空表）
B530025Y	#25具密封环外螺纹盖（含真空/压力表）
B680025	#25具密封环外螺纹盖（含耐压PEEK接头）
B520025-6	#25具密封环外螺纹盖（含0.6 MPa泄压阀）
B520025-4	#25具密封环外螺纹盖（含0.4 MPa泄压阀）

使用提示：反应液不要超过耐压管/瓶身体积的1/3。需给反应液留有足够的膨胀及冷凝回流空间，一旦空间不足需立刻终止反应。

安全提示：由于本产品的耐压性质及使用后产品状况不定性（特别是内壁划伤 磕伤），一定要确保排除所有不确定性安全隐患，且处于三重防护（护目镜，通风橱，防爆盾）状态下再开始使用。

综上所述，欣维尔不能保证本产品多因素导致的不确定性安全隐患及由此带来的损伤，将无法承担损害责任。

欣维尔专利产品2025204895739

1. 内螺纹厚壁耐压管，瓶身采用3.3高硼硅高强度，加厚玻璃管制得，管壁厚实且均匀。
2. 耐溶剂腐蚀，密封性好，相较于四氟材质螺纹盖配全惰性O型圈组合，更加经济实惠。
3. 产品出厂前逐一进行加压检测，室温环境下，瓶体可承受0.6 MPa压力。该瓶可用于压力反应。

耐压瓶，厚壁高强度，密封盖

15#螺纹口

货号	容量 (mL)	瓶身外径×螺纹口 以下长度(mm)	螺纹口 规格	价格
E190001	75	46×90	15#	 扫码查看，今日实时 优惠价
E190100	100	46×110	15#	
E190003	150	60×100	15#	
E190005	350	80×115	15#	
E190500	500	80×150	15#	
标配配件：				
B510015	15#内螺纹PE盖，具四氟密封盖			

25#螺纹口

货号	容量 (mL)	瓶身外径×螺纹口 以下长度(mm)	螺纹口 规格	价格
E190002	75	46×90	25#	 扫码查看，今日实时 优惠价
E192100	100	46×110	25#	
E190004	150	60×100	25#	
E190006	350	80×115	25#	
E192500	500	80×150	25#	
E19251L	1000	110×160	25#	
E19252L	2000	150×170	25#	
标配配件：				
B510025	25#内螺纹PE盖，具四氟密封盖			



推荐组装产品：

适配15#螺纹口

B100015	#15 具O型圈外螺纹盖（含EP材质O型圈）
B100015F	#15 具O型圈外螺纹盖（含四氟包覆O型圈）
B100015T	#15 具导气管/真空接口外螺纹盖（含EP材质O型圈）
B100015TF	#15 具导气管/真空接口外螺纹盖（含四氟包覆O型圈）
B500015Y	#15具密封环外螺纹盖（含压力表）
B500015Z	#15具密封环外螺纹盖（含真空表）
B530015Y	#15具密封环外螺纹盖（含真空/压力表）
B680015	#15具密封环外螺纹盖（含耐压PEEK接头）
B520015-6	#15具密封环外螺纹盖（含0.6 MPa泄压阀）
B520015-4	#15具密封环外螺纹盖（含0.4 MPa泄压阀）

适配25#螺纹口

B100025	#25 具O型圈外螺纹盖（含EP材质O型圈）
B100025F	#25 具O型圈外螺纹盖（含四氟包覆O型圈）
B500025Y	#25具密封环外螺纹盖（含压力表）
B500025Z	#25具密封环外螺纹盖（含真空表）
B530025Y	#25具密封环外螺纹盖（含真空/压力表）
B680025	#25具密封环外螺纹盖（含耐压PEEK接头）
B520025-6	#25具密封环外螺纹盖（含0.6 MPa泄压阀）
B520025-4	#25具密封环外螺纹盖（含0.4 MPa泄压阀）

使用提示：反应液不要超过耐压管/瓶身体积的1/3。需给反应液留有足够的膨胀及冷凝回流空间，一旦空间不足需立刻终止反应。

安全提示：由于本产品的耐压性质及使用后产品状况不定性（特别是内壁划伤 磕伤），一定要确保排除所有不确定性安全隐患，且处于三重防护（护目镜，通风橱，防爆盾）状态下再开始使用。

综上所述，欣维尔不能保证本产品多因素导致的不确定性安全隐患及由此带来的损伤，将无法承担损害责任。

1. 平底内螺纹厚壁耐压瓶，瓶身采用3.3高硼硅高强度，加厚玻璃管制得，管壁厚实且均匀。
2. 标配四氟螺纹盖和VitonO型圈。
3. 产品出厂前逐一进行加压检测，室温环境下，瓶体可承受0.5 MPa压力。



耐压瓶，厚壁高强度，平底

货号	容量ml	瓶身外径×螺纹口 以下 长度mm	螺纹口 规格	价格
N162575	75	46*72	25#	 扫码查看，今日实时 优惠价
N162100	100	46*93	25#	
N162150	150	60*83	25#	
N162350	350	80*105	25#	
标配配件：				
B100025	25#内螺纹四氟塞子(具VitonO圈)			



耐压瓶，厚壁高强度，平底，镀膜

货号	容量ml	瓶身外径×螺纹口 以下长度mm	螺纹口 型号	价格
N162575D	75	46*72	25#	 扫码查看，今日实时 优惠价
N162100D	100	46*93	25#	
N162150D	150	60*83	25#	
N162350D	350	80*105	25#	
标配配件：				
B100025	25#内螺纹四氟塞子			

- ☒ 瓶体外部选用进口镀膜材料包覆，从而有效避免实验过程中发生爆裂的危险，有效提高实验安全系数。

推荐组装产品：

B100025F	#25 具O型圈外螺纹盖（含四氟包覆O型圈）
B500025	#25 四氟外螺纹盖（含四氟密封环）
B510025	#25 PE外螺纹盖（含四氟密封盖）
B500025Y	#25具密封环外螺纹盖（含压力表）
B500025Z	#25具密封环外螺纹盖（含真空表）

B530025Y	#25具密封环外螺纹盖（含真空/压力表）
B680025	#25具密封环外螺纹盖（含耐压PEEK接头）
B520025-6	#25具密封环外螺纹盖（含0.6 MPa泄压阀）
B520025-4	#25具密封环外螺纹盖（含0.4 MPa泄压阀）

使用提示：由于镀膜产品材料特性，使用后会表面发黄或不平整褶皱等情况，但并不影响使用效果。且镀膜产品需要在-40℃至80℃（融化温度：90°-100°）之间使用，不可用于高温灭菌，微波或烘箱，过高温度会导致镀膜融化。

使用提示：反应液不要超过耐压管/瓶身体积的1/3。需给反应液留有足够的膨胀及冷凝回流空间，一旦空间不足需立刻终止反应。

安全提示：由于本产品的耐压性质及使用后产品状况不定性（特别是内壁划伤 磕伤），一定要确保排除所有不确定性安全隐患，且处于三重防护（护目镜，通风橱，防爆盾）状态下再开始使用。

综上所述，欣维尔不能保证本产品多因素导致的不确定性安全隐患及由此带来的损伤，将无法承担损害责任。

1. 内螺纹厚壁耐压瓶，瓶身采用3.3高硼硅高强度，加厚玻璃管制得，瓶壁厚实且均匀。标配四氟螺纹盖（含四氟密封环）和0.6 MPa泄压阀。
2. 具泄压阀设计，当瓶体内压力大于0.6 MPa时，泄压阀可自动泄压，此设计可有效提高实验安全性。泄压阀经厂家提前标定，逐一检测。
3. 产品出厂前逐一进行加压检测，室温环境下，瓶体可承受0.6 MPa压力。

耐压瓶，厚壁高强度，刻度，0.6 MPa泄压阀

15#螺纹口

货号	容量 (mL)	瓶身外径×螺纹口 以下长度(mm)	螺纹口 规格	价格
P560001	15	26×70	15#	
P560020	20	26*110	15#	
P560002	35	26×125	15#	
P560003	38	26×135	15#	
P560004	48	46×70	15#	
P560005	100	46×110	15#	
P560006	120	46×130	15#	
P570001	75	46*90	15#	
P570003	150	60*100	15#	
P570005	350	80*115	15#	
P570500	500	80*170	15#	
P57251L	1000	100*210	15#	
标配配件：				
B520015-6 具密封环15#内螺纹盖，标配0.6MPa泄压阀				



扫码查看，今日实时
优惠价




泄压阀经厂家提前标定，
螺母勿动



25#螺纹口

货号	容量 (mL)	瓶身外径×螺纹口 以下长度(mm)	螺纹口 规格	价格
P570002	75	46*90	25#	
P572100	100	46*110	25#	
P570004	150	60*100	25#	
P570006	350	80*115	25#	
P572500	500	80*170	25#	
P57252L	1000	150*218	25#	
标配配件：				
B520025-6 具密封环25#内螺纹盖，标配0.6MPa泄压阀				

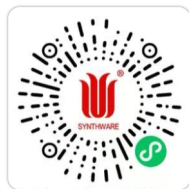

扫码查看，今日实时
优惠价

推荐组装产品：

适配25#螺纹口

B100025	#25 具O型圈外螺纹盖（含EP材质O型圈）
B100025F	#25 具O型圈外螺纹盖（含四氟包覆O型圈）
B500025	#25 四氟外螺纹盖（含四氟密封环）
B510025	#25 PE外螺纹盖（含四氟密封盖）
B500025Y	#25具密封环外螺纹盖（含压力表）
B500025Z	#25具密封环外螺纹盖（含真空表）
B530025Y	#25具密封环外螺纹盖（含真空/压力表）
B680025	#25具密封环外螺纹盖（含耐压PEEK接头）
B520025-4	#25具密封环外螺纹盖（含0.4 MPa泄压阀）

适配15#螺纹口

B100015	#15 具O型圈外螺纹盖（含EP材质O型圈）
B100015F	#15 具O型圈外螺纹盖（含四氟包覆O型圈）
B500015	#15 四氟外螺纹盖（含四氟密封环）
B510015	#15 PE外螺纹盖（含四氟密封盖）
B100015T	#15 具导气管/真空接口外螺纹盖（含EP材质O型圈）
B100015TF	#15 具导气管/真空接口外螺纹盖（含四氟包覆O型圈）
B500015Y	#15具密封环外螺纹盖（含压力表）
B500015Z	#15具密封环外螺纹盖（含真空表）
B530015Y	#15具密封环外螺纹盖（含真空/压力表）
B680015	#15具密封环外螺纹盖（含耐压PEEK接头）
B520015-4	#15具密封环外螺纹盖（含0.4 MPa泄压阀）

使用提示：反应液不要超过耐压管/瓶身体积的1/3。需给反应液留有足够的膨胀及冷凝回流空间，一旦空间不足需立刻终止反应。

安全提示：由于本产品的耐压性质及使用后产品状况不定性（特别是内壁划伤 磕伤），一定要确保排除所有不确定性安全隐患，且处于三重防护（护目镜，通风橱，防爆盾）状态下再开始使用。

综上所述，欣维尔不能保证本产品多因素导致的不确定性安全隐患及由此带来的损伤，将无法承担损害责任。


<https://synthware.shop/>

1. 厚壁耐压瓶，瓶身采用3.3高硼硅高强度，加厚玻璃管制得，瓶壁厚实且均匀。标配真空/压力表和泄压阀。
2. 具泄压阀设计，当瓶体内压力大于设定值时，泄压阀可自动泄压，此设计可有效提高实验安全性。泄压阀经厂家提前标定，逐一检测。500mL及以下耐压瓶标配0.6MPa泄压阀；500mL以上耐压瓶标配0.4MPa泄压阀。
3. 产品出厂前逐一进行加压检测，室温环境下，瓶体（500mL及以下）可承受0.6 MPa压力，瓶体（500mL以上）可承受0.4 MPa压力。

耐压瓶，厚壁高强度，内螺纹高真空节门，泄压阀，真空/压力表

标配真空/压力表和泄压阀。

真空/压力表量程：-0.1~0.9MPa，
方便实时监测体系压力

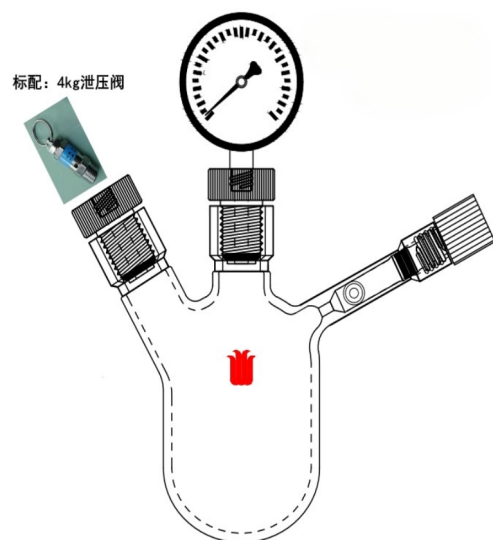

具高真空节门通气接口，
可对反应瓶进行进/抽气操作。

货号	容量 (mL)	瓶身外径×有效长度 (mm)	主螺纹口 规格	最高耐压值
P475100-6	100	60×60	15#	0.6MPa
P475150-6	150	60×80	15#	0.6MPa
P475200-6	200	70.5×80	15#	0.6MPa
P475250-6	250	70.5×100	15#	0.6MPa
P475500-6	500	90×100	15#	0.6MPa
P47151L-4	1000	110×130	15#	0.4MPa
P47152L-4	2000	110×320	15#	0.4MPa
P47251L-4	1000	110×130	25#	0.4MPa
P47252L-4	2000	110×320	25#	0.4MPa
标配配件：				
B530015Y	具密封环15#内螺纹盖，具压力/真空表 - 0.1~0.9MPa			
B530025Y	具密封环25#内螺纹盖，具压力/真空表 - 0.1~0.9MPa			
B520015-6	具密封环15#内螺纹盖，具0.6MPa泄压阀			
B520015-4	具密封环15#内螺纹盖，具0.4MPa泄压阀			
S600004N	7#内螺纹0~4mm高真空阀(四氟全包)			



扫码查看，今日实时
优惠价

推荐组装产品：

适配25#螺纹口

B100025	#25 具O型圈外螺纹盖（含EP材质O型圈）
B100025F	#25 具O型圈外螺纹盖（含四氟包覆O型圈）
B500025	#25 四氟外螺纹盖（含四氟密封环）
B510025	#25 PE外螺纹盖（含四氟密封盖）
B500025Y	#25具密封环外螺纹盖（含压力表）
B500025Z	#25具密封环外螺纹盖（含真空表）
B680025	#25具密封环外螺纹盖（含耐压PEEK接头）
B520025-6	#25具密封环外螺纹盖（含0.6 Mpa泄压阀）
B520025-4	#25具密封环外螺纹盖（含0.4 Mpa泄压阀）

适配15#螺纹口

B100015	#15 具O型圈外螺纹盖（含EP材质O型圈）
B100015F	#15 具O型圈外螺纹盖（含四氟包覆O型圈）
B500015	#15 四氟外螺纹盖（含四氟密封环）
B510015	#15 PE外螺纹盖（含四氟密封盖）
B100015T	#15 具导气管/真空接口外螺纹盖（含EP材质O型圈）
B100015TF	#15 具导气管/真空接口外螺纹盖（含四氟包覆O型圈）
B500015Y	#15具密封环外螺纹盖（含压力表）
B500015Z	#15具密封环外螺纹盖（含真空表）
B680015	#15具密封环外螺纹盖（含耐压PEEK接头）

使用提示：反应液不要超过耐压管/瓶身体积的1/3。需给反应液留有足够的膨胀及冷凝回流空间，一旦空间不足需立刻终止反应。


安全提示：由于本产品的耐压性质及使用后产品状况不定性（特别是内壁划伤 磕伤），一定要确保排除所有不确定性安全隐患，且处于三重防护（护目镜，通风橱，防爆盾）状态下再开始使用。

综上所述，欣维尔不能保证本产品多因素导致的不确定性安全隐患及由此带来的损伤，将无法承担损害责任。

耐压瓶，厚壁高强度，内螺纹高真空节门，泄压阀，真空/压力表，镀膜

货号	容量 (mL)	瓶身外径×有效长度 (mm)	螺纹口 规格	最高耐压值
P465100-6	100	60×60	15#	0.6Mpa
P465150-6	150	60×80	15#	0.6Mpa
P465200-6	200	70.5×80	15#	0.6Mpa
P465250-6	250	70.5×100	15#	0.6Mpa
P465500-6	500	90×100	15#	0.6Mpa
P46151L-4	1000	110×130	15#	0.4Mpa
P46152L-4	2000	110×320	15#	0.4Mpa
P46251L-4	1000	110×130	25#	0.4Mpa
P46252L-4	2000	110×320	25#	0.4Mpa
标配配件：				
B530015Y	具密封环15#内螺纹盖，具压力/真空表 - 0.1-0.9MPa			
B530025Y	具密封环15#内螺纹盖，具压力/真空表 - 0.1-0.9MPa			
B520015-6	具密封环15#内螺纹盖，具6MPa泄压阀			
B520015-4	具密封环15#内螺纹盖，具4MPa泄压阀			
S600004N	7#内螺纹0-4mm高真空阀(四氟全包)			
 扫码查看，今日实时 优惠价				

真空/压力表量程：-0.1-0.9MPa，
方便实时监测体系压力

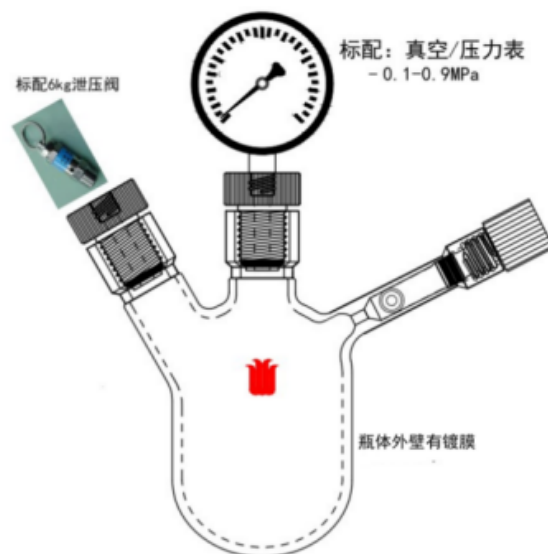

具高真空节门通气接口，
可对反应瓶进行进/抽气操作。

推荐组装产品：

适配25#螺纹口

B100025	#25 具O型圈外螺纹盖（含EP材质O型圈）
B100025F	#25 具O型圈外螺纹盖（含四氟包覆O型圈）
B500025	#25 四氟外螺纹盖（含四氟密封环）
B510025	#25 PE外螺纹盖（含四氟密封盖）
B500025Y	#25具密封环外螺纹盖（含压力表）
B500025Z	#25具密封环外螺纹盖（含真空表）
B680025	#25具密封环外螺纹盖（含耐压PEEK接头）
B520025-6	#25具密封环外螺纹盖（含0.6 MPa泄压阀）
B520025-4	#25具密封环外螺纹盖（含0.4 MPa泄压阀）

适配15#螺纹口

B100015	#15 具O型圈外螺纹盖（含EP材质O型圈）
B100015F	#15 具O型圈外螺纹盖（含四氟包覆O型圈）
B500015	#15 四氟外螺纹盖（含四氟密封环）
B510015	#15 PE外螺纹盖（含四氟密封盖）
B100015T	#15 具导气管/真空接口外螺纹盖（含EP材质O型圈）
B100015TF	#15 具导气管/真空接口外螺纹盖（含四氟包覆O型圈）
B500015Y	#15具密封环外螺纹盖（含压力表）
B500015Z	#15具密封环外螺纹盖（含真空表）
B680015	#15具密封环外螺纹盖（含耐压PEEK接头）

使用提示：由于镀膜产品材料特性，使用后会出现表面发黄或不平整褶皱等情况，但并不影响使用效果。且镀膜产品需要在-40℃至80℃（融化温度：90°-100°）之间使用，不可用于高温灭菌，微波或烘箱，过高温度会导致镀膜融化。

使用提示：反应液不要超过耐压管/瓶身体积的1/3。需给反应液留有足够的膨胀及冷凝回流空间，一旦空间不足需立刻终止反应。

安全提示：由于本产品的耐压性质及使用后产品状况不定性（特别是内壁划伤 磕伤），一定要确保排除所有不确定性安全隐患，且处于三重防护（护目镜，通风橱，防爆盾）状态下再开始使用。

综上所述，欣维尔不能保证本产品多因素导致的不确定性安全隐患及由此带来的损伤，将无法承担损害责任。

1. 厚壁耐压瓶，瓶身采用3.3高硼硅高强度，加厚玻璃管制得，瓶壁厚实且均匀。
2. 产品出厂前逐一进行加压检测，室温环境下，瓶体（500mL及以下）可承受0.6 MPa压力，瓶体（500mL以上）可承受0.4 MPa压力。

耐压瓶，厚壁高强度，单侧外螺纹高真空节门，温度计套管，压力表/真空表
标配压力表/真空表和一体式温度计套管。



具温度计套管设计，
可实时监测反应温度。




具高真空节门通气接口，
可对反应瓶进行进/抽气操作。

压力表量程：0-1.0MPa，方便实时监测体系压力。

货号	容量ml	主口螺纹	侧口	高真空型号
N691100Y	100	15#	温度计套管	4mm
N691250Y	250	15#	温度计套管	4mm
N690100Y	100	25#	温度计套管	4mm
N690250Y	250	25#	温度计套管	4mm
N690500Y	500	25#	温度计套管	4mm
N691000Y	1000	25#	温度计套管	8mm
N692000Y	2000	25#	温度计套管	8mm

标配配件：

S600004T	四氟保护的高真空阀(全包)0-4mm
S600008T	四氟保护的高真空阀(全包)0-8mm
B500015Y	15#螺纹口具孔盖，可拆卸密封环，标配压力表
B500025Y	25#螺纹口具孔盖，可拆卸密封环，标配压力表

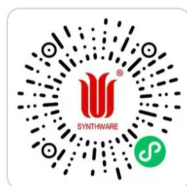

扫码查看，今日实时
优惠价

真空表量程：-0.1-0MPa，方便实时监测体系压力。

货号	容量ml	主口螺纹	侧口	高真空型号
N691100Z	100	15#	温度计套管	4mm
N691250Z	250	15#	温度计套管	4mm
N690100Z	100	25#	温度计套管	4mm
N690250Z	250	25#	温度计套管	4mm
N690500Z	500	25#	温度计套管	4mm
N691000Z	1000	25#	温度计套管	8mm
N692000Z	2000	25#	温度计套管	8mm

标配配件：

S600004T	四氟保护的高真空阀(全包)0-4mm
S600008T	四氟保护的高真空阀(全包)0-8mm
B500015Z	15#螺纹口具孔盖，可拆卸密封环，标配真空表
B500025Z	25#螺纹口具孔盖，可拆卸密封环，标配真空表



扫码查看，今日实时
优惠价

安全提示：由于本产品的耐压性质及使用后产品状况不定性（特别是内壁划伤 磕伤），一定要确保排除所有不确定性安全隐患，且处于三重防护（护目镜，通风橱，防爆盾）状态下再开始使用。

综上所述，欣维尔不能保证本产品多因素导致的不确定性安全隐患及由此带来的损伤，将无法承担损害责任。

耐压瓶，厚壁高强度，单侧外螺纹高真空节门，螺纹口，压力表/真空表
标配真空表/压力表和温度计接口。



具温度计接口设计，
搭配T25系列温度计可实时监测反应温度。

如无需温度计接口，
可单独购买B100007或
B100007F螺纹实心盖，
对反应瓶进行密封。



具高真空节门通气接口，
可对反应瓶进行进/抽气操作。



压力表量程：0-1.0MPa，方便实时监测体系压力。


真空表量程：-0.1-0MPa，方便实时监测体系压力。

货号	容量ml	主口螺纹	侧口	高真空型号
N701100Y	100	15#	温度计螺纹	4mm
N701250Y	250	15#	温度计螺纹	4mm
N700100Y	100	25#	温度计螺纹	4mm
N700250Y	250	25#	温度计螺纹	4mm
N700500Y	500	25#	温度计螺纹	4mm
N701000Y	1000	25#	温度计螺纹	8mm
N702000Y	2000	25#	温度计螺纹	8mm
标配配件：				
S600004T	四氟保护的高真空阀(全包)0-4mm			
S600008T	四氟保护的高真空阀(全包)0-8mm			
B500015Y	15#螺纹口具孔盖，可拆卸密封环，标配压力表			
B500025Y	25#螺纹口具孔盖，可拆卸密封环，标配压力表			
B101007QB	7#内螺纹具孔尼龙塞子			



扫码查看，今日实时
优惠价

货号	容量ml	主口螺纹	侧口	高真空型号
N701100Z	100	15#	温度计螺纹	4mm
N701250Z	250	15#	温度计螺纹	4mm
N700100Z	100	25#	温度计螺纹	4mm
N700250Z	250	25#	温度计螺纹	4mm
N700500Z	500	25#	温度计螺纹	4mm
N701000Z	1000	25#	温度计螺纹	8mm
N702000Z	2000	25#	温度计螺纹	8mm
标配配件：				
B101007QB	7#内螺纹具孔尼龙塞子			
S600004T	四氟保护的高真空阀(全包)0-4mm			
S600008T	四氟保护的高真空阀(全包)0-8mm			
B500015Z	15#螺纹口具孔盖，可拆卸密封环，标配真空表			
B500025Z	25#螺纹口具孔盖，可拆卸密封环，标配真空表			

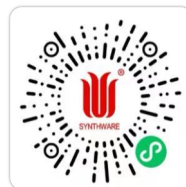

扫码查看，今日实时
优惠价

安全提示：由于本产品的耐压性质及使用后产品状况不定性（特别是内壁划伤 磕伤），一定要确保排除所有不确定性安全隐患，且处于三重防护（护目镜，通风橱，防爆盾）状态下再开始使用。

综上所述，欣维尔不能保证本产品多因素导致的不确定性安全隐患及由此带来的损伤，将无法承担损害责任。

推荐组装产品：

适配25#螺纹口

B100025	#25 具O型圈外螺纹盖（含EP材质O型圈）
B100025F	#25 具O型圈外螺纹盖（含四氟包覆O型圈）
B500025	#25 四氟外螺纹盖（含四氟密封环）
B510025	#25 PE外螺纹盖（含四氟密封盖）
B500025Y	#25具密封环外螺纹盖（含压力表）

适配15#螺纹口

B100015	#15 具O型圈外螺纹盖（含EP材质O型圈）
B100015F	#15 具O型圈外螺纹盖（含四氟包覆O型圈）
B500015	#15 四氟外螺纹盖（含四氟密封环）
B510015	#15 PE外螺纹盖（含四氟密封盖）
B100015T	#15 具导气管/真空接口外螺纹盖（含EP材质O型圈）

1. 厚壁耐压瓶，瓶身采用3.3高硼硅高强度，加厚玻璃管制得，瓶壁厚实且均匀。
2. 具刻度及书写标，方便观察反应液容量，便于标记。
3. 具高真空节门通气接口，可对反应瓶进行进/抽气操作。
4. 产品出厂前逐一进行加压检测，室温环境下，瓶体（500mL及以下）可承受0.6 MPa压力，瓶体（500ml以上）可承受0.4 MPa压力。

耐压瓶，厚壁高强度，刻度，单侧内螺纹高真空节门，压力表

标配压力表。压力表量程：0-1.0MPa，方便实时监测体系压力。



15#螺纹口

货号	容积mL	螺纹型号	价格
P611550	50	15#	
P611100	100	15#	
P611150	150	15#	
P611200	200	15#	
P611250	250	15#	
P611350	350	15#	
P611500	500	15#	
P611800	800	15#	
P611000	1000	15#	
P612000	2000	15#	
P613000	3000	15#	
标配配件：			
B500015Y	15#螺纹口具孔盖，可拆卸密封环，标配压力表		
S600004N	7#内螺纹0-4mm高真空阀(四氟全包)		



扫码查看，今日实时
优惠价



25#螺纹口

货号	容积mL	螺纹型号	价格
P612350	350	25#	
P612500	500	25#	
P612800	800	25#	
P61251L	1000	25#	
P61252L	2000	25#	
P61253L	3000	25#	
标配配件：			
B500025Y	25#螺纹口具孔盖，可拆卸密封环，标配压力表		
S600004N	7#内螺纹0-4mm高真空阀(四氟全包)		



扫码查看，今日实时
优惠价

使用提示：

1. 实验前需充分了解实验中内部压力是多少，切记在额定压力范围内使用，压力过大会导致反应瓶炸裂。建议搭配M68系列泄压单排管使用，可监控体系压力，达到额定压力时及时泄压；如果压力大于0.6 MPa，请立即停止使用。建议更换钢制反应釜。
2. 反应液不要超过耐压管/瓶身体积的1/3。需给反应液留有足够的膨胀及冷凝回流空间，一旦空间不足需立刻终止反应。
3. 本产品不可用于微波及烘箱加热！

安全提示：由于本产品的耐压性质及使用后产品状况不定性（特别是内壁划伤 磕伤），一定要确保排除所有不确定性安全隐患，且处于三重防护（护目镜，通风橱，防爆盾）状态下再开始使用。

综上所述，欣维尔不能保证本产品多因素导致的不确定性安全隐患及由此带来的损伤，将无法承担损害责任。

耐压瓶，厚壁高强度，刻度，双侧内螺纹高真空节门，压力表

标配压力表。压力表量程：0-1.0MPa，方便实时监测体系压力。

15#螺纹口

货号	容积mL	螺纹型号	价格
P621550	50	15#	
P621100	100	15#	
P621150	150	15#	
P621200	200	15#	
P621250	250	15#	
P621350	350	15#	
P621500	500	15#	
P621800	800	15#	
P621000	1000	15#	
P622000	2000	15#	
P623000	3000	15#	
标配配件：			
B500015Y	15#螺纹口具孔盖，可拆卸密封环，标配压力表		
S600004N	7#内螺纹0-4mm高真空阀(四氟全包)		



扫码查看，今日实时
优惠价



25#螺纹口

货号	容积mL	螺纹型号	价格
P622350	350	25#	
P622500	500	25#	
P622800	800	25#	
P62251L	1000	25#	
P62252L	2000	25#	
P62253L	3000	25#	
标配配件：			
B500025Y	25#螺纹口具孔盖，可拆卸密封环，标配压力表		
S600004N	7#内螺纹0-4mm高真空阀(四氟全包)		



扫码查看，今日实时
优惠价



具高真空节门通气接口，
可对反应瓶进行进/抽气操作。

安全提示：由于本产品的耐压性质及使用后产品状况不定性（特别是内壁划伤 磕伤），一定要确保排除所有不确定性安全隐患，且处于三重防护（护目镜，通风橱，防爆盾）状态下再开始使用。

综上所述，欣维尔不能保证本产品多因素导致的不确定性安全隐患及由此带来的损伤，将无法承担损害责任。

推荐组装产品：

适配25#螺纹口

B100025	#25 具O型圈外螺纹盖（含EP材质O型圈）
B100025F	#25 具O型圈外螺纹盖（含四氟包覆O型圈）
B500025	#25 四氟外螺纹盖（含四氟密封环）
B510025	#25 PE外螺纹盖（含四氟密封盖）
B500025Z	#25具密封环外螺纹盖（含真空表）
B530025Y	#25具密封环外螺纹盖（含真空/压力表）
B680025	#25具密封环外螺纹盖（含耐压PEEK接头）
B520025-6	#25具密封环外螺纹盖（含0.6 Mpa泄压阀）
B520025-4	#25具密封环外螺纹盖（含0.4 Mpa泄压阀）

适配15#螺纹口

B100015	#15 具O型圈外螺纹盖（含EP材质O型圈）
B100015F	#15 具O型圈外螺纹盖（含四氟包覆O型圈）
B500015	#15 四氟外螺纹盖（含四氟密封环）
B510015	#15 PE外螺纹盖（含四氟密封盖）
B100015T	#15 具导气管/真空接口外螺纹盖（含EP材质O型圈）
B100015TF	#15 具导气管/真空接口外螺纹盖（含四氟包覆O型圈）
B500015Z	#15具密封环外螺纹盖（含真空表）
B530015Y	#15具密封环外螺纹盖（含真空/压力表）
B680015	#15具密封环外螺纹盖（含耐压PEEK接头）
B520015-6	#15具密封环外螺纹盖（含0.6 Mpa泄压阀）
B520015-4	#15具密封环外螺纹盖（含0.4 Mpa泄压阀）

1. 厚壁耐压瓶，瓶身采用3.3高硼硅高强度，加厚玻璃管制得，瓶壁厚实且均匀。
2. 具刻度及书写标，方便观察反应液容量，便于标记。
3. 具高真空节门通气接口，可对反应瓶进行进/抽气操作。
4. 产品出厂前逐一进行加压检测，室温环境下，瓶体（500mL及以下）可承受0.6 MPa压力，瓶体（500mL以上）可承受0.4 MPa压力。


耐压瓶，厚壁高强度，刻度，单侧内螺纹高真空节门，温度计，压力表

标配压力表和一体式温度计套管。压力表量程：0-1.0MPa，方便实时监测体系压力。



15#螺纹口

货号	容积mL	螺纹型号	价格
P631550	50	15#	
P631100	100	15#	
P631150	150	15#	
P631200	200	15#	
P631250	250	15#	
P631350	350	15#	
P631500	500	15#	
P631800	800	15#	
P631000	1000	15#	
P632000	2000	15#	
P633000	3000	15#	
标配配件：			
B500015Y	15#螺纹口具孔盖，可拆卸密封环，标配压力表		
S600004N	7#内螺纹0-4mm高真空阀(四氟全包)		

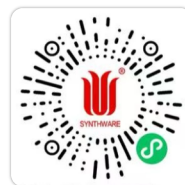

扫码查看，今日实时
优惠价



具温度计套管设计，
可实时监测反应温度。

25#螺纹口

货号	容积mL	螺纹型号
P632350	350	25#
P632500	500	25#
P632800	800	25#
P63251L	1000	25#
P63252L	2000	25#
P63253L	3000	25#
标配配件：		
B500025Y	25#螺纹口具孔盖，可拆卸密封环，标配压力表	
S600004N	7#内螺纹0-4mm高真空阀(四氟全包)	



扫码查看，今日实时
优惠价

使用提示：

1. 实验前需充分了解实验中内部压力是多少，切记在额定压力范围内使用，压力过大会导致反应瓶炸裂。建议搭配M68系列泄压单排管使用，可监控体系压力，达到额定压力时及时泄压；如果压力大于0.6 MPa，请立即停止使用。建议更换钢制反应釜。
2. 反应液不要超过耐压管/瓶身体积的1/3。需给反应液留有足够的膨胀及冷凝回流空间，一旦空间不足需立刻终止反应。
3. 本产品不可用于微波及烘箱加热！

安全提示：由于本产品的耐压性质及使用后产品状况不定性（特别是内壁划伤 磕伤），一定要确保排除所有不确定性安全隐患，且处于三重防护（护目镜，通风橱，防爆盾）状态下再开始使用。

综上所述，欣维尔不能保证本产品多因素导致的不确定性安全隐患及由此带来的损伤，将无法承担损害责任。

耐压瓶，厚壁高强度，刻度，双侧内螺纹高真空节门，温度计，压力表
标配压力表和一体式温度计套管。压力表量程：0-1.0MPa，方便实时监测体系压力。

15#螺纹口

货号	容积mL	螺纹型号	价格
P641550	50	15#	
P641100	100	15#	
P641150	150	15#	
P641200	200	15#	
P641250	250	15#	
P641350	350	15#	
P641500	500	15#	
P641800	800	15#	
P641000	1000	15#	
P642000	2000	15#	
P643000	3000	15#	
标配配件：			
B500015Y	15#螺纹口具孔盖，可拆卸密封环，标配压力表		
S600004N	7#内螺纹0-4mm高真空阀(四氟全包)		



扫码查看，今日实时
优惠价



25#螺纹口

P642350	350	25#	
P642500	500	25#	
P642800	800	25#	
P64251L	1000	25#	
P64252L	2000	25#	
P64253L	3000	25#	
标配配件：			
B500025Y	25#螺纹口具孔盖，可拆卸密封环，标配压力表		
S600004N	7#内螺纹0-4mm高真空阀(四氟全包)		



扫码查看，今日实时
优惠价



具温度计套管设计，
可实时监测反应温度。

安全提示：由于本产品的耐压性质及使用后产品状况不定性（特别是内壁划伤 磕伤），一定要确保排除所有不确定性安全隐患，且处于三重防护（护目镜，通风橱，防爆盾）状态下再开始使用。

综上所述，欣维尔不能保证本产品多因素导致的不确定性安全隐患及由此带来的损伤，将无法承担损害责任。

推荐组装产品：

适配25#螺纹口

B100025	#25 具O型圈外螺纹盖（含EP材质O型圈）
B100025F	#25 具O型圈外螺纹盖（含四氟包覆O型圈）
B500025	#25 四氟外螺纹盖（含四氟密封环）
B510025	#25 具PE外螺纹盖（含四氟密封盖）
B500025Z	#25 具密封环外螺纹盖（含真空表）
B530025Y	#25 具密封环外螺纹盖（含真空/压力表）
B680025	#25 具密封环外螺纹盖（含耐压PEEK接头）
B520025-6	#25 具密封环外螺纹盖（含0.6 Mpa泄压阀）
B520025-4	#25 具密封环外螺纹盖（含0.4 Mpa泄压阀）

适配15#螺纹口

B100015	#15 具O型圈外螺纹盖（含EP材质O型圈）
B100015F	#15 具O型圈外螺纹盖（含四氟包覆O型圈）
B500015	#15 四氟外螺纹盖（含四氟密封环）
B510015	#15 PE外螺纹盖（含四氟密封盖）
B100015T	#15 具导气管/真空接口外螺纹盖（含EP材质O型圈）
B100015TF	#15 具导气管/真空接口外螺纹盖（含四氟包覆O型圈）
B500015Z	#15 具密封环外螺纹盖（含真空表）
B530015Y	#15 具密封环外螺纹盖（含真空/压力表）
B680015	#15 具密封环外螺纹盖（含耐压PEEK接头）
B520015-6	#15 具密封环外螺纹盖（含0.6 Mpa泄压阀）
B520015-4	#15 具密封环外螺纹盖（含0.4 Mpa泄压阀）

1. 厚壁耐压瓶，瓶身采用3.3高硼硅高强度，加厚玻璃管制得，瓶壁厚实且均匀。
2. 产品出厂前逐一进行加压检测，室温环境下，瓶体（500mL及以下）可承受0.6 MPa压力，瓶体（500mL以上）可承受0.4 MPa压力。

耐压瓶，球型，厚壁高强度，单侧外螺纹高真空节门，温度计，压力表/真空表
标配压力表/真空表和一体式温度计套管。



具温度计套管设计，
可实时监测反应温度。



具高真空节门通气接口，
可对反应瓶进行进/抽气操作。

压力表量程：0-1.0MPa，方便实时监测体系压力。

货号	容量ml	主口螺纹	左侧口	高真空型号
N660500Y	500	25#	温度计套管	4mm
N661000Y	1000	25#	温度计套管	8mm
标配配件：				
S600004T	四氟保护的高真空阀(全包)0-4mm			
S600008T	四氟保护的高真空阀(全包)0-8mm			
B500025Y	25#螺纹口具孔盖，可拆卸密封环，标配压力表			



扫码查看，今日实时
优惠价

真空表量程：-0.1-0MPa，方便实时监测体系压力。

货号	容量ml	主口螺纹	左侧口	高真空型号
N660500Z	500	25#	温度计套管	4mm
N661000Z	1000	25#	温度计套管	8mm
标配配件：				
S600004T	四氟保护的高真空阀(全包)0-4mm			
S600008T	四氟保护的高真空阀(全包)0-8mm			
B500025Z	25#螺纹口具孔盖，可拆卸密封环，标配真空表			



扫码查看，今日实时
优惠价

使用提示：

1. 实验前需充分了解实验中内部压力是多少，切记在额定压力范围内使用，压力过大会导致反应瓶炸裂。建议搭配M68系列泄压单排管使用，可监控体系压力，达到额定压力时及时泄压；如果压力大于0.6 MPa，请立即停止使用。建议更换钢制反应釜。
2. 反应液不要超过耐压管/瓶身体积的1/3。需给反应液留有足够的膨胀及冷凝回流空间，一旦空间不足需立刻终止反应。
3. 本产品不可用于微波及烘箱加热！

安全提示：由于本产品的耐压性质及使用后产品状况不定性（特别是内壁划伤 磕伤），一定要确保排除所有不确定性安全隐患，且处于三重防护（护目镜，通风橱，防爆盾）状态下再开始使用。

综上所述，欣维尔不能保证本产品多因素导致的不确定性安全隐患及由此带来的损伤，将无法承担损害责任。

1. 厚壁耐压瓶，瓶身采用3.3高硼硅高强度，加厚玻璃管制得，瓶壁厚实且均匀。
2. 产品出厂前逐一进行加压检测，室温环境下，瓶体（500mL及以下）可承受0.6 MPa压力，瓶体（500mL以上）可承受0.4 MPa压力。

耐压瓶，球型，厚壁高强度，单侧外螺纹高真空节门，螺纹口，压力表/真空表
标配真空表/压力表和温度计接口。



具温度计接口设计，
搭配T25系列温度计可实时监测反应温度。

如无需温度计接口，
可单独购买B100007或
B100007F螺纹实心盖，
对反应瓶进行密封。



具高真空节门通气接口，
可对反应瓶进行进/抽气操作。



压力表量程：0-1.0MPa，方便实时监测体系压力。


货号	容量ml	主口螺纹	左侧口	高真空型号
N670500Y	500	25#	温度计螺纹	4mm
N671000Y	1000	25#	温度计螺纹	8mm
标配配件：				
S600004T	四氟保护的高真空阀(全包)0-4mm			
S600008T	四氟保护的高真空阀(全包)0-8mm			
B500025Y	25#螺纹口具孔盖，可拆卸密封环，标配压力表			
B101007QB	7#内螺纹具孔尼龙塞子			



扫码查看，今日实时
优惠价

真空表量程：-0.1-0MPa，方便实时监测体系压力。

货号	容量ml	主口螺纹	左侧口	高真空型号
N670500Z	500	25#	温度计螺纹	4mm
N671000Z	1000	25#	温度计螺纹	8mm
标配配件：				
S600004T	四氟保护的高真空阀(全包)0-4mm			
S600008T	四氟保护的高真空阀(全包)0-8mm			
B500025Z	25#螺纹口具孔盖，可拆卸密封环，标配真空表			
B101007QB	7#内螺纹具孔尼龙塞子			

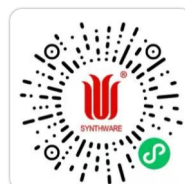

扫码查看，今日实时
优惠价

推荐组装产品：适配25#螺纹口

B100025	#25 具O型圈外螺纹盖（含EP材质O型圈）
B100025F	#25 具O型圈外螺纹盖（含四氟包覆O型圈）
B500025	#25 四氟外螺纹盖（含四氟密封环）
B510025	#25 PE外螺纹盖（含四氟密封盖）

B500025Y	#25具密封环外螺纹盖（含压力表）
B530025Y	#25具密封环外螺纹盖（含真空/压力表）
B680025	#25具密封环外螺纹盖（含耐压PEEK接头）
B520025-6	#25具密封环外螺纹盖（含0.6 MPa泄压阀）
B520025-4	#25具密封环外螺纹盖（含0.4 MPa泄压阀）

1. 内螺纹厚壁耐压瓶，瓶身采用3.3高硼硅高强度，加厚玻璃管制得，瓶壁厚实且均匀。
2. 具PEEK接头设计，可与泄压管直接连接，超出额定压力时即可通过泄压管上的泄压阀泄压，有效保证加压实验的安全性。
3. 产品出厂前逐一进行加压检测，室温环境下，瓶体可承受0.6 MPa压力。

耐压瓶，厚壁高强度，PEEK接头，泄压管

标配螺纹盖（含四氟密封环）和PEEK接头。




15#螺纹口

货号	容量 (mL)	瓶身外径×螺纹口以下长度(mm)	螺纹口规格
P601515	15	26×70	15#
P601520	20	26*110	15#
P601535	35	26×125	15#
P601538	38	26×135	15#
P601548	48	46×70	15#
P601575	75	46×90	15#
P601100	100	46×110	15#
P601120	120	46×130	15#
P601150	150	60×100	15#
P601350	350	80×115	15#
P601500	500	80×145	15#

标配配件：

B680015 具密封环15#内螺纹盖，标配耐压PEEK头

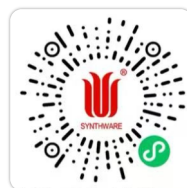

扫码查看，今日实时
优惠价

25#螺纹口

P702575	75	46×90	25#
P702100	100	46*110	25#
P702150	150	60×100	25#
P702350	350	80×115	25#
P702500	500	80*145	25#

标配配件：

B680025 具密封环25#内螺纹盖，标配耐压PEEK头



扫码查看，今日实时
优惠价

使用提示：

1. 实验前需充分了解实验中内部压力是多少，切记在额定压力范围内使用，压力过大会导致反应瓶炸裂。建议搭配M68系列泄压单排管使用，可监控体系压力，达到额定压力时及时泄压；如果压力大于0.6 MPa，请立即停止使用。建议更换钢制反应釜。
2. 反应液不要超过耐压管/瓶身体积的1/3。需给反应液留有足够的膨胀及冷凝回流空间，一旦空间不足需立刻终止反应。
3. 本产品不可用于微波及烘箱加热！

安全提示：由于本产品的耐压性质及使用后产品状况不定性（特别是内壁划伤 磕伤），一定要确保排除所有不确定性安全隐患，且处于三重防护（护目镜，通风橱，防爆盾）状态下再开始使用。

综上所述，欣维尔不能保证本产品多因素导致的不确定性安全隐患及由此带来的损伤，将无法承担损害责任。

反应管，厚壁高强度，PEEK，高真空阀，泄压管

标配螺纹盖（含四氟密封环）和PEEK接头。


15#螺纹口

货号	容量 (mL)	瓶身外径×螺纹口以下长度(mm)	螺纹口规格
P660001	15	26×70	15#
P660002	35	26×125	15#
P660003	38	26×135	15#
P660004	48	46×70	15#
P660005	100	46×110	15#
P660006	120	46×130	15#
P660250	250	60×145	15#
P660350	350	80×115	15#
P660500	500	80×145	15#

标配配件：

B680015 具孔，可匹配3.2外径通气管

S600004N 0-4mm高真空阀门，具7#内螺纹

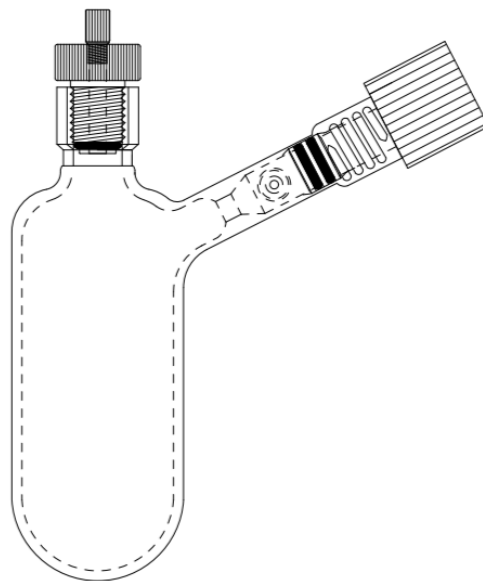扫码查看，今日实时
优惠价

25#螺纹口

P662250	250	60×145	25#
P662350	350	80×115	25#
P662500	500	80×145	25#

标配配件：

B680015 具孔，可匹配3.2外径通气管

S600004N 0-4mm高真空阀门，具7#内螺纹

扫码查看，今日实时
优惠价具高真空节门通气接口，
可对反应瓶进行进/抽气操作。

推荐组装产品：

适配25#螺纹口

B100025	#25 具O型圈外螺纹盖（含EP材质O型圈）
B100025F	#25 具O型圈外螺纹盖（含四氟包覆O型圈）
B500025	#25 四氟外螺纹盖（含四氟密封环）
B510025	#25 PE外螺纹盖（含四氟密封盖）
B500025Y	#25 具密封环外螺纹盖（含压力表）
B500025Z	#25 具密封环外螺纹盖（含真空表）
B530025Y	#25 具密封环外螺纹盖（含真空/压力表）
B520025-6	#25 具密封环外螺纹盖（含0.6 MPa泄压阀）
B520025-4	#25 具密封环外螺纹盖（含0.4 MPa泄压阀）

适配15#螺纹口

B100015	#15 具O型圈外螺纹盖（含EP材质O型圈）
B100015F	#15 具O型圈外螺纹盖（含四氟包覆O型圈）
B500015	#15 四氟外螺纹盖（含四氟密封环）
B510015	#15 PE外螺纹盖（含四氟密封盖）
B100015T	#15 具导气管/真空接口外螺纹盖（含EP材质O型圈）
B100015TF	#15 具导气管/真空接口外螺纹盖（含四氟包覆O型圈）
B500015Y	#15 具密封环外螺纹盖（含压力表）
B500015Z	#15 具密封环外螺纹盖（含真空表）
B530015Y	#15 具密封环外螺纹盖（含真空/压力表）
B520015-6	#15 具密封环外螺纹盖（含0.6 MPa泄压阀）
B520015-4	#15 具密封环外螺纹盖（含0.4 MPa泄压阀）

安全提示：由于本产品的耐压性质及使用后产品状况不定性（特别是内壁划伤 磕伤），一定要确保排除所有不确定性安全隐患，且处于三重防护（护目镜，通风橱，防爆盾）状态下再开始使用。

综上所述，欣维尔不能保证本产品多因素导致的不确定性安全隐患及由此带来的损伤，将无法承担损害责任。

欣维尔专利产品

1. 采用3.3高硼硅高强度，加厚玻璃管制得，管壁厚实且均匀。泄压管外部选用进口镀膜材料包覆，从而有效避免实验过程中发生爆裂的危险，有效提高实验安全系数。
2. 具不同规格泄压阀设计，当系统内压力大于设定值时，泄压阀可自动泄压，此设计可有效提高实验安全性。
3. 泄压阀经厂家提前标定，逐一检测。泄压阀可自动/手动泄压，此法可有效提高实验安全性。
4. PEEK接头可耐压力6MPa，PEEK连接管可耐压力35MPa。

泄压管，单排管，镀膜

标配压力表和泄压阀。




货号	螺纹型号	泄压阀规格
M680415D	15 #	0.4 MPa
M680615D	15 #	0.6 MPa
标配配件:		
B500015Y	具孔15#内螺纹四氟塞, 0-1 MPa压力表	
B680015	具密封环15#内螺纹盖, 标配耐压PEEK头	
B520015-4	具密封环15#内螺纹盖, 标配0.4 MPa泄压阀	
B520015-6	具密封环15#内螺纹盖, 标配0.6 MPa泄压阀	
T250301PK	3.2mm外径壁厚0.8mm, PEEK管, 1米长	

扫码查看，今日实时
优惠价

泄压管，单排管，镀膜，高真空阀

标配压力表和泄压阀。

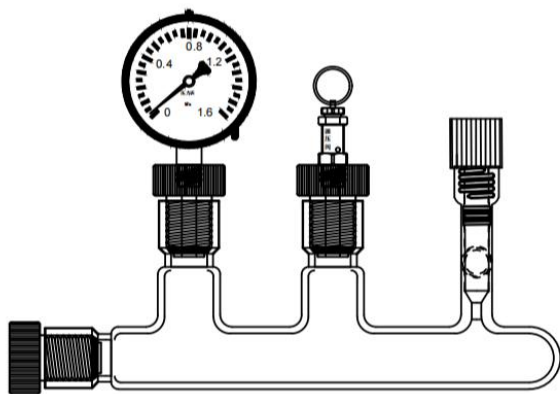

- 可与耐压瓶，气源搭配使用，可实现一体化压力监控，泄压，气体置换的功能。
- 具高真空节门通气接口，可对反应瓶进行进/抽气操作。

货号	螺纹型号	泄压阀规格
M680415K	15#	0.4 MPa
M680615K	15#	0.6 MPa
标配配件:		
S600004T	四氟保护的高真空节门, 90°, 0-4mm	
B500015Y	具孔15#内螺纹四氟塞, 0-1MPa压力表	
B520015-4	具密封环15#内螺纹盖, 标配0.4MPa泄压阀	
B520015-6	具密封环15#内螺纹盖, 标配0.6MPa泄压阀	
B680015	具密封环15#内螺纹盖, 标配耐压PEEK头	
T250301PK	3.2mm外径壁厚0.8mm, PEEK管, 1米长	


扫码查看，今日实时
优惠价

安全提示: 由于本产品的耐压性质及使用后产品状况不定性（特别是内壁划伤 磕伤），一定要确保排除所有不确定性安全隐患，且处于三重防护（护目镜，通风橱，防爆盾）状态下再开始使用。

综上所述，欣维尔不能保证本产品多因素导致的不确定性安全隐患及由此带来的损伤，将无法承担损害责任。

组装搭配示意图：

压力容器类

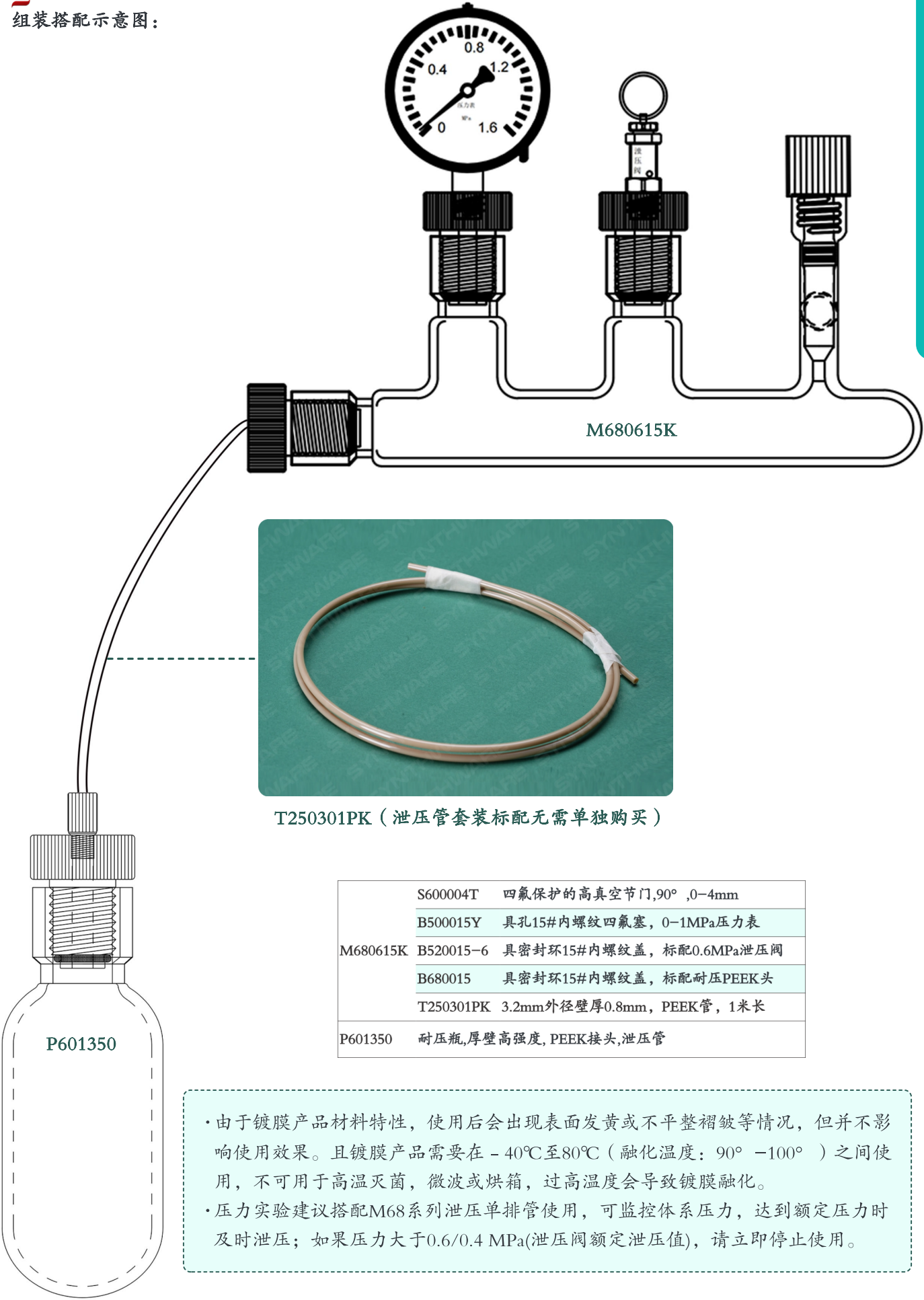


T250301PK（泄压管套装标配无需单独购买）

S600004T	四氟保护的高真空节门,90° ,0-4mm
B500015Y	具孔15#内螺纹四氟塞, 0-1MPa压力表
M680615K	B520015-6 具密封环15#内螺纹盖, 标配0.6MPa泄压阀
B680015	具密封环15#内螺纹盖, 标配耐压PEEK头
T250301PK	3.2mm外径壁厚0.8mm, PEEK管, 1米长
P601350	耐压瓶,厚壁高强度, PEEK接头,泄压管

• 由于镀膜产品材料特性，使用后会出现表面发黄或不平整褶皱等情况，但并不影响使用效果。且镀膜产品需要在 - 40℃至80℃（融化温度：90° -100° ）之间使用，不可用于高温灭菌，微波或烘箱，过高温度会导致镀膜融化。

• 压力实验建议搭配M68系列泄压单排管使用，可监控体系压力，达到额定压力时及时泄压；如果压力大于0.6/0.4 MPa(泄压阀额定泄压值)，请立即停止使用。

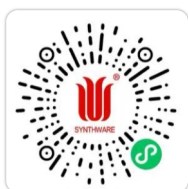

扫码查看，今日实时
优惠价



选配配件：

适配15#螺纹口

R111	O型圈,棕色氟橡胶, 内径×宽度11.81×2.67mm
R111QB	O型圈,四氟全包耐腐蚀型,内径×宽度,11.81×2.67mm
Q111	O型圈,白色全惰性, 内径×宽度,11.81×2.67mm

外螺纹盖，15#，EP

15#四氟材质外螺纹盖，标配EP材质O型圈。

货号	描述
B100015	15#内螺纹四氟塞子,含O型圈
标配配件:	
B100015G	15#内螺纹四氟塞
R111EP	O型圈,黑色EP,抗极性溶剂,内径×宽度100.77*2.62mm

外螺纹盖，25#，EP


25#四氟材质外螺纹盖，标配EP材质O型圈。

货号	描述
B100025	25#内螺纹四氟塞子,含O型圈
标配配件:	
B100025G	25#内螺纹四氟塞
R212EP	O型圈,黑色EP,抗极性溶剂,内径×宽度21.8×3.5mm

适配25#螺纹口

R212	O型圈,棕色氟橡胶, 内径×宽度,21.8×3.5mm
R212QB	O型圈,四氟全包耐腐蚀型,内径×宽度24×3.5mm
Q212	O型圈全惰性白色, 内径21.8线径3.5mm

欣维尔专利产品2025204895739

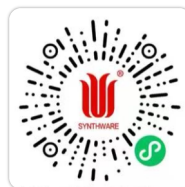

扫码查看，今日实时
优惠价



外螺纹盖，15#，四氟密封环

15#四氟材质外螺纹盖，标配聚四氟乙烯材质密封环。

货号	规格
B500015	15#内螺纹,全四氟塞,含密封圈
标配配件:	
B500015G	15#内螺纹,全四氟塞
R110015	四氟密封环

外螺纹盖，25#，四氟密封环

25#四氟材质外螺纹盖，标配聚四氟乙烯材质密封环。

货号	规格
B500015	15#内螺纹,全四氟塞,含密封圈
标配配件:	
B500015G	15#内螺纹,全四氟塞
R110015	四氟密封环

欣维尔专利产品2025204895739

外螺纹盖，#15，四氟密封盖

15#PE材质外螺纹盖，标配聚四氟乙烯材质密封盖。

货号	规格
B510015	15#内螺纹,PE塞,含四氟密封盖
标配配件:	
B510015G	15#内螺纹塞,PE材质
R120015	四氟密封盖



扫码查看，今日实时
优惠价



外螺纹盖，#25，四氟密封盖

25#PE材质外螺纹盖，标配聚四氟乙烯材质密封盖。

货号	规格
B510025	25#内螺纹,PE塞,含四氟密封盖
标配配件:	
B510025G	25#内螺纹塞, PE材质
R120025	四氟密封盖

外螺纹盖，#15，导气管/真空接口

15#四氟材质具孔外螺纹盖，标配导气管及O型圈。

货号	螺纹型号	O型圈
B100015T	15#	EP材质O型圈
B100015TF	15#	四氟包覆O型圈



扫码查看，今日实时
优惠价




外螺纹盖，#15，压力表，密封环

15#四氟材质具孔外螺纹盖，标配压力表和聚四氟乙烯材质密封环。

货号	表量程 MPa
B500015Y	0-1
标配配件:	
N990002	0-1 MPa全不锈钢压力表
B500015J	具孔15#螺纹塞
R110015	15#螺纹塞可拆卸密封环
R224EP	外径*圈粗度: 7.2*2.4mm




扫码查看，今日实时
优惠价

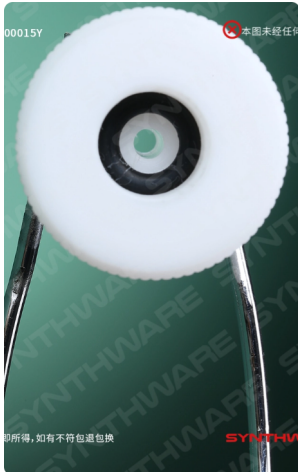

外螺纹盖，#25，压力表，密封环

25#四氟材质具孔外螺纹盖，标配压力表和聚四氟乙烯材质密封环。

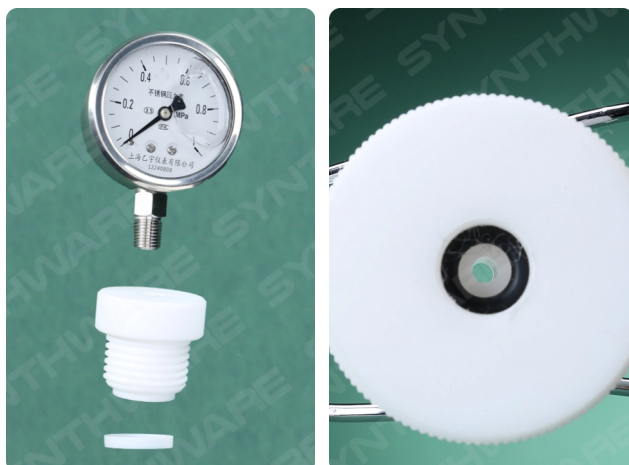

货号	表量程 MPa
B500025Y	0-1
标配配件:	
N990002	0-1 MPa全不锈钢压力表
B500025J	具孔25#螺纹塞
R110025	25#螺纹塞可拆卸密封环
R224EP	外径*圈粗度: 7.2*2.4mm



扫码查看，今日实时
优惠价

外螺纹盖，#15，真空表，EP

15#四氟材质具孔外螺纹盖，标配真空表和EP材质O型圈。

货号	表量程 MPa
M610015	-0.1-0
标配配件:	
N990001	-0.1-0 MPa全不锈钢真空表
R111EP	O型圈, 内径×宽度, 10.77*2.62



扫码查看，今日实时
优惠价



外螺纹盖，#15，真空表，密封环

15#四氟材质具孔外螺纹盖，标配真空表和聚四氟乙烯材质密封环。



货号	表量程 MPa
B500015Z	-0.1-0
标配配件:	
N990001	-0.1-0 MPa全不锈钢真空表
B500015J	具孔15#螺纹塞
R110015	15#螺纹塞可拆卸密封环
R224EP	外径*圈粗度: 7.2*2.4mm



扫码查看，今日实时
优惠价

外螺纹盖，#25，真空表，密封环

25#四氟材质具孔外螺纹盖，标配真空表和聚四氟乙烯材质密封环。

货号	表量程 MPa
B500025Z	-0.1-0
标配配件:	
N990001	-0.1-0 MPa全不锈钢真空表
B500025J	具孔25#螺纹塞
R110025	25#螺纹塞可拆卸密封环
R224EP	外径*圈粗度: 7.2*2.4mm



扫码查看，今日实时
优惠价



外螺纹盖，#15，真空/压力表，密封环

15#四氟材质具孔外螺纹盖，标配真空/压力表和聚四氟乙烯材质密封环。



货号	表量程 MPa
B530015Y	- 0.1-0.9
标配配件:	
N990003	- 0.1-0.9MPa全不锈钢真空表
B500015J	具孔15#螺纹塞
R110015	15#螺纹塞可拆卸密封环
R224EP	外径*圈粗度: 7.2*2.4mm



扫码查看，今日实时
优惠价

外螺纹盖，#25，真空/压力表，密封环

25#四氟材质具孔外螺纹盖，标配真空/压力表和聚四氟乙烯材质密封环。

货号	表量程 MPa
B530025Y	- 0.1-0.9
标配配件:	
N990003	- 0.1-0.9MPa全不锈钢真空表
B500025J	具孔25#螺纹塞
R110025	25#螺纹塞可拆卸密封环
R224EP	外径*圈粗度: 7.2*2.4mm



扫码查看，今日实时
优惠价



外螺纹盖，#15，PEEK，密封环

15#四氟材质具孔外螺纹盖，标配PEEK和聚四氟乙烯材质密封环。PEEK头耐压范围6MPa以内。



货号	描述
B680015	具孔，可匹配3.2外径通气管
标配配件：	
B700003	耐压PEEK头，适配外径3.2mm通气管
B680015J	具孔15#螺纹塞，
R110015	15#螺纹塞可拆卸密封环



扫码查看，今日实时
优惠价

外螺纹盖，#25，PEEK，密封环

25#四氟材质具孔外螺纹盖，标配PEEK和聚四氟乙烯材质密封环。PEEK头耐压范围6MPa以内。

货号	描述
B680025	具孔，可匹配3.2外径通气管
标配配件：	
B700003	耐压PEEK头，适配外径3.2mm通气管
B680025J	具孔25#螺纹塞
R110025	25#螺纹塞可拆卸密封环



扫码查看，今日实时
优惠价



外螺纹盖，#15，0.4MPa泄压阀，密封环

15#四氟材质具孔外螺纹盖，标配0.4MPa泄压阀和聚四氟乙烯材质密封环。



⚠ 泄压阀经厂家提前标定，
螺母勿动

货号	压力范围
B520015-4	0.4MPa
标配配件：	
XY0004	0.4MPa 泄压阀
B500015J	具孔15#螺纹塞
R110015	15#螺纹塞可拆卸密封环
R224EP	外径*圈粗度：7.2*2.4mm



扫码查看，今日实时
优惠价


外螺纹盖，#25，0.4MPa泄压阀，密封环

25#四氟材质具孔外螺纹盖，标配0.4MPa泄压阀和聚四氟乙烯材质密封环。

货号	压力范围
B520025-4	0.4MPa
标配配件:	
XY0004	0.4MPa泄压阀
B500025J	具孔25#螺纹塞
R110025	25#螺纹塞可拆卸密封环
R224EP	外径*圈粗度: 7.2*2.4mm



扫码查看，今日实时优惠价

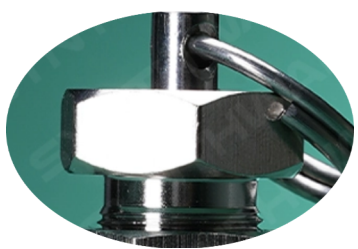

⚠ 泄压阀经厂家提前标定，螺母勿动

外螺纹盖，#15，0.6MPa泄压阀，密封环

15#四氟材质具孔外螺纹盖，标配0.6MPa泄压阀和聚四氟乙烯材质密封环。



货号	压力范围
B520015-6	0.6MPa
标配配件:	
XY0006	0.6MPa泄压阀
B500015J	具孔15#螺纹塞
R110015	15#螺纹塞可拆卸密封环
R224EP	外径*圈粗度: 7.2*2.4mm



扫码查看，今日实时优惠价

外螺纹盖，#25，0.6MPa泄压阀，密封环

25#四氟材质具孔外螺纹盖，标配0.6MPa泄压阀和聚四氟乙烯材质密封环。

货号	压力范围
B520025-6	0.6MPa
标配配件:	
XY0006	0.6MPa泄压阀
B500025J	具孔25#螺纹塞
R110025	25#螺纹塞可拆卸密封环
R224EP	外径*圈粗度: 7.2*2.4mm



扫码查看，今日实时优惠价




真空表，不锈钢，1/4"，-0.1-0 MPa
表盘60mm（-0.1-0）MPa螺纹规格：1/4"



压力表，不锈钢，1/4"，0-1.0 MPa
表盘60mm（0-1）MPa，螺纹规格：1/4"



真空/压力表，不锈钢，1/4"，-0.1-0.9 MPa
表盘60mm（-0.1-0.9）MPa螺纹规格：1/4"

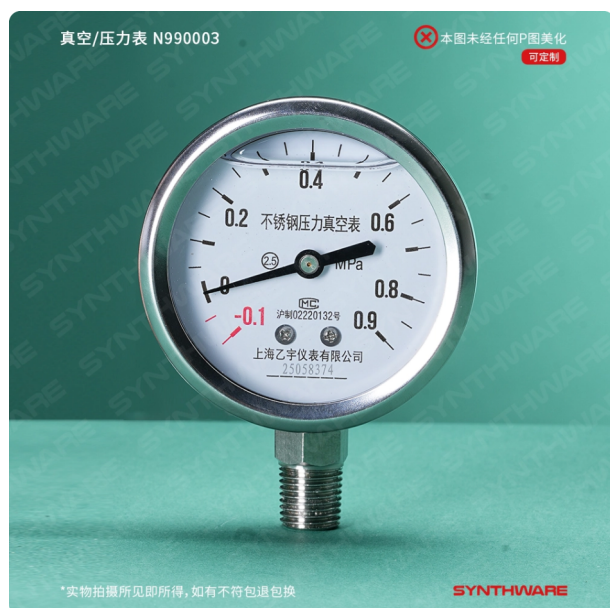

泄压阀

适配于耐压瓶具孔螺纹盖。当系统内压力大于设定值时，泄压阀可自动/手动泄压，可有效提高实验安全性。泄压阀经厂家提前标定，逐一检测。

货号	压力范围
XY0004	0.4 MPa
XY0006	0.6 MPa



扫码查看，今日实时优惠价



⚠ 泄压阀经厂家提前标定，螺母勿动

接头，耐压，PEEK

泄压管及连接专用配件。

货号	压力范围
B700003	6MPa



扫码查看，今日实时优惠价



连接管，耐压，PEEK

泄压管及连接专用配件。

货号	压力范围	外径*壁厚*长度
T250301PK	35MPa	3.2mm*0.8mm*1米



扫码查看，今日实时优惠价

