


为您的创新研究提供一个可靠的‘无水无氧空间’。



欣维尔无水无氧类玻璃仪器专为处理对空气和水敏感的化合物而设计的，通过引入惰性气体来隔绝空气和水。我们的产品线包括完整的真空管线及组件，模块化组合设计，双排管，反应瓶，恒压滴液漏斗，接头等均采用标准接口，可自由组合，轻松搭建从简单到复杂的无水无氧反应装置。

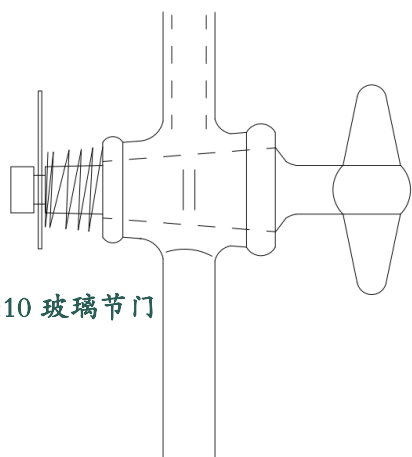

1:10 玻璃节门

玻璃节门：

所标配的玻璃节门，标准1:10锥度精密研磨，孔位正对齐，确保可互换。涂抹真空脂可保证密封性。玻璃节门后部带有弹簧卡，可确保玻璃节门总能保持恒定的张力。适用于真空度要求较高的实验，静态和动态真空较其他类型节门效果更出色。

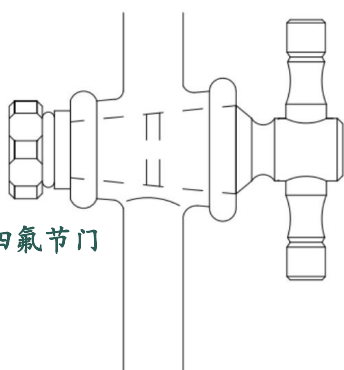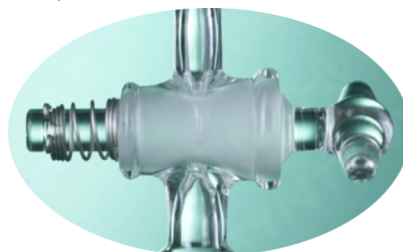


1:5 四氟节门

四氟节门：

标准1:5锥度精密研磨，旋塞磨口抛光处理，延长四氟旋塞使用寿命，确保良好的密封性和互换性。旋塞整体由聚四氟乙烯材质制成，具有良好的化学稳定性，不会被流经的化学品腐蚀或反应。

注：在无水无氧操作中不建议首选四氟节门。

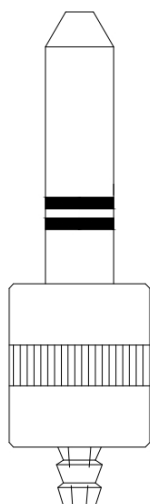

高真空通气节门


高真空通气节门：

聚四氟乙烯包覆的高真空通气节门，二合一直线型设计，满足高真空节门的密封性能外，还具备对系统通气的功能。高效，省空间。拧动节门即可进行通气操作，拧紧节门出现白色密封环即停止进气，瓶体为密封状态。




高真空节门（A）：

聚四氟乙烯材质包裹的外螺纹高真空节门专为真空应用设计，可耐真空低至 10^{-4} Pa。具高强度螺纹及双层密封圈设计，可有效防止O型圈直接暴露于试剂中，耐腐蚀。同时，无需真空脂即可提供出色的真空密封效果及动态密封条件，同时减少试剂被真空脂污染。节门杆顶部精密锥形角度设计，减少磨损，可与玻璃件紧密密封（密封状态时呈现白色密封环）。

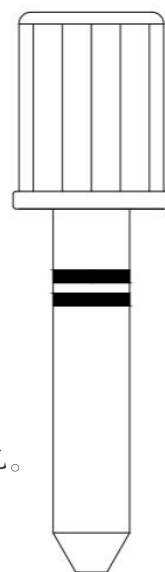

高真空节门（A）

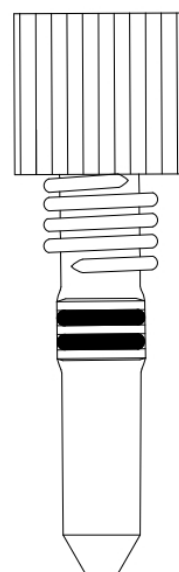


高真空节门（B）

高真空节门（B）：


聚四氟乙烯材质包裹的内螺纹高真空节门专为真空应用设计，相较于美式外螺纹高真空节门杆不容易出现脱扣，拿不出的情况。

轻型高真空节门：

轻型四氟包覆的高真空节门，节门设计轻巧，螺纹细腻不易碎，在欧美地区广泛使用。节门杆四氟包覆并具有双密封圈，可耐受真空低至 10^{-4} Pa(动态真空)，可有效防止O型圈直接暴露于试剂中，同时，无需真空脂即可提供出色的密封效果。节门顶部精密锥形角度设计，减少磨损，可与玻璃件紧密密封（密封状态时呈现白色密封环）。

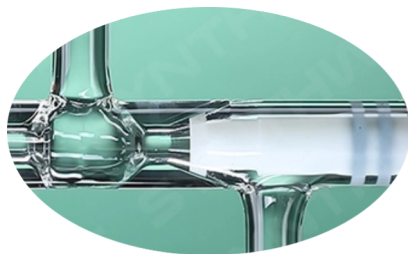


聚四氟乙烯（PTFE）包覆

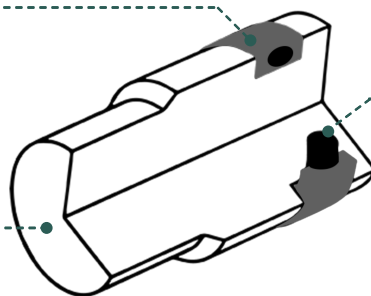

O型圈


聚四氟乙烯（PTFE）材质

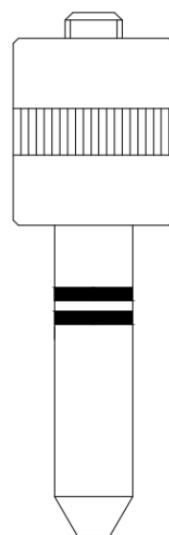

轻型高真空节门

反应管，SCHLENK，三通节门

- SCHLENK反应管，通过旋转侧支管三通旋塞对反应管进行抽换气操作。
- 反应管顶部内口由金刚砂研磨，锥度1:10经正弦规测试，保证密封性。
- 适用于没有双排管的实验室条件下的无水无氧操作。侧节门有玻璃和四氟节门两种可供选择。

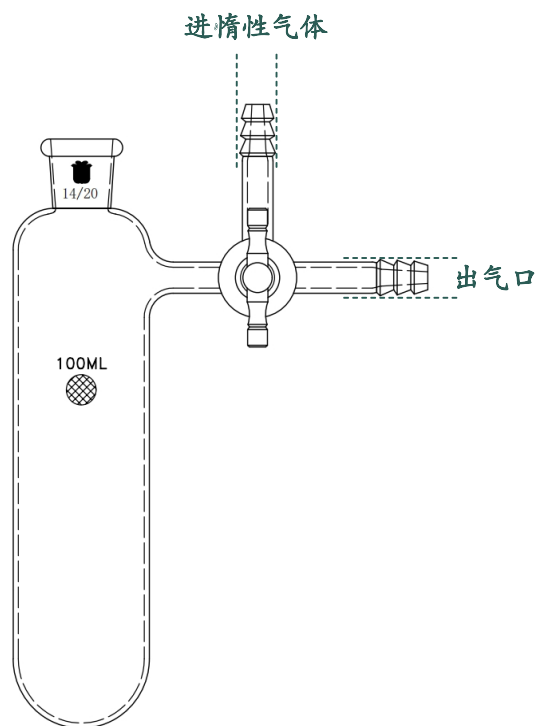

四氟节门


货号	容量 (mL)	外径(mm)	磨口	节门
F821410S	10	22.5	14/20	四氟
F821425S	25	22.5	14/20	四氟
F821450S	50	22.5	14/20	四氟
F821910S	10	22.5	19/22	四氟
F821925S	25	22.5	19/22	四氟
F821950S	50	32	19/22	四氟
F822450S	50	32	24/40	四氟
F821100S	100	40	14/20	四氟
F829100S	100	40	19/22	四氟
F824100S	100	40	24/40	四氟
F829250S	250	50	19/22	四氟
F824250S	250	50	24/40	四氟
F824350S	350	50	24/40	四氟
标配配件:				
S201530	2mm T型三通四氟节门塞			



扫码查看，今日实时
优惠价

玻璃节门

货号	容量 (mL)	外径 (mm)	磨口	节门
F821410G	10	22.5	14/20	玻璃
F821425G	25	22.5	14/20	玻璃
F821450G	50	22.5	14/20	玻璃
F821910G	10	22.5	19/22	玻璃
F821925G	25	22.5	19/22	玻璃
F821950G	50	32	19/22	玻璃
F822450G	50	32	24/40	玻璃
F821100G	100	40	14/20	玻璃
F829100G	100	40	19/22	玻璃
F824100G	100	40	24/40	玻璃
F829250G	250	50	19/22	玻璃
F824250G	250	50	24/40	玻璃
F824350G	350	50	24/40	玻璃
标配配件:				
S510217	T型孔玻璃塞，2mm孔径			
S691230	不锈钢弹簧及卡子			

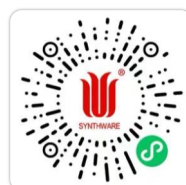

扫码查看，今日实时
优惠价

反应管，SCHLENK，玻璃节门，内螺纹

- Schlenk反应管，反应管顶部具15#内螺纹，四氟盖搭配O型圈，较普通磨口胶塞密封性更好。
- 通过侧支管旋塞节门将反应瓶连接至双排管，用于无水无氧操作。

货号	容量 (mL)	瓶身外径×螺纹口以下长度(mm)	螺纹口规格
P370001	15	26×70	15#
P370020	20	26*110	15#
P370002	35	26×125	15#
P370003	38	26×135	15#
P370004	48	46×70	15#
P370005	100	46×110	15#
P370006	120	46×130	15#
标配配件：			
S461230	2mm玻璃节门塞		
S691230	不锈钢弹簧及卡子		
B100015G	15#内螺纹四氟塞		
R111EP	O型圈,黑色EP,抗极性溶剂, 内径×宽度,100.77*2.62mm		
 扫码查看，今日实时 优惠价			



可根据实验需求选配不同材质的O型圈：

R111	O型圈,棕色氟橡胶, 内径×宽度11.81×2.67mm
R111QB	O型圈,四氟全包耐腐蚀型,内径×宽度,11.81×2.67mm
Q111	O型圈,白色全惰性, 内径×宽度,11.81×2.67mm

反应瓶，SCHLENK，球型，平底

- 平底球型SCHLENK反应瓶，通过侧支管旋塞节门将反应瓶连接至双排管，用于无水无氧操作。
- 反应瓶顶部内口由金刚砂研磨，锥度1:10经正弦规测试，保证密封性。
- 平底设计，可直接放置于操作台，稳定不晃。
- 侧节门有玻璃和四氟节门两种可供选择。



四氟节门


货号	容量 (mL)	磨口	节门
E531050S	50	14/20	四氟
E531950S	50	19/22	四氟
E532450S	50	24/40	四氟
E531100S	100	14/20	四氟
E539100S	100	19/22	四氟
E534100S	100	24/40	四氟
E531250S	250	14/20	四氟
E539250S	250	19/22	四氟
E534250S	250	24/40	四氟
E539500S	500	19/22	四氟
E534500S	500	24/40	四氟
E538500S	500	29/42	四氟
E53191LS	1000	19/22	四氟
E53241LS	1000	24/40	四氟
E53242LS	2000	24/40	四氟
标配配件:			
S181125	2mm四氟节门塞		



扫码查看，今日实时
优惠价

玻璃节门



货号	容量 (mL)	磨口	节门
E531050	50	14/20	玻璃
E531950	50	19/22	玻璃
E532450	50	24/40	玻璃
E531100	100	14/20	玻璃
E539100	100	19/22	玻璃
E534100	100	24/40	玻璃
E531250	250	14/20	玻璃
E539250	250	19/22	玻璃
E534250	250	24/40	玻璃
E539500	500	19/22	玻璃
E534500	500	24/40	玻璃
E538500	500	29/42	玻璃
E53191L	1000	19/22	玻璃
E53241L	1000	24/40	玻璃
E53242L	2000	24/40	玻璃
标配配件:			
S461230	2mm玻璃节门塞		
S691230	不锈钢弹簧及卡子		

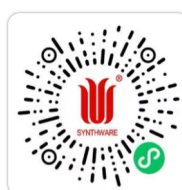

扫码查看，今日实时
优惠价

反应管, SCHLENK, 玻璃节门, 内螺纹

- Schlenk球型反应瓶, 反应瓶顶部具15#内螺纹, 四氟盖搭配O型圈, 较普通磨口胶塞密封性更好。
- 通过侧支管旋塞节门将反应瓶连接至双排管, 用于无水无氧操作。
- 侧节门有玻璃和四氟节门两种可供选择。

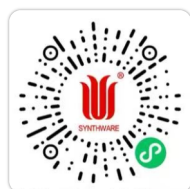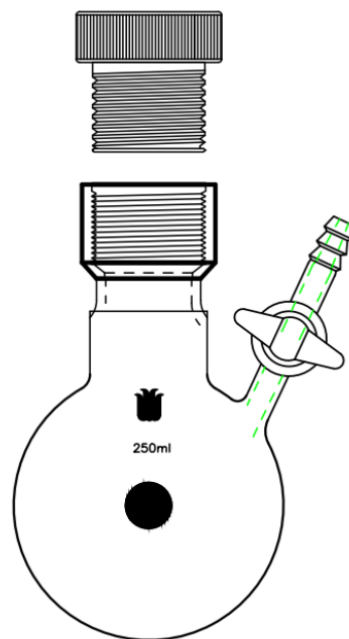

扫码查看, 今日实时
优惠价

四氟节门

货号	螺纹口	节门材质	节门孔径mm	容量ml
G531025S	15#	四氟	2	25
G531050S	15#	四氟	2	50
G531950S	15#	四氟	2	50
G532450S	15#	四氟	2	50
G531100S	15#	四氟	2	100
G539100S	15#	四氟	2	100
G534100S	15#	四氟	2	100
G531250S	15#	四氟	2	250
G539250S	15#	四氟	2	250
G534250S	15#	四氟	2	250
G539500S	15#	四氟	2	500
G534500S	15#	四氟	2	500
G538500S	15#	四氟	2	500
G53191LS	25#	四氟	2	1000
G53241LS	25#	四氟	2	1000
G53242LS	25#	四氟	2	2000
标配配件:				
B100015G	15#内螺纹四氟塞			
R111EP	O型圈,黑色EP,抗极性溶剂,内径×宽度,100.77*2.62mm			
B100025G	25#内螺纹四氟塞			
R212EP	O型圈,黑色EP,抗极性溶剂,内径×宽度21.8×3.5mm			
S181125	2mm四氟节门塞			



扫码查看, 今日实时
优惠价

玻璃节门

货号	螺纹口	节门材质	节门孔径mm	容量ml
G531025G	15#	玻璃	2	25
G531050G	15#	玻璃	2	50
G531950G	15#	玻璃	2	50
G532450G	15#	玻璃	2	50
G531100G	15#	玻璃	2	100
G539100G	15#	玻璃	2	100
G534100G	15#	玻璃	2	100
G531250G	15#	玻璃	2	250
G539250G	15#	玻璃	2	250
G534250G	15#	玻璃	2	250
G539500G	15#	玻璃	2	500
G534500G	15#	玻璃	2	500
G538500G	15#	玻璃	2	500
G53191LG	25#	玻璃	2	1000
G53241LG	25#	玻璃	2	1000
G53242LG	25#	玻璃	2	2000
标配配件:				
B100015G	15#内螺纹四氟塞			
R111EP	O型圈,黑色EP,抗极性溶剂,内径×宽度100.77*2.62mm			
B100025G	25#内螺纹四氟塞			
R212EP	O型圈,黑色EP,抗极性溶剂,内径×宽度21.8×3.5mm			
S461230	2mm玻璃节门塞			
S691230	不锈钢弹簧及卡子			


可根据实验需求选配不同材质的O型圈:

R111	O型圈,棕色氟橡胶, 内径×宽度11.81×2.67mm
R111QB	O型圈,四氟全包耐腐蚀型,内径×宽度,11.81×2.67mm
Q111	O型圈,白色全惰性, 内径×宽度,11.81×2.67mm

R212	O型圈,棕色氟橡胶, 内径×宽度,21.8×3.5mm
R212QB	O型圈,四氟全包耐腐蚀型,内径×宽度24×3.5mm
Q212	O型圈全惰性白色, 内径21.8线径3.5mm

反应瓶，SCHLENK，球型，高真空节门，螺纹口

- SCHLENK球型反应瓶，反应瓶顶部具15#内螺纹，四氟盖搭配O型圈，较普通磨口胶塞密封性更好。
- 通过侧支管高真空节门将反应瓶连接至双排管，用于无水无氧操作。

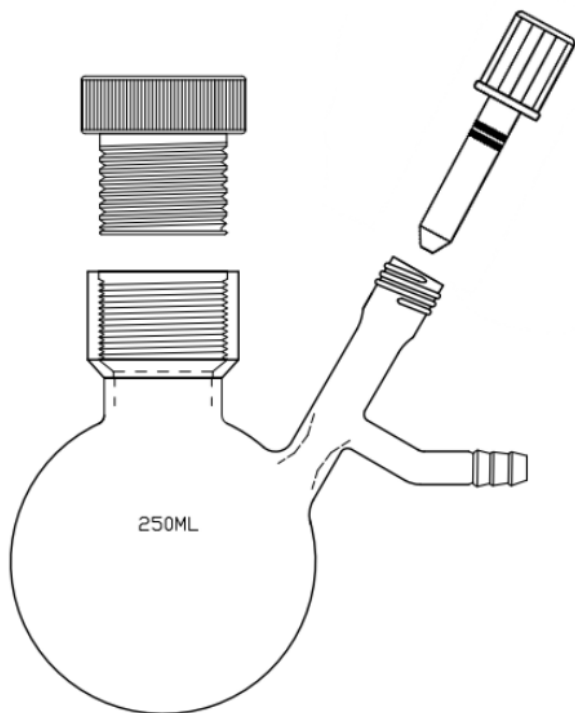

货号	节门	节门孔径mm	螺纹口	容量ml
G541050	高真空	4	15#	50
G541100	高真空	4	15#	100
G541250	高真空	4	15#	250
G541258	高真空	8	15#	250
G541500	高真空	4	25#	500
G544508	高真空	8	25#	500
G54241L	高真空	4	25#	1000
G5441L8	高真空	8	25#	1000
G54242L	高真空	4	25#	2000
G5442L8	高真空	8	25#	2000
标配配件：				
B100015G	15#内螺纹四氟塞			
R111EP	O型圈,黑色EP,抗极性溶剂,内径×宽度,100.77*2.62mm			
B100025G	25#内螺纹四氟塞			
R212EP	O型圈,黑色EP,抗极性溶剂,内径×宽度21.8×3.5mm			
S600004T	四氟保护的高真空阀(全包)0-4mm			
S600008T	四氟保护的高真空阀(全包)0-8mm			



扫码查看，今日实时优惠价



可根据实验需求选配不同材质的O型圈：

R111	O型圈,棕色氟橡胶,内径×宽度11.81×2.67mm
R111QB	O型圈,四氟全包耐腐蚀型,内径×宽度,11.81×2.67mm
Q111	O型圈,白色全惰性,内径×宽度,11.81×2.67mm


R212	O型圈,棕色氟橡胶,内径×宽度,21.8×3.5mm
R212QB	O型圈,四氟全包耐腐蚀型,内径×宽度24×3.5mm
Q212	O型圈全惰性白色,内径21.8线径3.5mm

一体式溶剂存储瓶，经实验测试，静态真空可以保持48小时以上。7天瓶内依然保持真空状态！

溶剂存储瓶，直管型，内置玻璃磁子

- 溶剂存储瓶，内置玻璃磁子有效解决了溶剂存储瓶瓶口细，难放磁子的问题。标配高温磁子，可在260°下持续使用。玻璃磁子相比普通四氟磁子更耐腐蚀，但搅拌过程中在玻璃瓶体内壁产生蹭伤，在非高压实验中，这种蹭伤不会对产品的强度造成影响，请放心使用。
- 可搭配双排管用于空气敏感试剂的搅拌和保存。

货号	容量 (mL)	高真空节门	外径×长度 (mm)	价格
B424250	250	0-4mm	60*140	 扫码查看，今日实时 优惠价
B428250	250	0-8mm	60*140	
B424350	350	0-4mm	70*140	
B428350	350	0-8mm	70*140	
标配配件：				
S600004T	0-4mm 四氟保护的高真空阀（四氟全包）			
S600008T	0-8mm四氟保护的高真空阀（四氟全包）			

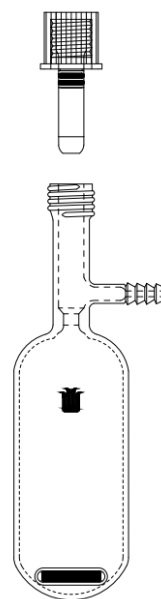

溶剂存储瓶，直管型，分体式

- 分体式溶剂存储瓶，分体式法兰连接设计，标配O型圈和法兰夹完成连接与密封。此设计无需真空脂，可有效避免因真空脂密封而导致体系污染的情况。法兰口内径分别为15mm和25mm，大口径设计易清洗，同时便于磁子和固体物料的放入/取出。
- 可搭配双排管用于空气敏感试剂的搅拌和保存。

货号	容量 (mL)	高真空节 门	外径 × 长度 (mm)	法兰型 号	价格
E455250	250	0-4mm	60 × 140	15#	 扫码查看，今日实时 优惠价
E455258	250	0-8mm	60 × 140	15#	
E455500	350	0-4mm	70 × 140	25#	
E455508	350	0-8mm	70 × 140	25#	
E45251L	500	0-4mm	80 × 150	25#	
E45581L	500	0-8mm	80 × 150	25#	
E45252L	1000	0-12mm	100 × 180	25#	
E45582L	2000	0-12mm	130 × 210	25#	
标配配件：					
S600004T	0-4mm 四氟保护的高真空阀 (四氟全包)				
S600008T	0-8mm 四氟保护的高真空阀 (四氟全包)				
CC2815	#15 法兰夹				
R116	#15 法兰 “O” 型圈				
CC3525	#25 法兰夹				
R226	#25 法兰 “O” 型圈				


选配配件：

R116QB	#15 法兰，四氟全包“O”型圈
R217QB	#25 法兰，四氟全包“O”型圈



溶剂存储瓶，茄型，高真空节门

茄型溶剂存储瓶，可搭配双排管用于空气敏感试剂的保存。

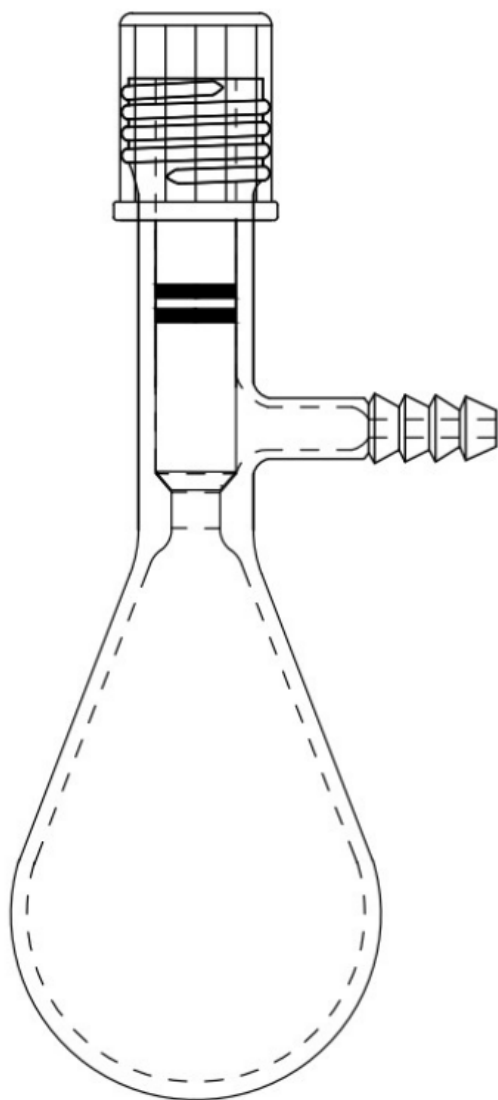

拧动节门即可进行通气操作，拧紧节门出现白色密封环即停止进气，瓶体为密封状态。

0-4mm 高真空阀

货号	容积 (ml)	高真空阀
E490010	10	0-4mm
E490025	25	0-4mm
E490050	50	0-4mm
E490100	100	0-4mm
E490250	250	0-4mm
E490500	500	0-4mm

标配配件：

S600004T 0-4mm 四氟保护的高真空阀（四氟全包）



扫码查看，今日实时
优惠价

0-8mm 高真空阀

E490825	25	0-8mm
E490850	50	0-8mm
E498100	100	0-8mm
E490258	250	0-8mm
E490508	500	0-8mm
E49081L	1000	0-8mm
E49082L	2000	0-8mm

标配配件：

S600008T 0-8mm 四氟保护的高真空阀（四氟全包）



扫码查看，今日实时
优惠价

0-12mm 高真空阀

E492100	100	0-12mm
E492250	250	0-12mm
E492500	500	0-12mm
E49121L	1000	0-12mm
E49122L	2000	0-12mm

标配配件：

S600012T 0-12mm 四氟保护的高真空阀（四氟全包）



扫码查看，今日实时
优惠价

溶剂存储瓶，球型

- 溶剂存储瓶，通过旋转旋塞对反应管进行溶剂接收，抽换气等操作。
- 溶剂存储瓶顶部内口由金刚砂研磨，锥度1:10经正弦规测试，保证密封性。
- 可搭配双排管可用于无水无氧操作下的溶剂转移，收集或存储。也可用于减压蒸馏下的接收瓶。
- 节门有玻璃和四氟节门两种可供选择。

四氟节门

货号	容积 (ml)	节门	磨口
N441250S	250	四氟	14/20
N441500S	500	四氟	14/20
N441000S	1000	四氟	14/20

标配配件:

S201530 可替换的2mm具四氟T型节门



扫码查看，今日实时优惠价



玻璃节门

N441250G	250	玻璃	14/20
N441500G	500	玻璃	14/20
N441000G	1000	玻璃	14/20

标配配件:

S510217 T型孔玻璃塞，2mm孔径

S691230 不锈钢弹簧及卡子



扫码查看，今日实时优惠价

一体式溶剂存储瓶，经实验测试，静态真空可以保持48小时以上。7天瓶内依然保持真空状态！

溶剂存储瓶，球型，内置玻璃磁子

- 内置玻璃磁子球型溶剂存储瓶，内置玻璃磁子有效解决了溶剂存储瓶瓶口细，难放磁子的问题。标配高温磁子，可在260° 下持续使用。玻璃磁子相比普通四氟磁子更耐腐蚀，但搅拌过程中在玻璃瓶体内壁产生蹭伤，在非高压实验中，这种蹭伤不会对产品的强度造成影响，请放心使用。
- 可搭配双排管用于空气敏感试剂的搅拌和保存。

货号	容积 (ml)	高真空阀
B410500	500	0-4mm
B410508	500	0-8mm

标配配件:

S600004T 0-4mm 四氟保护的高真空阀 (四氟全包)

S600008T 0-8mm 四氟保护的高真空阀 (四氟全包)




扫码查看，今日实时优惠价



溶剂存储瓶，球型，分体式

- 分体式溶剂存储瓶，分体式法兰连接设计，标配O型圈和法兰夹完成连接与密封。此设计无需真空脂，可有效避免因真空脂密封而导致体系污染的情况。法兰口内径分别为15mm和25mm，大口径设计易清洗，同时便于磁子和固体物料的放入/取出。
- 可搭配双排管用于空气敏感试剂的搅拌和保存。

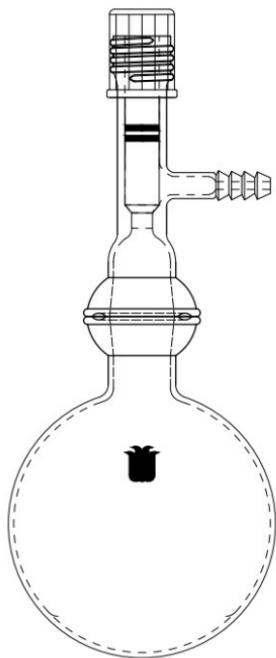

圆底

货号	容积 (ml)	高真空阀	法兰型号	价格
E475250	250	0-4mm	15#	
E475258	250	0-8mm	15#	
E475500	500	0-4mm	25#	
E475508	500	0-8mm	25#	
E47251L	1000	0-4mm	25#	
E47581L	1000	0-8mm	25#	
E47252L	2000	0-4mm	25#	
E47582L	2000	0-8mm	25#	
标配配件：				
S600004T	0-4mm 四氟保护的高真空阀 (四氟全包)			
S600008T	0-8mm 四氟保护的高真空阀 (四氟全包)			
CC2815	#15 法兰夹			
R116	#15 法兰“O”型圈			
CC3525	#25 法兰夹			
R226	#25 法兰“O”型圈			




扫码查看，今日实时
优惠价



平底

货号	容积 (ml)	高真空阀	法兰型号	价格
E465250	250	0-4mm	15#	
E465258	250	0-8mm	15#	
E465500	500	0-4mm	25#	
E465508	500	0-8mm	25#	
E46251L	1000	0-4mm	25#	
E46581L	1000	0-8mm	25#	
E46252L	2000	0-4mm	25#	
E46582L	2000	0-8mm	25#	
标配配件：				
S600004T	0-4mm 四氟保护的高真空阀 (四氟全包)			
S600008T	0-8mm 四氟保护的高真空阀 (四氟全包)			
CC2815	#15 法兰夹			
R116	#15 法兰“O”型圈			
CC3525	#25 法兰夹			
R226	#25 法兰“O”型圈			

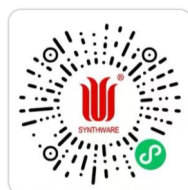

扫码查看，今日实时
优惠价



✓ 平底设计，可直接放置于操作台，稳定不晃。

选配配件：

R116QB	#15 法兰，四氟全包“O”型圈
R217QB	#25 法兰，四氟全包“O”型圈



溶剂存储瓶，茄型，分体式

- 分体式溶剂存储瓶，分体式法兰连接设计，标配O型圈和法兰夹完成连接与密封。此设计无需真空脂，可有效避免因真空脂密封而导致体系污染的情况。法兰口内径分别为15mm和25mm,大口径设计易清洗，同时便于磁子和固体物料的放入/取出。
- 可搭配双排管用于空气敏感试剂的搅拌和保存。

货号	容积 (ml)	高真空阀	法兰型号	价格
E485250	250	0-4mm	15#	
E485258	250	0-8mm	15#	
E485500	500	0-4mm	25#	
E485508	500	0-8mm	25#	
E48251L	1000	0-4mm	25#	
E48581L	1000	0-8mm	25#	
E48252L	2000	0-4mm	25#	
E48582L	2000	0-8mm	25#	

标配配件：


S600004T	0-4mm 四氟保护的高真空阀 (四氟全包)
S600008T	0-8mm 四氟保护的高真空阀 (四氟全包)
CC2815	#15 法兰夹
R116	#15 法兰“O”型圈
CC3525	#25 法兰夹
R226	#25 法兰“O”型圈



扫码查看，今日实时
优惠价

选配配件：

R116QB	#15 法兰,四氟全包“O”型圈
R217QB	#25 法兰,四氟全包“O”型圈

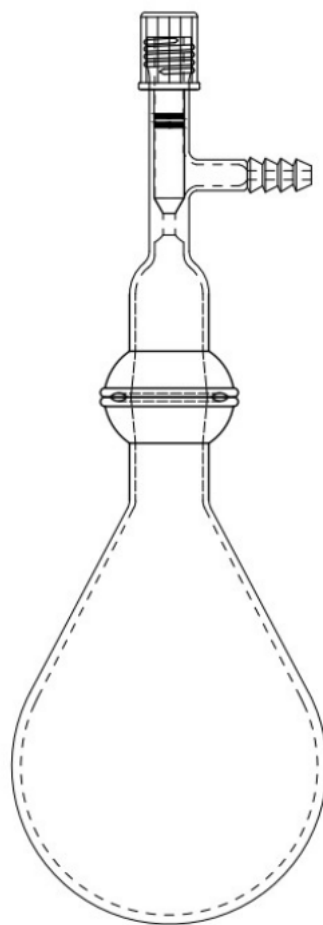


旋转式过滤器，G3砂板，SCHLENK

可用于空气敏感物质的过滤和重结晶。过滤管两端具14/20标准锥度外磨口，90°侧支管可连接14/20磨口接头连接至真空线。侧管上的隔离节门采用高真空节门。


货号	磨口	砂板直径 (mm)	砂板孔隙度
E351410M	14/20	10	G3(M)
E351420M	14/20	20	G3(M)
E351430M	14/20	30	G3(M)

标配配件：


S600004T	0-4mm 高真空阀(四氟全包)
----------	------------------

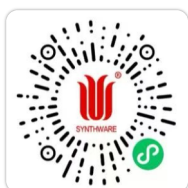

扫码查看，今日实时
优惠价

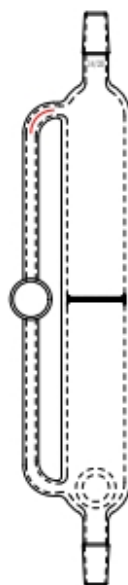

正视图

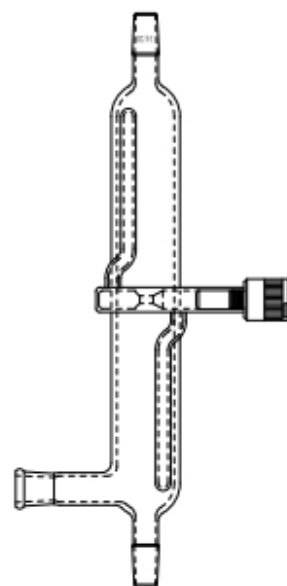


左视图

接头，流量控制，高真空节门

- 接头采用聚四氟乙烯材质包裹的高真空节门，此节门专为真空应用设计，可耐真空低至 10^{-4} Pa。
- 具固定棒设计，强化支撑，更耐用。
- 可搭配M16系列溶剂转移装置与Schlenk管线连接进行溶剂转移操作。



货号	磨口	总高×宽度 (mm)
A391420	14/20	150×75
A391922	19/22	160×75
A392440	24/40	180×75
A392942	29/42	180×75
标配配件：		
S600004T	0-4mm高真空阀(四氟全包)	

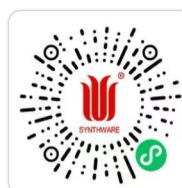

扫码查看，今日实时
优惠价




具高强度螺纹及双层密封圈设计，可有效防止O型圈直接暴露于试剂中，耐腐蚀。同时，无需真空脂即可提供出色的真空密封效果及动态密封条件，同时减少试剂被真空脂污染。节门杆顶部精密锥形角度设计，减少磨损，可与玻璃件紧密密封（密封状态时呈现白色密封环）。

接头，固体加料，SCHLENK


- 固体加料接头，可将固体物料添加到多颈烧瓶中，特别适用于惰性气体环境下，将空气敏感的化合物添加到烧瓶中。可以处理从50毫克到1克的固体。
- 磨口前端具导料管设计，以避免固体接触到接头和烧瓶磨口。



货号	磨口	容量ml
N581425	14/20	25
N581925	19/22	25
N582425	24/40	25
N581100	14/20	100
N589100	19/22	100
N584100	24/40	100

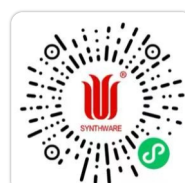

扫码查看，今日实时
优惠价

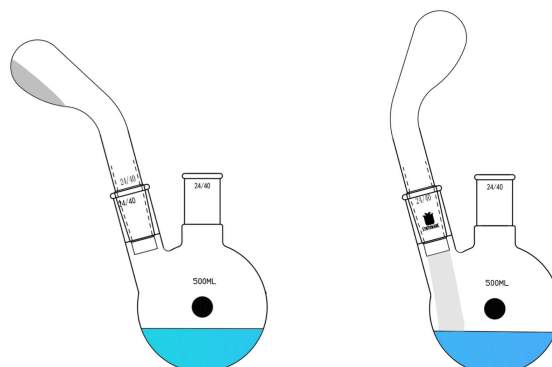


双头针头，不锈钢，四氟管

- 两端针头采用304不锈钢材质，中间延长管，为聚四氟乙烯材质。
 - 利用两个针头建立的一个气流/液体通道，从而使操作过程始终维持容器内部的无水无氧环境。
- 可安全高效地对惰性气体保护容器进行溶剂的转移或加料。

货号	针头外径mm	针头长度mm	四氟管长度mm
C702533-1.6	1.6	一端250mm一端330mm	650
C702533-2	2	一端250mm一端330mm	650
C702533-3	3	一端250mm一端330mm	650



扫码查看，今日实时
优惠价

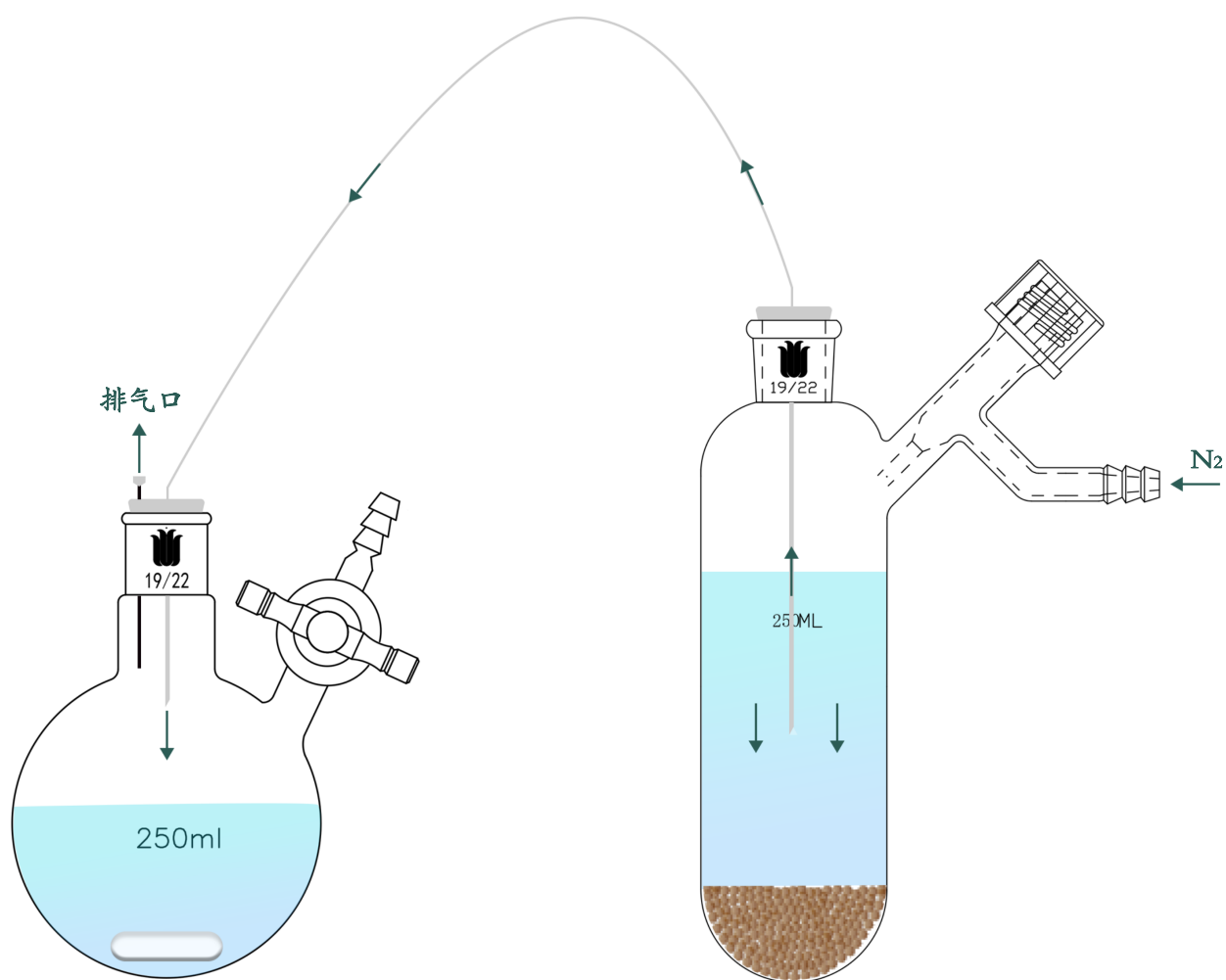

溶剂转移，真空

- 此装置专为无水无氧条件下对溶剂进行纯化和转移。
- 将沸腾的溶剂通过真空的方式输送至处于冷却/低温的溶剂存储瓶中。

常见溶剂（1L）转移时间：


乙醚：1-2小时

THF：2-4小时


甲苯：10小时



货号	容量ml	磨口
N884250	250	24/40
N884500	500	24/40
N88241L	1000	24/40

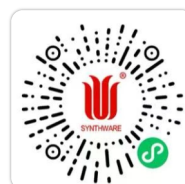扫码查看，今日实时
优惠价

首先，将已经经过干燥/除氧处理的溶剂放入烧瓶B。然后，依次连接转移管和溶剂存储瓶A，转移管上的高真空节门（C）连接至真空源。当要进行溶剂转移时，打开节门D和C，关闭E，对系统抽真空。持续几分钟后，关闭节门C，打开节门E，同时对溶剂进行加热搅拌。溶剂蒸汽在真空条件下通过转移管进入A瓶中，A瓶需进行降温冷却处理，可将A瓶置于液氮/丙酮中。当转移结束时，关闭节门D和E，通过节门C将系统恢复至常压。

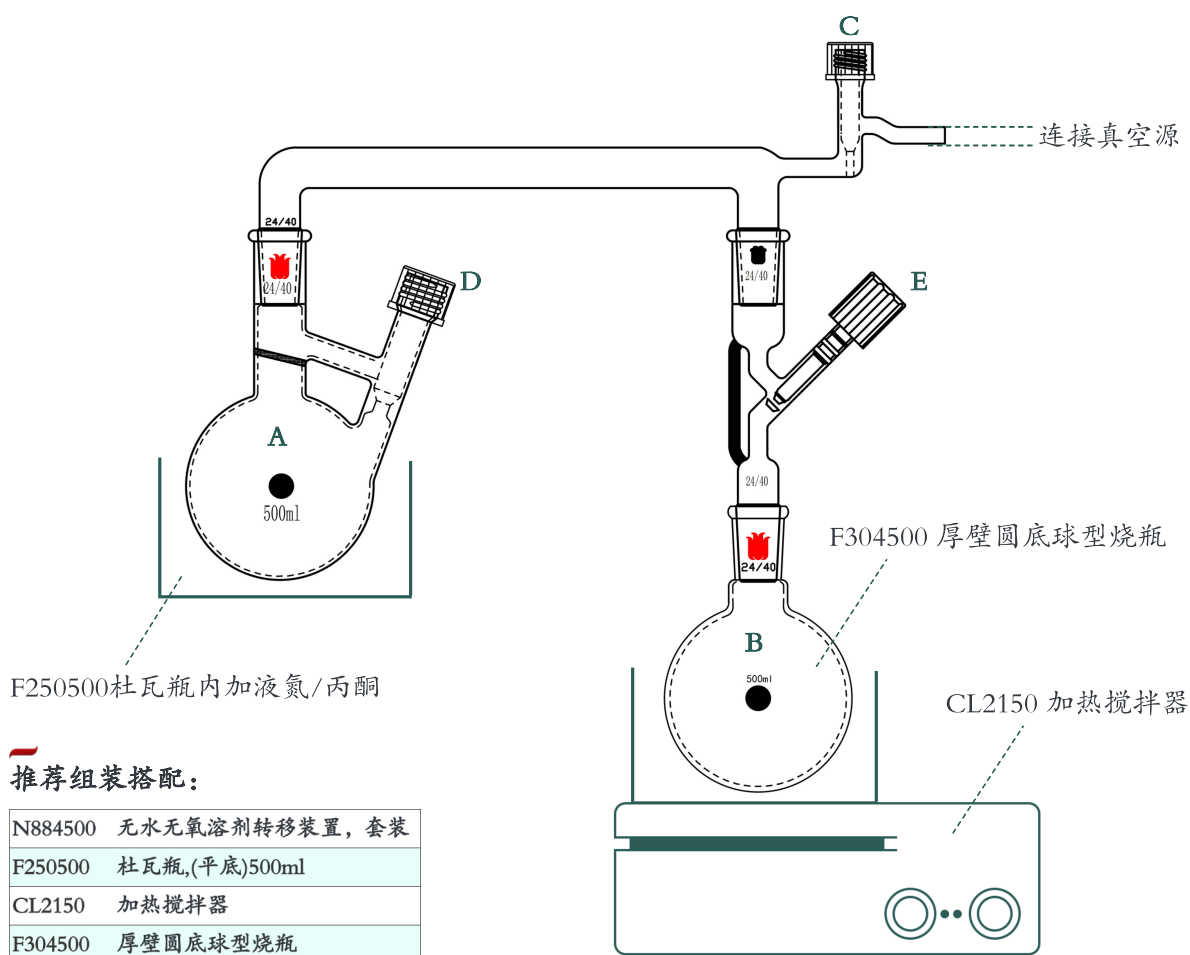


推荐组装搭配：

N884500	无水无氧溶剂转移装置，套装
F250500	杜瓦瓶,(平底)500ml
CL2150	加热搅拌器
F304500	厚壁圆底球型烧瓶

溶剂蒸馏头，溶剂，纯化/干燥，无水无氧

- 蒸馏头容量为 125 mL，可在惰性气体保护下进行溶剂蒸馏纯化操作。
- 冷凝器与蒸馏头一体化设计，可消除因多个组件连接而导致的漏气，漏液等情况，提高装置密封性。
- 蒸汽通过侧管至杜瓦式冷凝器进行冷却，冷凝液回流到储液球中。需单独购买蒸馏烧瓶和接收器使用。

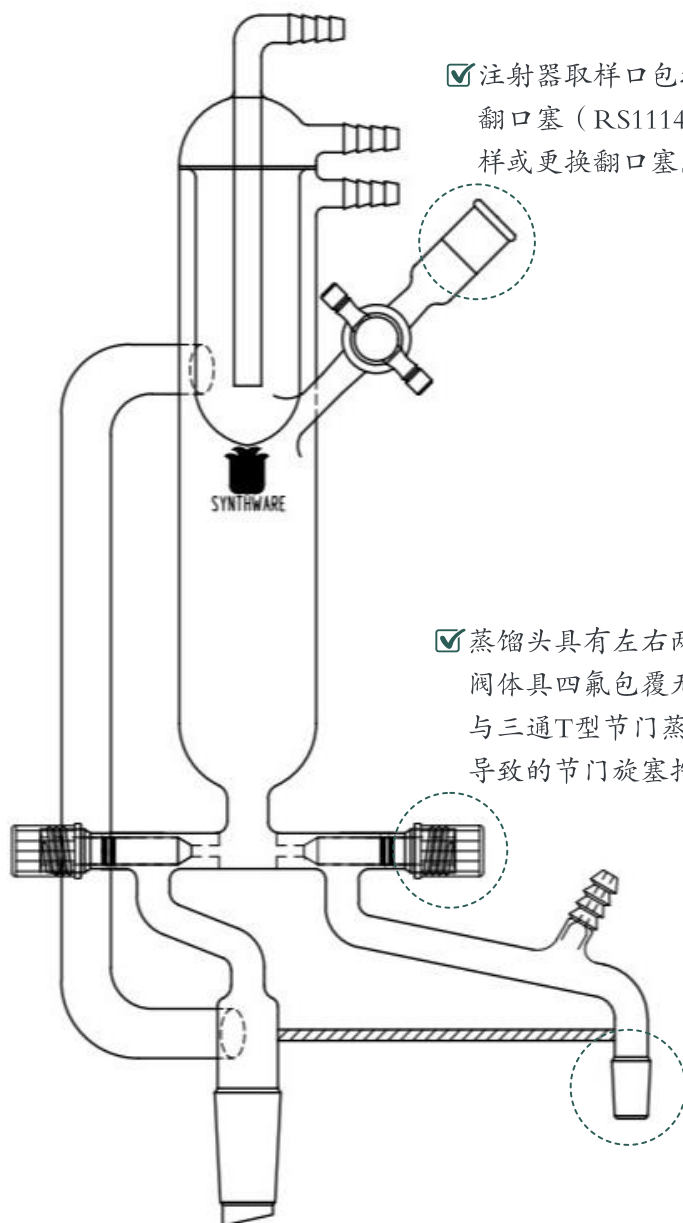

☑ 注射器取样口包括一个四氟旋塞和一个14/20内磨口接头，与橡胶翻口塞（RS111420）搭配使用，可在不破坏蒸馏体系的情况下取样或更换翻口塞。

☑ 蒸馏头具有左右两个高真空节门，用于控制馏分的回流或采出。阀体具四氟包覆无需真空脂密封，可有效避免馏分被污染。与三通T型节门蒸馏头相比，可有效避免装置因长时间加热回流而导致的节门旋塞拧不动或抱死的情况。

☑ 采出口为14/20外磨口，由高精度无心磨制得，加厚设计，不易裂开，保证气密性。

货号	容量 (mL)	磨口
S944125	125	24/40
标配配件:		
S181530	4mm四氟节门	
S660004T	0-4mm精细可调式高真空阀门 (全包)	
 扫码查看，今日实时优惠价		


干燥器，高真空阀，法兰

1. 欣维尔自制高硼硅样品干燥器，可有效防止易潮解，易氧化的化学品变质。
2. 顶部具高真空节门，可连接真空泵，并保持瓶内真空度。
3. 瓶身厚壁高强度设计，使用3.3高硼硅玻璃管，经特殊工艺（数控机床等）制得，非大炉吹制，以达到瓶身厚实且均匀，结实耐用。



- 经实验测试，静态真空可以保持48小时以上。7天瓶内依然保持真空状态。
- 干燥器盖与瓶身由法兰口连接，法兰口具凹槽，可与O型圈，马蹄夹和真空脂搭配使用，可快速连接并保证干燥器密封性。

货号	法兰型号	价格
S860857	57#	
S860880	80#	
标配配件：		
CC0057	马蹄夹，57mm法兰	
CC0080	马蹄夹，80mm法兰	
D331	331# 膨体四氟垫片	
D339	339# 膨体四氟垫片	
S60008T	0-8mm四氟保护的高真空节门(四氟全包)	

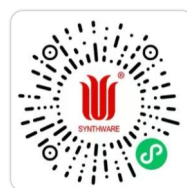

扫码查看，今日实时
优惠价

选配配件：

货号	品名
R331QB	四氟全包“O”型圈，适用于57#法兰
R339QB	四氟全包“O”型圈，适用于80#法兰




防倒吸鼓泡器，大容量

1. 大容量防倒吸设计，在体系负压时，可有效防止油和空气吸入系统。
2. 倒油口漏斗式设计，方便硅油倒入及更换。
3. 可拆卸小咀设计为连接或断开体系提供了一种安全和简便的连接方式。

货号	高度mm
B482815	150
B485017	175
标配配件：	
RC18	尼龙帽,11mm孔,#18
R201801	可拆式小咀,#18,直



扫码查看，今日实时
优惠价

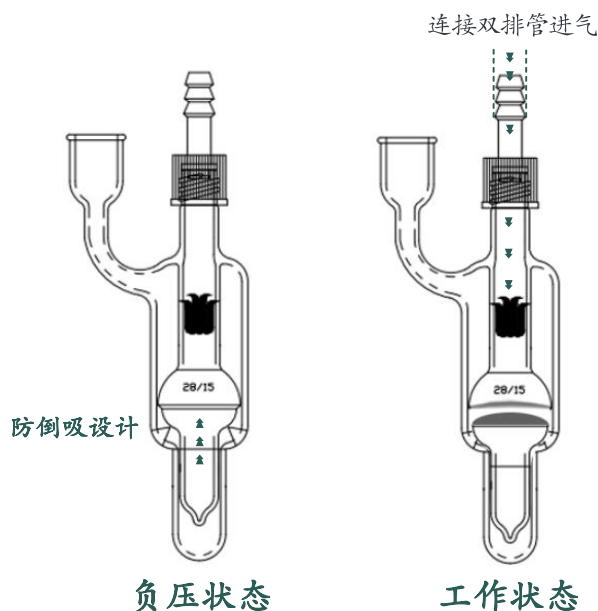

防倒吸鼓泡器，可调式，可拆卸小咀

- 1. 倒油口漏斗式设计，方便硅油倒入及更换。
- 2. 可拆卸小咀设计为连接或断开体系提供了一种安全和简便的连接方式。





货号：B25-KT-14

标配配件：	
R201402	可拆式小咀，直管
RC14	尼龙帽，9.5mm孔，GL14
RB25	B25-KT专用密封圈
THB25	B25-KT专用弹簧
GLB25	B25-KT专用具孔盖



扫码查看，今日实时
优惠价

- 选配配件：
- | | |
|---------|----------|
| R201401 | 可拆式小咀，弯管 |
|---------|----------|

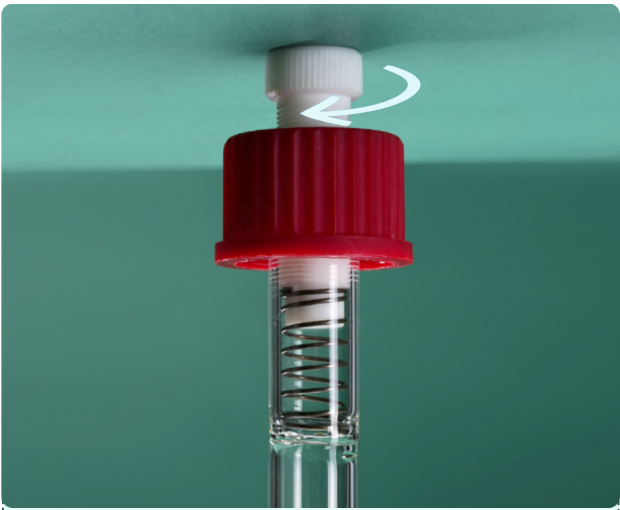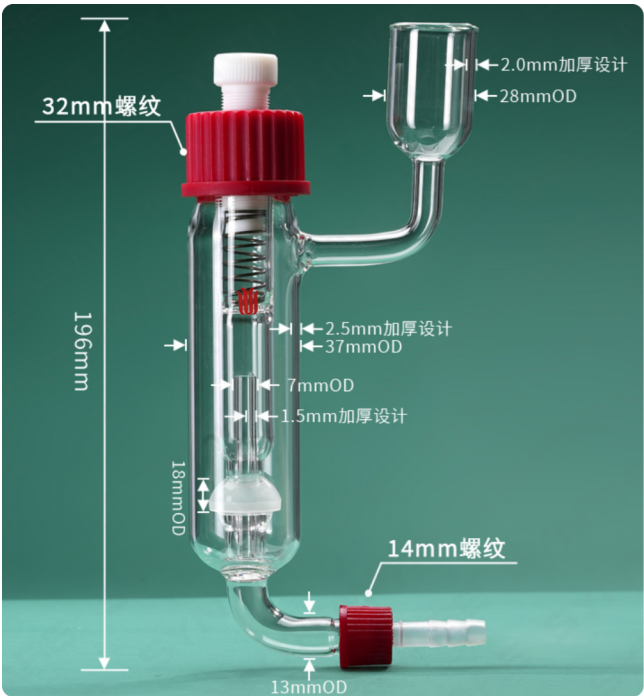

在具备常规鼓泡器可查看气体流量的功能基础上，通过旋转顶部四氟压力杆，调节弹簧压力，控制气体出口阻力和气体流量。

鼓泡器，可调式，无水无氧，SCHLENK

鼓泡器具可调式通气管，标配尼龙盖和Viton O型圈固定通气管插入硅油中的高度。



货号：B460002

标配配件：

RC009	具孔盖,尼龙,13mm
R108	棕色, O型圈,内径*线径 6*2.62mm



扫码查看，今日实时
优惠价

底部具锥度设计
可节省硅油的用量。

选配配件：

货号	描述
R108EP	黑色O型圈,抗极性溶剂型, 内径×宽度,6.0×2.62mm
Q108	全惰性白色O型圈(进口材质), 内径6线径2.62mm

