

双排管，无水无氧，套装（含杜瓦瓶）


货号	描述	组成描述	组成用量
ZH160004	真空线套装	M670004 4组实心塞双排管，横梁两端为35/25球碗	1
		B257040D 防倒吸鼓泡器	1
		V364550 冷阱	1
		F111000 杜瓦瓶	1
		A303525 直型抽气接头,具可拆卸小咀, 35/25带O圈球磨	4
		CC3525 35/25球碗夹	4
		W181001 小三爪夹	3
		W181010 大三爪夹	1
		W200002S 十字夹	4
		N990001 真空表	1
		N900408 1/4内丝转 ϕ 8小咀接头	1
		T250816-2 橡胶管, 内径8mm外径16mm,长度2米	3
		W281319 不锈钢喉箍,扇形把手,直径可调范围: $\approx$ 13-19MM,5个/包	1
		L0007501 真空脂	1
		P362515 生料带	1



扫码查看，今日实时
优惠价



扫码观看 视频讲解

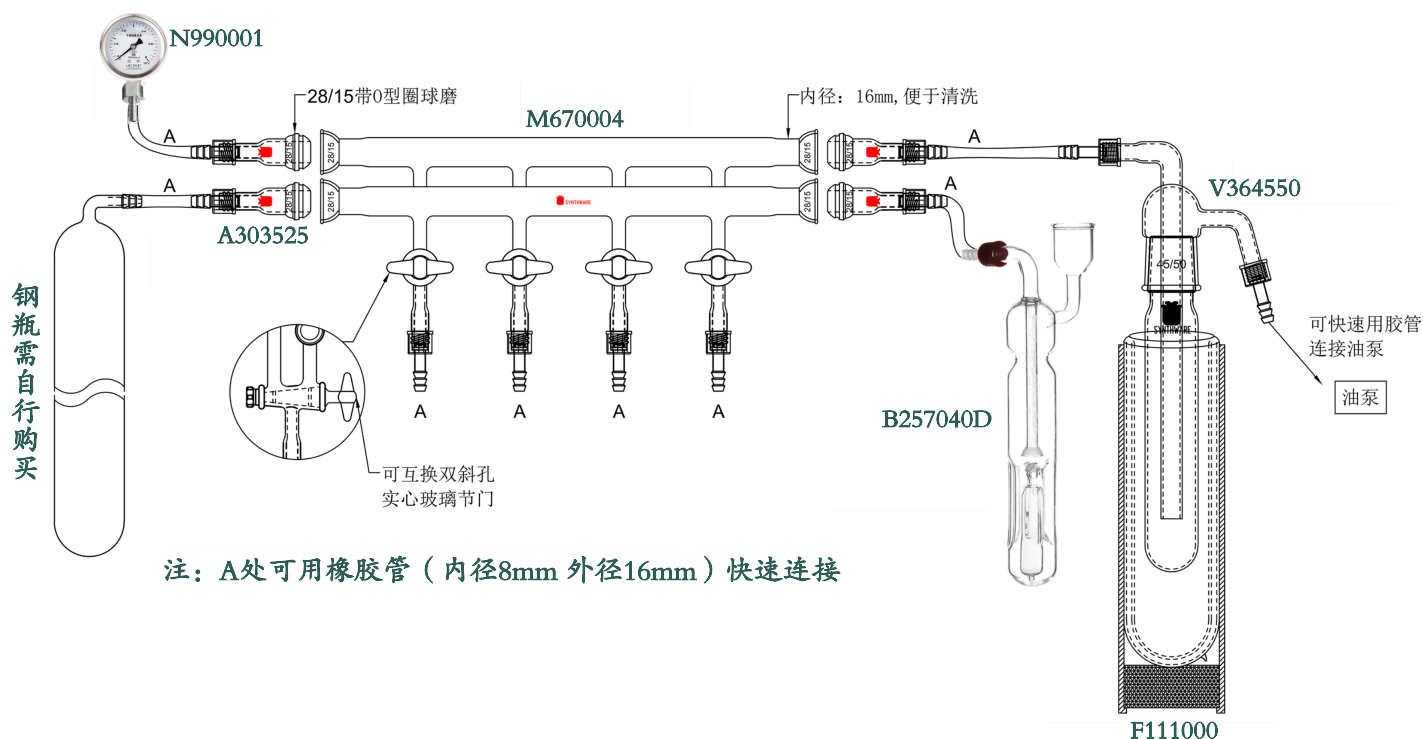

该套装中，真空气体分配管（双排管，M670004）为四接口，每个接口配有4mm孔径双斜孔实心玻璃塞，接口为可拆卸小咀(A)，方便胶管（T250816-2）的安装和拆卸。接口间距离约75mm。双排管两端由35/25球型磨口连接，搭配球碗夹(CC3525)和真空脂（L0007501）保证密封性；

真空管线中的真空表（N990001）和冷阱(V364550)由直型球磨连接接头（A303525）连接。冷阱的直径约50mm，磨口下高度约250mm。进气口和出气口皆为可拆卸小咀设计，方便与双排管和真空源的气路连接。适配欣维尔自制高保温杜瓦瓶（F111000，ZH17系列需单独购买）。特别注意的是，真空表需搭配金属转接头（N900408）经胶管（T250816-2）连接至真空线。胶管连接处可搭配不锈钢喉箍（W281319）使用，保证连接处的密封性；

惰性气体管线一端由直型球磨连接接头（A303525）连接至气源，另一端连接防倒吸鼓泡器（B257040D）。鼓泡器内置防倒吸止回阀，阀体顶部精密研磨，确保负压时密封性(硅油需自行购买)。


双排管，无水无氧，套装（不含杜瓦瓶）

货号	描述	组成描述	组成用量
ZH170004	真空线套装	M670004 4组实心塞双排管，横梁两端为35/25球碗	1
		B257040D 防倒吸鼓泡器	1
		V364550 冷阱	1
		A303525 直型抽气接头,具可拆卸小咀, 35/25带O圈球磨	4
		CC3525 35/25球碗夹	4
		W181001 小三爪夹	3
		W181010 大三爪夹	1
		W200002S 十字夹	4
		N990001 真空表	1
		N900408 1/4内丝转 ϕ 8小咀接头	1
		T250816-2 橡胶管, 内径8mm外径16mm,长度2米	3
		W281319 不锈钢喉箍,扇形把手,直径可调范围: $\approx$ 13-23MM,5个/包	1
		L0007501 真空脂	1
		P362515 生料带	1



扫码查看，今日实时
优惠价

扫码观看 视频讲解

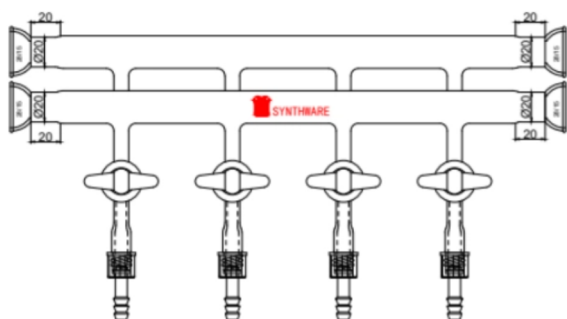


M670004 1个



A303525 4个



T250816-2 4个

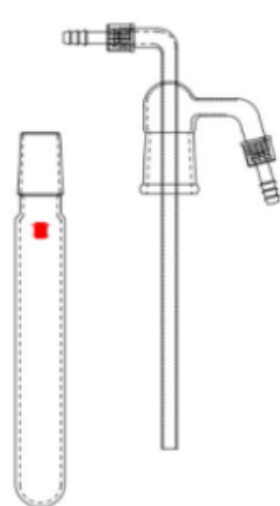

V364550 1个



B257040D 1个



N990001 1个



CC3525 3根



L0007501 1个



W200002S 4个



W181001 3个, W181010 1个



N900408 1个



W281319 5个




P362515 1卷

双排管，玻璃节门，实心/空心，可拆卸小咀

实心/空心双斜孔玻璃节门，精密研磨，孔位正对齐，确保可互换。涂抹真空脂可保证密封性。


转动节门180°即可切换真空线和惰性气体保护线，对反应瓶进行抽真空-充气循环。

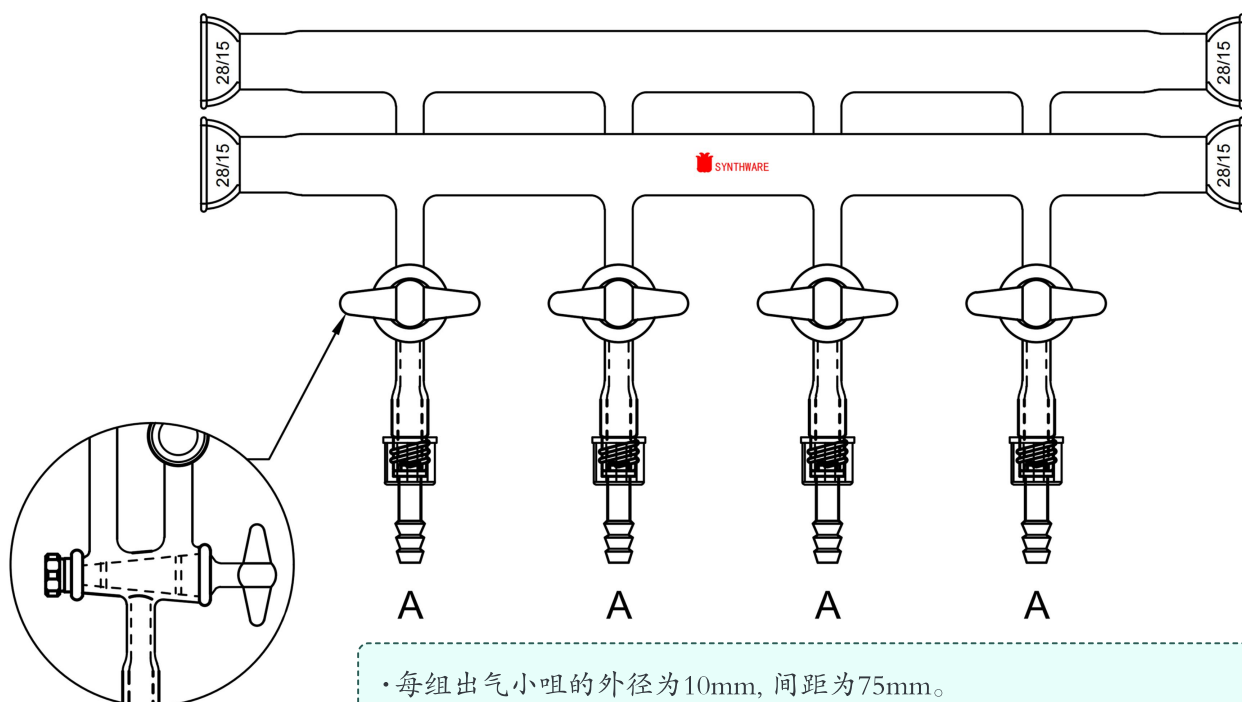

可互换双斜孔玻璃节门


- 每组出气小咀的外径为10mm, 间距为75mm。
- 可拆卸小咀设计, 为连接或断开体系提供了一种安全和简便的连接方式。
- A处可用橡胶管(内径8mm外径16mm)快速连接。

Vacuum (Vac)

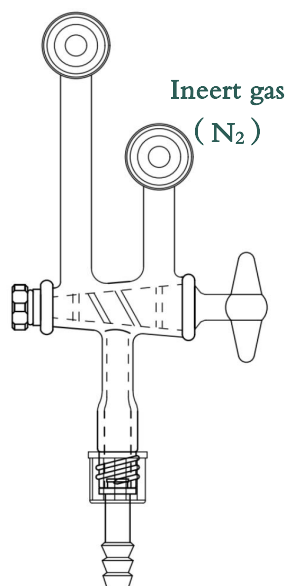

实心双斜孔玻璃节门

Vacuum (Vac)

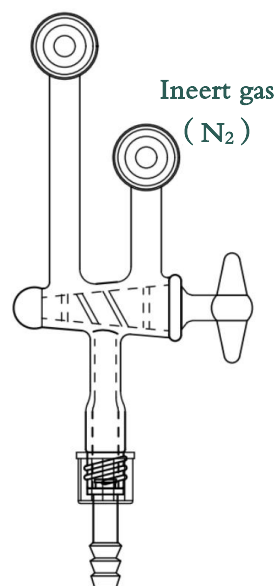


空心双斜孔玻璃节门

空心玻璃节门与实心玻璃节门区别:

空心节门的后部有一个中空球形玻璃腔。当真空抽气时, 球腔内会产生负压, 从而使节门塞紧密吸附到节门上, 以提高密封性。

含实心双斜孔玻璃节门

货号	节门组数	总长度(mm)	价格
M640003	3	300	
M640004	4	375	
M640005	5	450	
M640006	6	525	
标配配件:			
S691656	不锈钢弹簧及卡子		
RC18	尼龙帽11mm孔, GL18		
R201801	可拆式小咀, 直管		
RC14	尼龙帽, 9.5mm孔, GL14		
R201402	可拆式小咀, 直管		

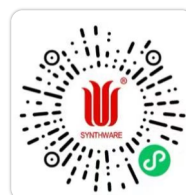

扫码查看, 今日实时
优惠价

含空心双斜孔玻璃节门

货号	节门组数	总长度(mm)	价格
M651003	3	300	
M651004	4	375	
M651005	5	450	
M651006	6	525	
标配配件:			
RC18	尼龙帽11mm孔, GL18		
R201801	可拆式小咀, 直管		
RC14	尼龙帽, 9.5mm孔, GL14		
R201402	可拆式小咀, 直管		



扫码查看, 今日实时
优惠价

双排管，玻璃节门，实心，真空表

- 双排管为实心双斜孔玻璃节门, 标配不锈钢弹簧及卡子, 精密研磨, 孔位正对齐, 确保可互换。涂抹真空脂可保证密封性。转动节门180°即可切换真空线和惰性气体保护线, 对反应瓶进行抽真空-充气循环。
- 后排真空线标配真空表, 便于实时监测系统真空度, 记录关键压力参数。
- 每组出气小咀的外径为10mm, 间距为75mm。



特别注意：

真空泵一定要接到后排真空管线（Vac）上。

货号	节门组数	总长度(mm)	价格
M120003	3	300	
M120004	4	375	
M120005	5	450	
标配配件:			
S691656	不锈钢弹簧及卡子		
B500015Z	具孔15#螺纹口四氟盖，可拆卸四氟密封环，标配真空表		
选配配件:			
N990001	-0.1~0 MPa全不锈钢真空表		
B500015J	具孔15#螺纹塞		
R110015	15#螺纹塞可拆卸密封环		
R224EP	外径*圈粗度：7.2*2.4mm		




扫码查看，今日实时优惠价



扫码查看，今日实时优惠价

Vacuum (Vac)

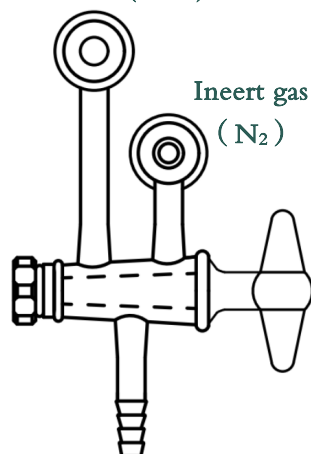

外螺纹盖，#15，真空表，密封环

货号	表量程 MPa	价格
B500015Z	-0.1~0	
标配配件：		
N990001	-0.1~0 MPa全不锈钢真空表	
B500015J	具孔15#螺纹塞	
R110015	15#螺纹塞可拆卸密封环	
R224EP	外径*圈粗度：7.2*2.4mm	




扫码查看，今日实时优惠价



双排管，高真空节门，可拆卸小咀

- 双排管为内螺纹高真空节门，节门顶部精密锥形角度设计，减少磨损，无需真空脂即可与玻璃件紧密密封。
- 每组出气小咀的外径为10mm，间距为75mm。
- 可拆卸小咀设计，为连接或断开体系提供了一种安全和简便的连接方式。

货号	节门组数	高真空节门	价格
M660804	4	0-8mm	 扫码查看，今日实时 优惠价
标配配件：			
R116	#15 法兰“O”型圈		
S540008N	0-8mm 内螺纹高真空阀门		
RC14	尼龙帽，9.5mm孔，GL14		
R201402	可拆式小咀，直管		

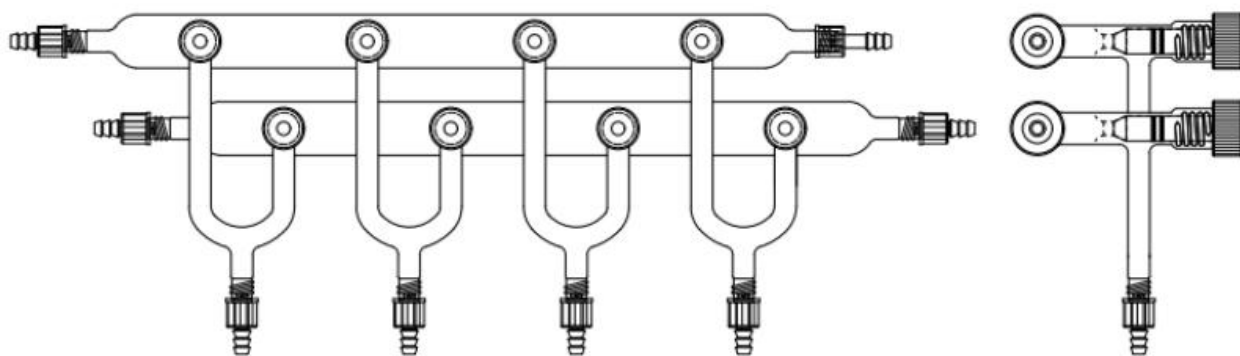

右侧具外径10mm通气小咀，可连接气源或真空源。节门间距为75mm。



左侧具外径10mm通气小咀，可连接气源或真空源。节门间距为75mm。



单排管，玻璃节门，实心，右侧

货号	节门组数	节门孔径(mm)	价格
M190042G	4	2	 扫码查看，今日实时优惠价
M190044G	4	4	
M190052G	5	2	
M190054G	5	4	
M190062G	6	2	
M190064G	6	4	
标配配件：			2mm玻璃节门塞 不锈钢弹簧及卡子 4mm 玻璃节门塞 不锈钢弹簧及卡子
S461230			
S691230			
S461740			

单排管，玻璃节门，实心，左侧

货号	节门组数	节门孔径(mm)	价格
M500042G	4	2	 扫码查看，今日实时优惠价
M500044G	4	4	
M500052G	5	2	
M500054G	5	4	
M500062G	6	2	
M500064G	6	4	
标配配件：			2mm玻璃节门塞 不锈钢弹簧及卡子 4mm 玻璃节门塞 不锈钢弹簧及卡子
S461230			
S691230			
S461740			

单排管为实心玻璃节门，节门标准1:10锥度精密研磨，孔位正对齐，确保可互换。涂抹真空脂可保证密封性。

单排管，玻璃节门，实心，双侧

单排管为实心玻璃节门，节门标准1:10锥度精密研磨，孔位正对齐，确保可互换。涂抹真空脂可保证密封性。

货号	节门组数	节门孔径(mm)	价格
M490042G	4	2	 扫码查看，今日实时 优惠价
M490044G	4	4	
M490052G	5	2	
M490054G	5	4	
M490062G	6	2	
M490064G	6	4	
标配配件：			
S461230	2mm玻璃节门塞		
S691230	不锈钢弹簧及卡子		
S461740	4mm 玻璃节门塞		
S691740	不锈钢弹簧及卡子		



双侧具外径10mm通气小咀，
可连接气源或真空源。节门间距为75mm。

真空类

- 具磨口分体式设计，上端内磨口由金刚砂研磨，锥度1:10经正弦规测试。
- 可拆卸小咀设计，为连接或断开真空线提供了一种安全和简便的连接方式。
- 可搭配T25系列硅胶管与双排管和真空泵连接。

推荐组装产品：



Z15, Z14系列真空油泵



2XZ-2



真空脂



硅胶管



A



B

A、冷阱，分体式，标准磨口，可拆卸小咀

外磨口由无心磨精密研磨，保证连接的密封性。此设计在溶剂倒出时可避免磨口处溶剂残留，便于清洗。

货号	磨口	外径 (mm)	磨口下部长度 (mm)	内管外径 (mm)	内端距底部间距 (mm)	价格
V362440	24/40	30	200	10	50	
V362942	29/42	32	200	10	40	
V363445	34/45	40	225	13	45	
V364050	40/50	45	250	16	45	
V364550	45/50	50	250	20	50	
V365050	50/50	55	275	26	50	
V365550	55/50	60	300	30	60	
标配配件:						
RC14	尼龙帽, 9.5mm孔, GL14					
R201402	可拆式小咀, 直管					
RC18	尼龙帽11 mm孔, GL18					
R201801	可拆式小咀, 直管					



扫码查看，今日实时
优惠价

B、冷阱，分体式，标准磨口，“T”型，可拆卸小咀

外管采用内磨口设计，磨口由金刚砂精密研磨，保证连接的密封性。

货号	磨口	外径 (mm)	磨口下部长度 (mm)	内管外径 (mm)	内端距底部间距 (mm)	价格
V153024	24/40	30	200	10	50	
V153229	29/42	32	200	10	40	
V154034	34/45	40	225	13	45	
V154550	40/50	45	250	16	45	
V155045	45/50	50	250	20	50	
V155550	50/50	55	275	26	50	
V156050	55/50	60	300	30	60	
标配配件:						
RC14	尼龙帽, 9.5mm孔, GL14					
R201402	可拆式小咀, 8mm外径, 直管					
RC18	尼龙帽11mm孔, GL18					
R201801	可拆式小咀, 直管 (进口)					



扫码查看，今日实时
优惠价

选配配件：

R116QB	#15 法兰, 四氟全包 “O” 型圈
R331QB	四氟全包 “O” 型圈, 适用于57#法兰



双冷阱，SCHLENK


货号	描述	价格
V245712	双冷阱装置, 全套	
标配配件：		
S540012	0-12mm高真空阀	
CC0057	57mm 马蹄夹	
CC2815	#15法兰盘夹	
R116	#15 法兰 “O” 型圈	
R331	#331 “O” 型圈	




扫码查看，今日实时
优惠价

使用说明

初级冷阱C将连接接头B和主冷阱E连接到一起，连接口为28/15法兰口。主冷阱E由#57法兰配O型圈及法兰夹连接密封。两冷阱中心间距约为185毫米。A端#15法兰口可直接连接至双排管。I端#15法兰口通过连接接头至真空泵。具#15法兰口G可用通气接头与真空测量装置相连接。

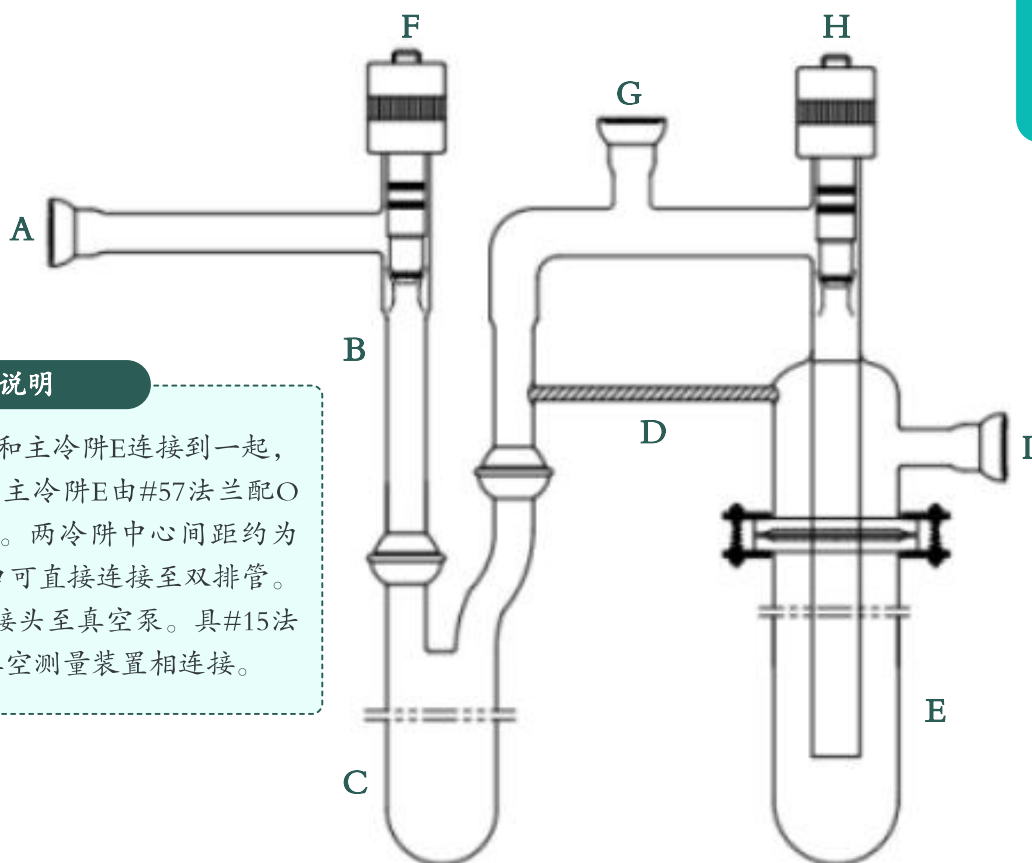

可与M33,M31双排管配套使用

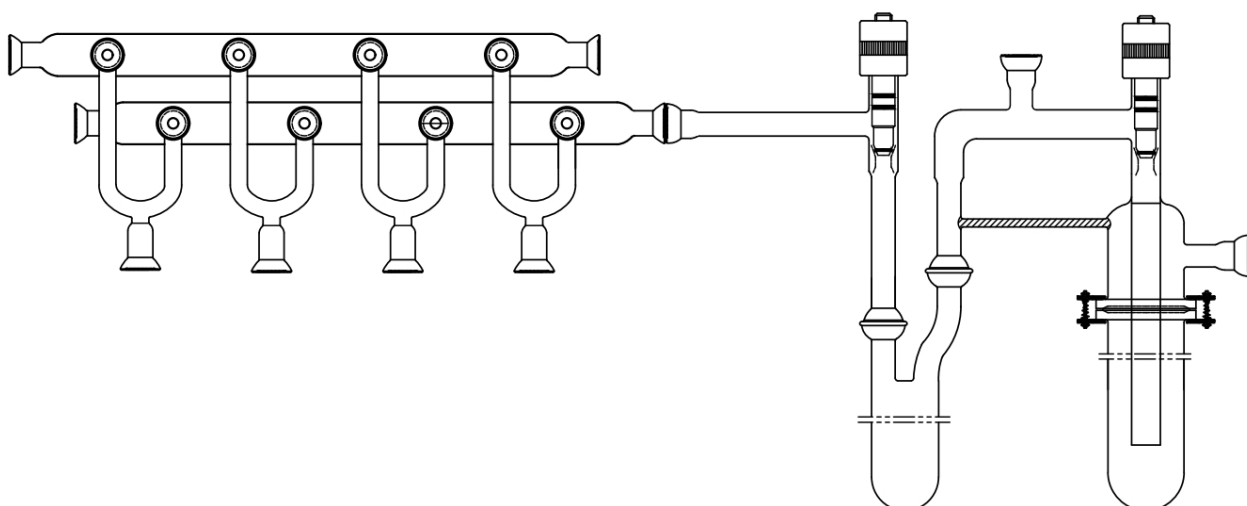

真空表，不锈钢，1/4''，-0.1-0 MPa

全不锈钢真空表，表盘60mm，量程：-0.1-0 MPa，螺纹规格：1/4。




货号	价格
N990001	 扫码查看，今日实时优惠价

接头，连接，不锈钢，G1/4-宝塔咀

上端内螺纹可与N99系列真空表，压力表，真空/压力表连接，下端宝塔小咀可与软管连接。

货号	描述
N900410	G1/4内螺纹-φ10四节小咀
N900408	G1/4内螺纹-φ8四节小咀

 扫码查看，今日实时优惠价

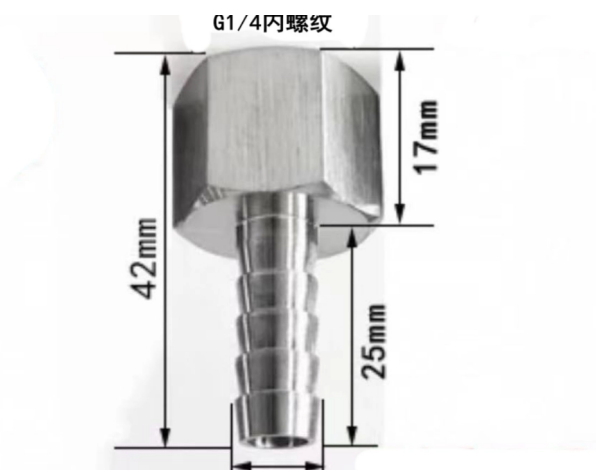

真空计，数显，飞越牌，VMV-1

电子化数显，大屏带背光，可读性更好，更清晰。精准测量，可实时监控真空系统。



货号	描述
K170075	0-75mmHg，含1/4转接头

 扫码查看，今日实时优惠价

ZDR-I/1-Pro,皮拉尼单路电阻,数显。真空计无串口通讯功能及继电器控制功能，无需设置相关参数，开机即可进行真空测量。

真空计，15.5真空规管

含15.5直插规管电阻规

货号	描述
Z130001	含15.5直插规管电阻规
标配配件:	
Z170001	15.5直插规管，电阻规
 扫码查看，今日实时 优惠价	

真空计，KF16真空规管

含KF16规管电阻规

货号	描述
Z130002	含KF16规管电阻规
标配配件:	
Z170002	KF10/16法兰盘规管，电阻规
 扫码查看，今日实时 优惠价	



真空计，KF16真空规管可选配:

Z180016	KF16-φ10宝塔法兰接头
Z190016	KF16不锈钢卡箍+支架氟胶圈





产品概述

LH系列隔膜真空泵是我公司自主研发生产的新型隔膜真空泵。可以在无油状态下连续运转，噪音小，工作效率高，使用寿命长。我公司产品型号丰富，有不同的应用范围，有作溶剂过滤装置的抽滤泵，有正负压两用型的泵，兼具真空泵和压缩机两种功能，大大方便用户的使用范围。

产品特点

- ◆用于压缩和转换气体
- ◆真空稳定，压力可调
- ◆体积小，重量轻
- ◆使用方便，无油，干净无污染
- ◆可持久稳定地工作，可连续24小时运作
- ◆维修和保养简单，可自行操作

应用场合

- ◆真空蒸馏
- ◆反应釜
- ◆真空抽滤
- ◆真空浓缩
- ◆真空干燥

真空泵，无油，隔膜

货号	规格
Z160085	无油隔膜真空泵，LH-85
Z160085L	无油隔膜真空泵，LH-85L
Z160095D	隔膜真空泵，LH-95D
Z160085DL	隔膜真空泵，LH-985DL



扫码查看，今日实时
优惠价

技术参数

参数	型号 LH-85	LH-85L	LH-95D	LH-85DL
抽速(L/min)	30	30	30	60
极限压力(MPa)	>0.085(150mbar)	>0.085(150mbar)	>0.095(50mbar)	>0.085(150mbar)
进气口径(mm)	9	9	9	9
正压力(Psi)	/	40	/	40
级数	1	1	2	2
电机功率(W)	180	180	180	180
膜片材质	进口耐腐橡胶	进口耐腐橡胶	进口耐腐橡胶	进口耐腐橡胶
噪音(dBA)	<50	<50	<50	<50
功能	负压	正负压两用型	负压	正负压两用型
外形尺寸(mm)	250×135×210	250×135×210	315×135×210	315×135×210
重量(KG)	7.5	8	10	10

真空泵，无油，隔膜

货号	规格
Z170020	抗化学耐腐蚀真空泵，YKA20-2-II
Z170040	抗化学耐腐蚀真空泵，YKA40-2-II
Z170060	抗化学耐腐蚀真空泵，YKA60-2-II
Z170120	抗化学耐腐蚀真空泵，YKA120-2-II



扫码查看，今日实时
优惠价



主要应用

- ◆ 旋转蒸发
- ◆ 真空烘箱
- ◆ 真空干燥
- ◆ 凝胶干燥
- ◆ 离心浓缩仪
- ◆ 可替代水循环泵

技术特点

- ◆ PTFE的泵头材料和PTFE涂层的膜片，适用于强腐蚀性的气体和蒸汽。
- ◆ 配有真空表，实现对真空压力的调节。
- ◆ 卸压功能、自带清洗功能。
- ◆ 良好的气密性。
- ◆ 绿色环保。

技术参数

参数	型号 YKA20-2-II	YKA40-2-II	YKA60-2-II	YKA120-2-II
抽速(L/min)	20	40	60	120
极限真空度(mbar)	3~8(空载)	3~8(空载)	3~8(空载)	3~8(空载)
电源电压(V/50Hz)	220	220	220	220
输入功率(W)	120	240	400	800
泵头类型	双级泵	双级泵	双级泵	双级泵
接口尺寸(mm)	10	10	10	10
噪音(dBA)	<58	<58	<58	<58
额定转速(r/min)	1450	1450	1450	1450
外形尺寸mm	165 × 315 × 210	170 × 320 × 210	210 × 350 × 210	370 × 470 × 880
重量(KG)	9.6	11	22	60



产品概述

DVP系列泵是为高转速直联旋片式真空泵，以零件少、高可靠性、静音和极高极限真空度的稳定性为设计定位，通过采用世界先进的整体式泵体结构，强制油泵润滑控制系统，全方位的排气系统，配制特殊气镇阀作用来达到真空泵在不同的使用条件下保持良好的可靠性能。

用途

- ◆ 冰箱流水线、空调、饮水机自动控制线、照明
- ◆ 真空干燥箱、冷冻干燥机、双排管、管式炉、手套箱
- ◆ 旋转蒸发仪、离心浓缩仪、清洗机
- ◆ 各种高真空的前级泵
- ◆ 抽滤、镀膜、溅射设备


应用场合

- ◆ 极高的极限真空度
- ◆ 具有独特的排气装置
- ◆ 设计特殊的气镇阀，加速抽除蒸汽而不致污染油质
- ◆ 完善的内置进气口止回阀系统，在停止工作时保护真空系统和免受油的污染
- ◆ 恒定的压力油循环供油系统保护
- ◆ 零部件数量少，便于维修和保养
- ◆ 极低的噪音。

应用领域

化工、制药、冷冻、干燥、包装、吸附、镀膜、光伏配套、半导体、电子、食品卫生、印刷、陶瓷配套、科研、大专院校实验室、化验室等领域。

外型安装尺寸

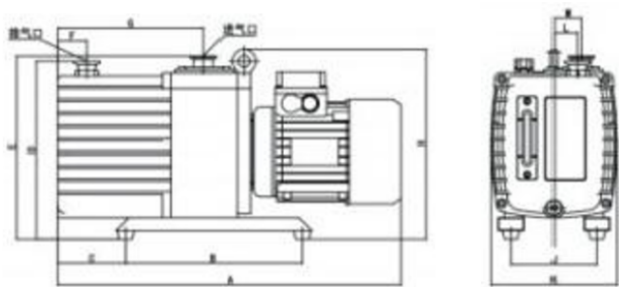

真空泵，直联旋片，高速

货号	规格
Z150012	高速直联旋片真空泵，DVPK2




扫码查看，今日实时优惠价

技术参数


型号 DVP-12		
参数	50HZ	60HZ
抽气速率m³/h	12	14.4
电源(V)	220/380	
电机功率(KW)	0.55	
进气口接口	KF-25	
出气口接口	KF-25	
噪音(dBA)	58	
容油量(L)	0.9	
泵油温升(°C)	≠45	
外形尺寸(mm)	456×164×252	
毛重/净重(KG)	27/25	

抽气速率曲线

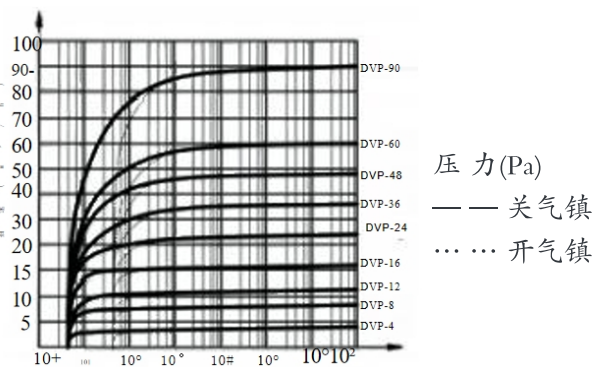

产品概述

该系列泵是用来对密封容器抽除气体的基本设备。它可单独使用，也可用于增压泵、扩散泵、分子泵的前级泵、维持泵、钛泵的预抽泵用，可用于真空干燥、冷冻干燥、真空脱气、真空包装、真空吸附、真空成形、镀膜、食品包装、印刷、溅射、真空铸造、仪器、仪表配套、冰箱、空调流水线和实验室等真空作业以及配套使用。

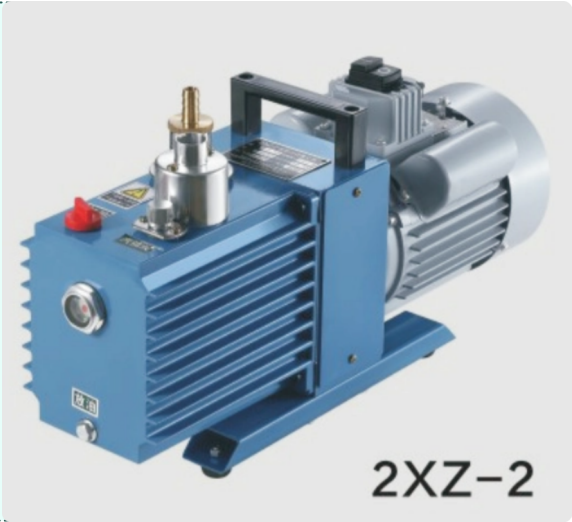

真空泵，直联旋片式

产品用途

- ◆ 冻干机、旋转蒸发仪、真空干燥机
- ◆ 抽滤、镀膜、溅射设备
- ◆ 离心浓缩仪、手套箱、管式炉、双排管
- ◆ 各种高真空的前级泵

产品特点


- ◆ 于彻底的低噪音设计和精密的加工，从而达到了低噪音化
- ◆ 配制特殊设计气镇阀，防止泵油混水，延长泵油的使用时间
- ◆ 采用国际同类产品设计、体积小、重量轻、噪音低、启动方便
- ◆ 设有自动双重的防返油保险装置，不返油
- ◆ 可配小口径转换接头、KF接口、法兰接口

货号	规格
Z140002	直联旋片式真空泵，2XZ-2



扫码查看，今日实时优惠价

抽气速率曲线

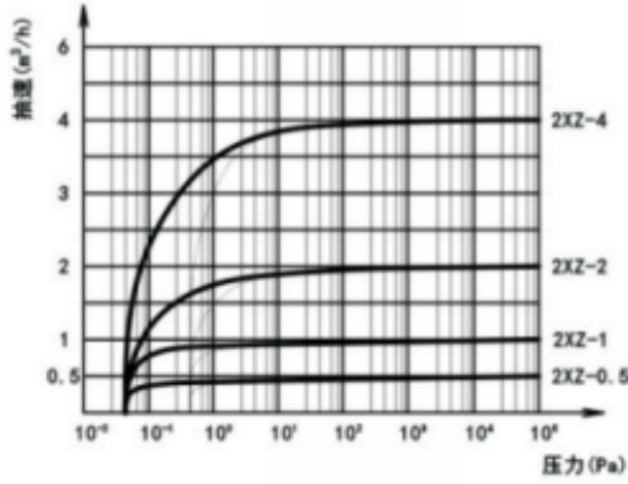

技术参数

参数		型号 2XZ-2
抽速L/S(m³/h)		2(7.2)
极限压力(pa)	分压力	≤6×10²
	全压力	≤1.33
转速(r/min)	50Hz	1400
	60Hz	1700
工作电压(V)		220/380
电机功率(KW)		0.37
进气口口径(外径)(mm)		G3/4(Φ12)
		KF-25
噪音(dBA)		63
容油量(L)		1.0
外形尺寸(mm)		488×145×275
毛重/净重(KG)		22/20

真空管，橡胶

可用于双排管与真空泵间的连接。



货号	内径*外径	壁厚 (mm)	长度 (m)
T250816-2	8*16mm	4	2
T251018-2	10*18mm	4	2



扫码查看，今日实时
优惠价