


冷凝器，直型，通气小咀

冷凝器上下两端为标准锥度磨口，上端内磨口由金刚砂研磨，锥度1:10经正弦规测试。下端外磨口由无心磨精密研磨，保证连接密封，不漏气。

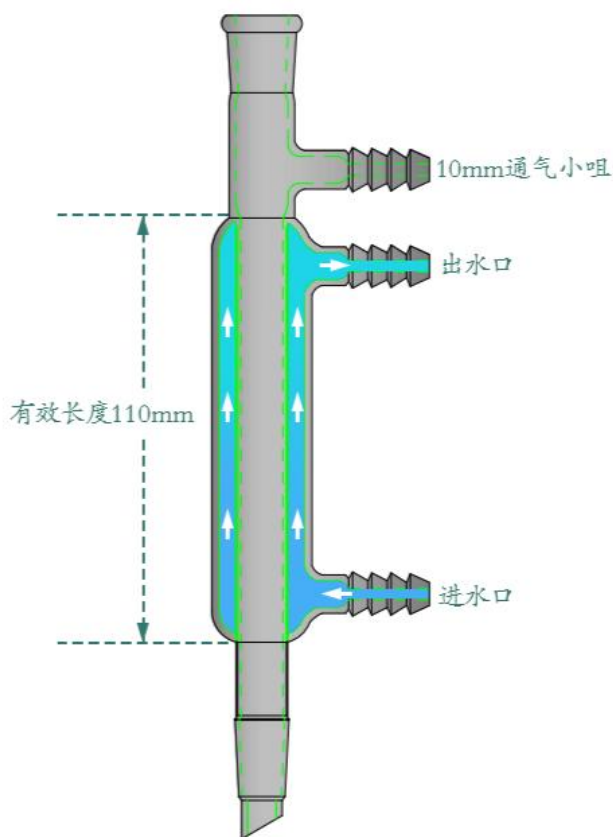

货号	磨口	冷凝长度
N201100	14/20	110mm


扫码查看，今日实时优惠价

推荐搭配产品：




T13系列四氟薄套

顶端具加厚环设计,可多次反复使用。聚四氟乙烯材质，耐溶剂腐蚀。适用于常规反应，溶剂回流等，保证密封效果且无需真空脂密封，同时有效防止磨口抱死打不开,但不可用于对真空度要求高的实验,如:减压蒸馏。

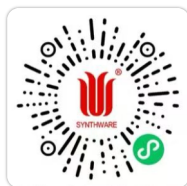

扫码查看，今日实时优惠价

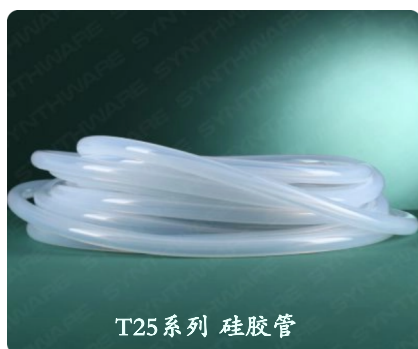

1. 全包式夹套设计，磨口处也可充满冷却液，可有效防止长时间加热回流导致磨口互相锁死。
2. 冷凝器上下两端为标准锥度磨口，上端内磨口由金刚砂研磨，锥度1:10经正弦规测试。下端外磨口由无心磨精密研磨，保证连接密封，不漏气。


[扫码观看](#) [视频讲解](#)

冷凝器，直型，全包式夹套

货号	夹层长度 (mm)	磨口
C204200Q	200	24/40
C204250Q	250	24/40
C204300Q	300	24/40
C204400Q	400	24/40
C204500Q	500	24/40





扫码查看，今日实时
优惠价

冷凝器，球型，全包式夹套

货号	夹层长度 (mm)	磨口
C254200Q	200	24/40
C254250Q	250	24/40
C254300Q	300	24/40
C254400Q	400	24/40
C254500Q	500	24/40



扫码查看，今日实时
优惠价

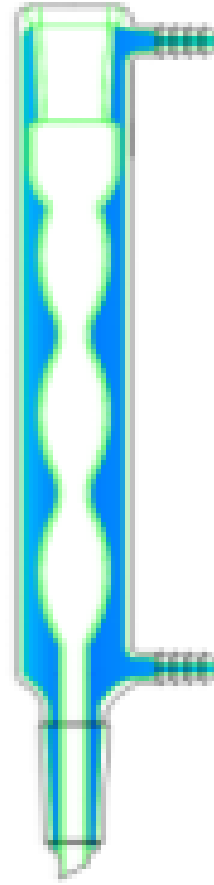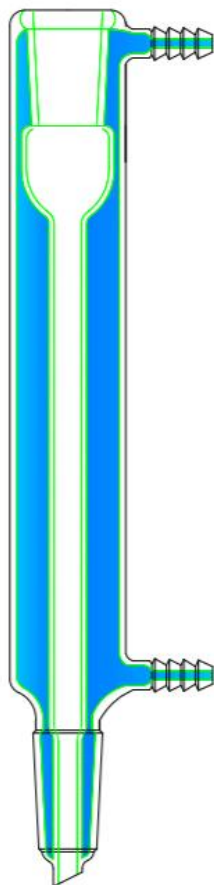


冷凝器，蛇型，索氏提取


货号	冷凝部分长度 (mm)	磨口
C243445S	200	34/45
C244500S	200	45/50
C245550S	200	55/50




扫码查看，今日实时
优惠价

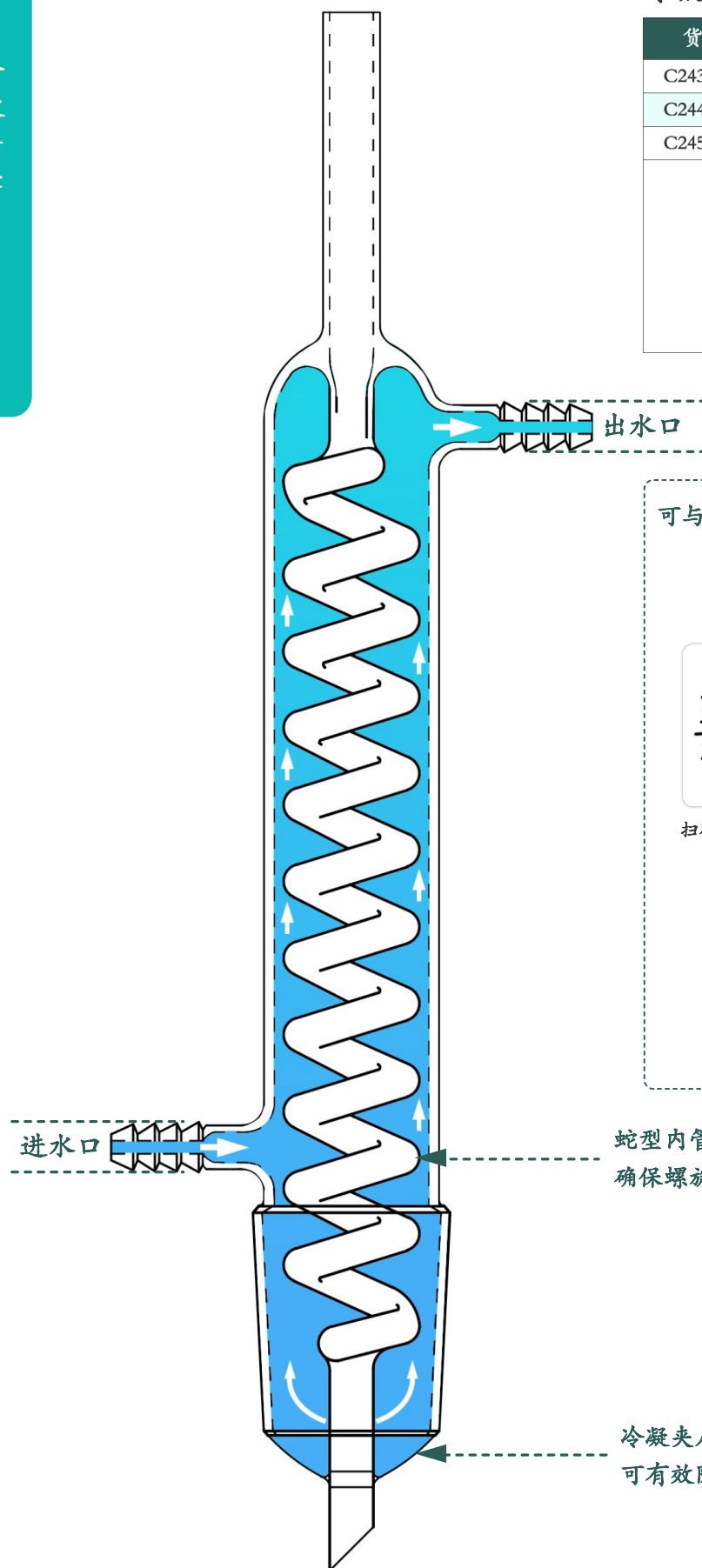

可与索氏脂肪提取器配套使用

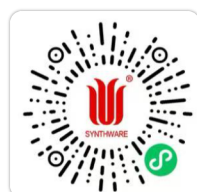

扫码查看，今日实时
优惠价

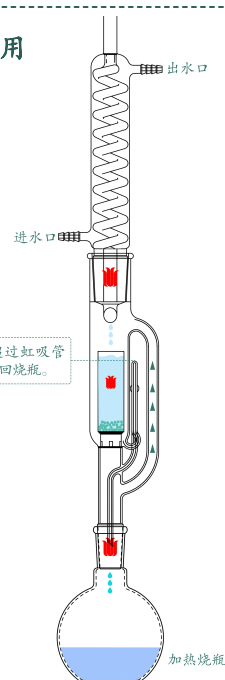


蛇型内管由特殊工装制得，
确保螺旋间距一致，冷却均匀。

冷凝夹层延伸至磨口底部，
可有效防止长时间加热回流导致磨口互相锁死。

冷凝器，蛇型，双层，高效

货号	冷凝部分长度(mm)	磨口	小咀外径 (mm)	价格
C399250	250	19/22	10	 扫码查看，今日实时 优惠价
C394250	250	24/40	10	
C394300	300	24/40	10	
C394400	400	24/40	10	
C394500	500	24/40	10	
C395250	250	29/42	10	
C395300	300	29/42	10	
C395400	400	29/42	10	

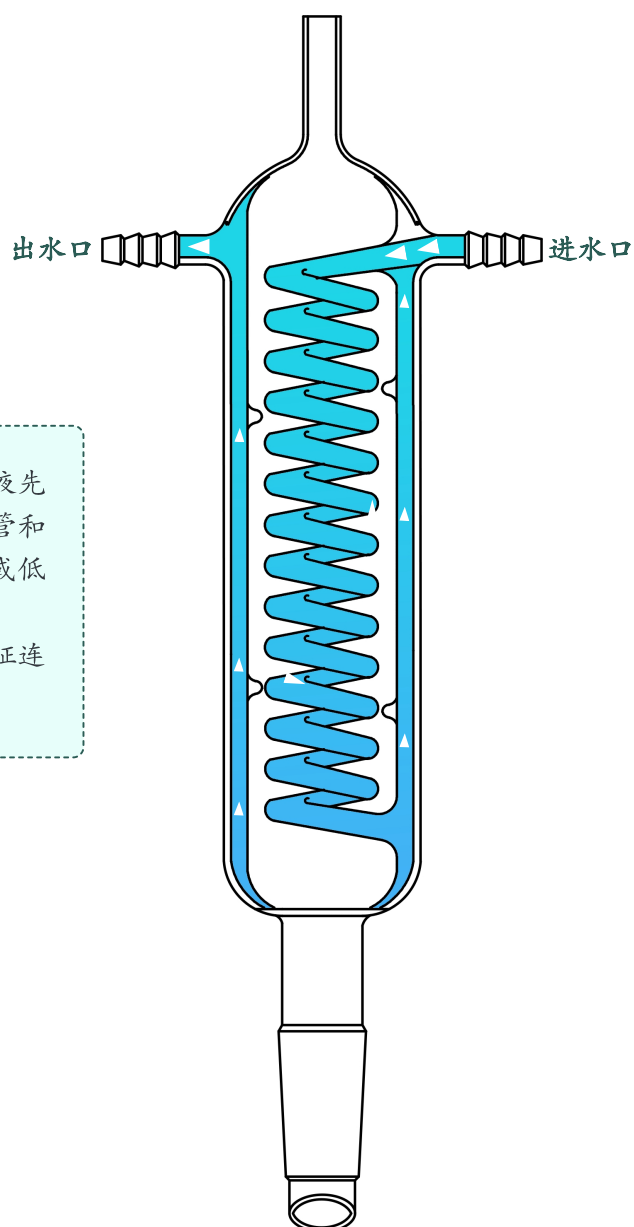

1. 高效冷凝器具有夹套和盘管结构，外循环冷却液先通过螺旋盘管后流入夹套进行冷却。蒸汽在盘管和夹套之间的内壁上充分冷却。特别适用于大量或低沸点溶剂的回流冷凝操作。
2. 下端为标准锥度磨口，由无心磨精密研磨，保证连接密封性。

冷凝器，蛇型，回流，高效，双层，可拆卸小咀




货号	冷凝部分长度(mm)	磨口	小咀外径 (mm)	价格
C599250	250	19/22	10	
C594250	250	24/40	10	
C594300	300	24/40	10	
C594400	400	24/40	10	
C594500	500	24/40	10	
C595250	250	29/42	10	
C595300	300	29/42	10	
C595400	400	29/42	10	
标配配件:				
RC14	尼龙帽, 9.5mm孔, GL14			
R201401	可拆式小咀, 8mm外径, 弯管			



扫码查看，今日实时
优惠价



可拆卸小咀设计为连接或断开外循环提供了一种安全和简便的连接方式。

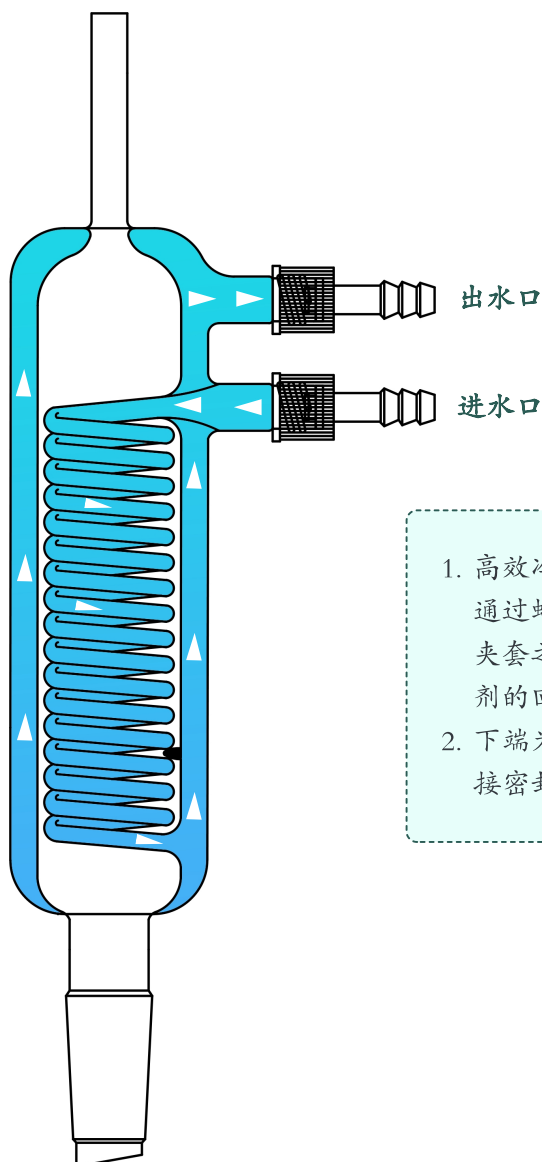


1. 高效冷凝器具有夹套和盘管结构，外循环冷却液先通过螺旋盘管后流入夹套进行冷却。蒸汽在盘管和夹套之间的内壁上充分冷却。特别适用于低沸点溶剂的回流冷凝操作。
2. 下端为标准锥度磨口，由无心磨精密研磨，保证连接密封性。


冷凝器，可拆卸小咀，Friedrichs

1. Friedrichs高效回流冷凝器增大冷却液循环体积及冷却表面积，使蒸汽和冷媒接触更充分，冷凝效率显著高于直型冷凝器。
2. 适用于高沸点溶剂蒸馏或大量蒸汽回流。上端磨口可与压力释放阀连接使用。
3. 冷凝器上下两端为标准锥度磨口，上端内磨口由金刚砂研磨，锥度1:10经正弦规测试。下端外磨口由无心磨精密研磨，保证连接密封，不漏气


货号	上磨口	下磨口	小咀外径	价格
C272440X	24/40	24/40	8mm	 扫码查看，今日实时优惠价
C272942X	24/40	29/42	8mm	
C273445X	24/40	34/45	8mm	
C274050X	24/40	40/50	8mm	
C274550X	24/40	45/50	8mm	
配件：				
RC14	#14 尼龙帽			
R201402	可拆式小咀（直管），8mm外径			

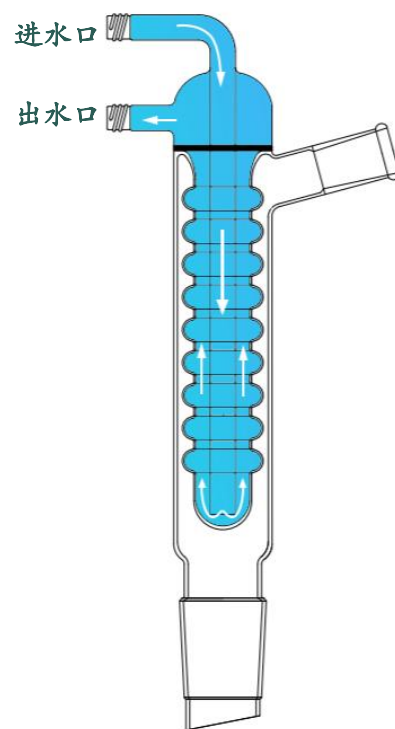


推荐搭配产品：减压蒸馏装置

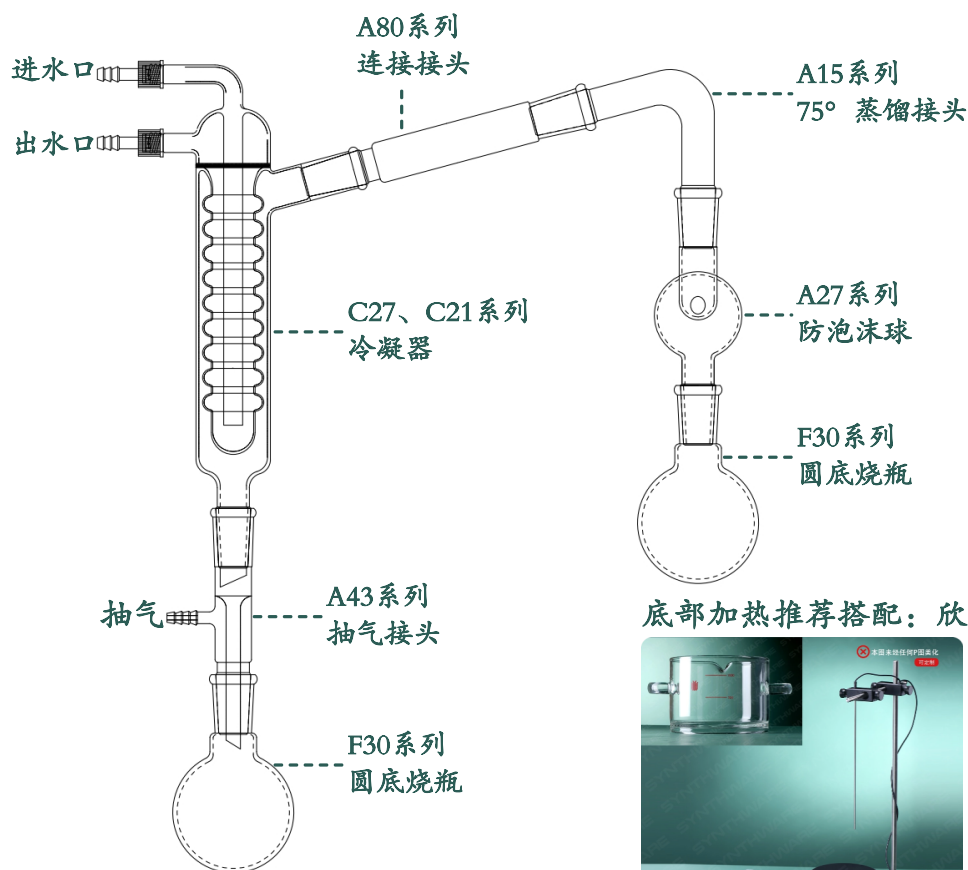

底部加热推荐搭配：欣维尔CL2150

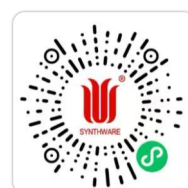

扫码查看，今日实时优惠价

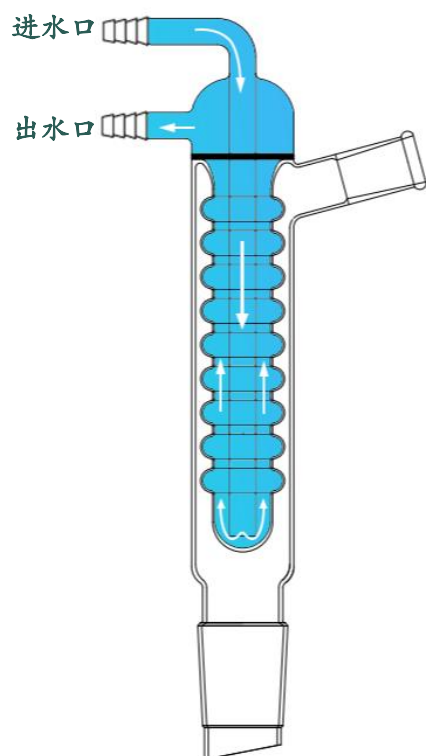

冷凝器，磨口，Friedrichs


1. Friedrichs高效回流冷凝器增大冷却液循环体积及冷却表面积,使蒸汽和冷媒接触更充分,冷凝效率显著高于直型冷凝器。适用于高沸点溶剂蒸馏或大量蒸汽回流。上端磨口可与压力释放阀连接使用。
2. 冷凝器上下两端为标准锥度磨口,上端内磨口由金刚砂研磨,锥度1:10经正弦规测试。下端外磨口由无心磨精密研磨,保证连接密封,不漏气。

货号	上磨口	下磨口	小咀外径	价格
C212440X	24/40	24/40	10mm	 扫码查看, 今日实时优惠价
C212942X	29/42	29/42	10mm	
C213445X	24/40	34/45	10mm	
C214050X	24/40	40/50	10mm	
C214550X	24/40	45/50	10mm	

冷凝器，宝塔咀，Friedrichs

1. Friedrichs高效回流冷凝器增大冷却液循环体积及冷却表面积,使蒸汽和冷媒接触更充分,冷凝效率显著高于直型冷凝器。适用于高沸点溶剂蒸馏或大量蒸汽回流。上端磨口可与压力释放阀连接使用。
2. 冷凝器下端为标准锥度外磨口,由无心磨精密研磨,保证连接密封,不漏气。


货号	上磨口	下磨口	小咀外径	价格
C232440X	24/40	330	10mm	 扫码查看, 今日实时优惠价
C232942X	29/42	332	10mm	
C233445X	34/45	335	10mm	
C234050X	40/50	340	10mm	
C234550X	45/50	340	10mm	

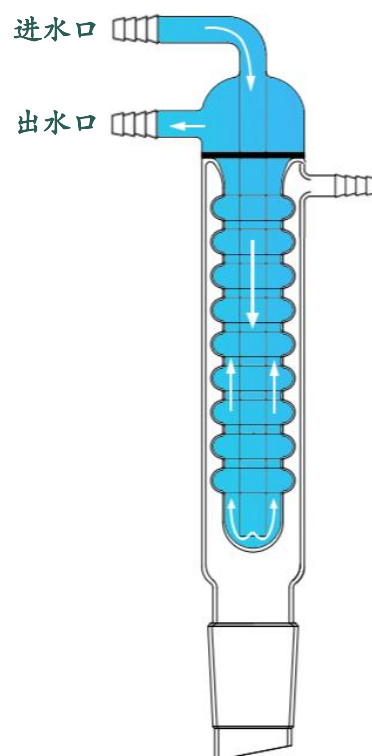

冷指，可拆卸小咀

1. 底部具实心水滴头设计，可使冷却液均匀滴至反应瓶中。适用于小规模蒸馏，回流等实验。
2. 外磨口由高精度无心磨精细打磨，保证密封，不漏气。
3. 可拆卸小咀设计为连接或断开外循环提供了一种安全和简便的连接方式。

推荐搭配产品：

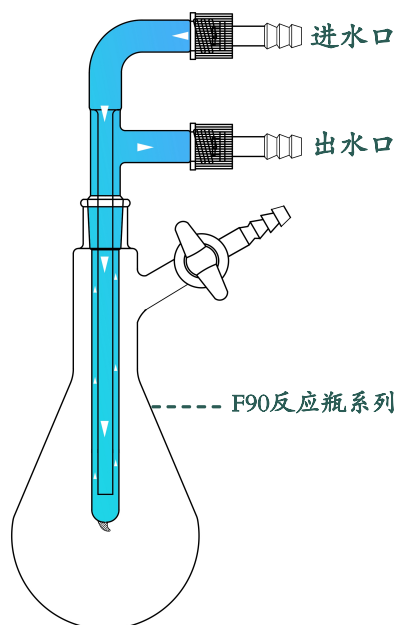

货号	磨口	磨口以下长度	小咀外径
C611420	14/20	100mm	8mm
C611922	19/22	100mm	8mm
C614150	24/40	150mm	10mm
C614200	24/40	200mm	10mm
C612440	24/40	220mm	10mm
C614250	24/40	250mm	10mm
标配配件：			
RC14	尼龙帽，9.5mm孔，GL14		
R201401	可拆式小咀，8mm外径，弯管		



扫码查看，今日实时
优惠价




冷凝器，紧凑型

1. 紧凑型高效回流冷凝器总高在210mm-315mm，相较于有效长度400mm的直型冷凝器冷凝效果更高效。常用于反应釜冷凝装置中。
2. 冷凝器上端内磨口由金刚砂研磨，锥度1:10经正弦规测试。下端外磨口由无心磨精密研磨，保证连接密封，不漏气。

货号	外径*总高 (mm)	磨口
C472440	65*210	24/40
C472942	65*215	29/42
C474550	100*315	45/50




扫码查看，今日实时
优惠价

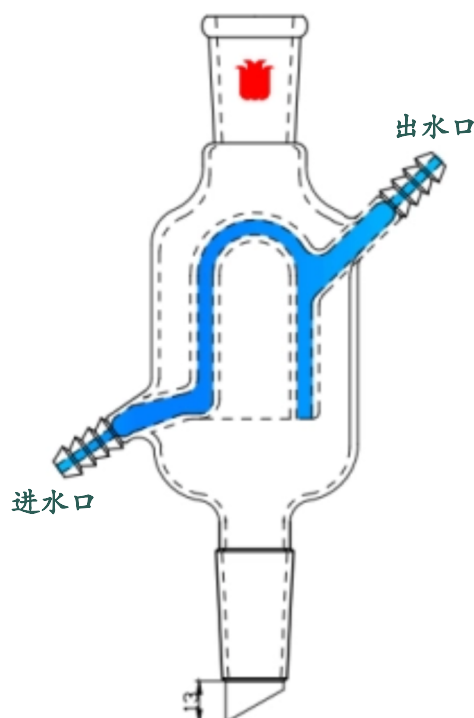

冷凝器，杜瓦式，可拆卸小咀

1. 杜瓦式设计，可使蒸汽充分冷却。敞口处可加入干冰，液氮等冷却剂。可匹配F11系列杜瓦瓶使用。
2. 可拆卸小咀设计为连接或断开外循环提供了一种安全和简便的连接方式。

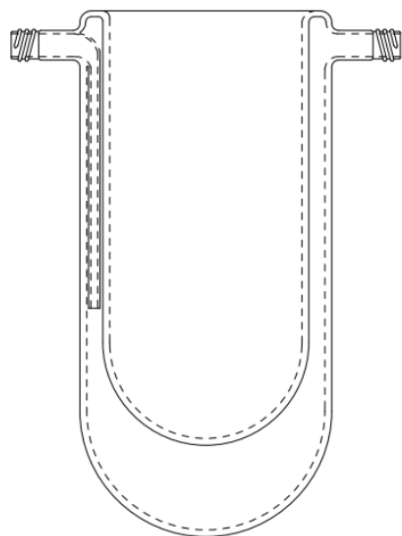

货号	可匹配杜瓦瓶型号	下磨口	小咀外径
C461900	F111900	24/40	10mm
C463500	F111900L	29/42	10mm
C464300	F114300	34/45	10mm
标准配件：			
RC14	尼龙帽，9.5mm孔，GL14		
R201402	可拆式小咀，8mm外径，直管		



扫码查看，今日实时
优惠价

冷凝器，空气，节水型

1. 高效空气冷凝器，无需冷却水/循环泵即可运行，相较于水冷型冷凝器，避免跑水风险，实验更安全。
2. 玻璃制波纹管设计增加了冷却面积，回流情况清晰可见。
3. 适用于多数溶剂的回流，但乙醚等低沸点溶剂除外。



品号	磨口	最大直径	有效长度	价格
N681200	14/20	42mm	200mm	
N689200	19/22	42mm	200mm	
N689300	19/22	42mm	300mm	
N684200-4	24/40	42mm	200mm	
N684300-4	24/40	42mm	300mm	
N684350-4	24/40	42mm	350mm	
N684450-4	24/40	42mm	450mm	
N684200-6	24/40	62mm	200mm	
N684300-6	24/40	62mm	300mm	
N684350-6	24/40	62mm	350mm	
N684450-6	24/40	62mm	450mm	



扫码查看，今日实时
优惠价



扫码观看 视频讲解