


油浴锅，夹套，平底

- 侧壁双层真空夹套设计，提供优异的隔热性能，降低热损失，更具保温性。
- 可搭配直径140mm以内的加热盘，如：CL0001，CL0002系列磁力搅拌和大龙磁力搅拌。



货号	外径*外高 (mm)	内径*内深 (mm)
P301710S	180*101	143*92

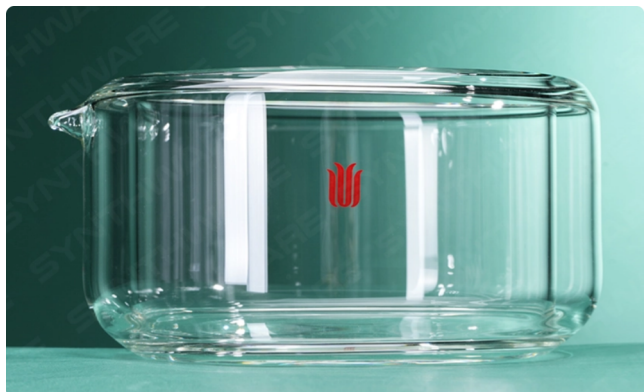

扫码查看，今日实时
优惠价

油浴锅，卡槽

卡槽油浴锅，厚壁设计，锅壁壁厚3.5mm，起到一定的保温效果。




货号	外径*外高 (mm)	内径*内深 (mm)	卡槽内径*高度 (mm)
K290150	150*110	143*96	140*10
K290150D	150*90	143*76	140*100
K290180	180*110	171*96	140*10



扫码查看，今日实时
优惠价

油浴锅，厚壁高强度，卡槽

厚壁高强度卡槽油浴锅，锅壁加厚至5mm，起到更好的保温效果。

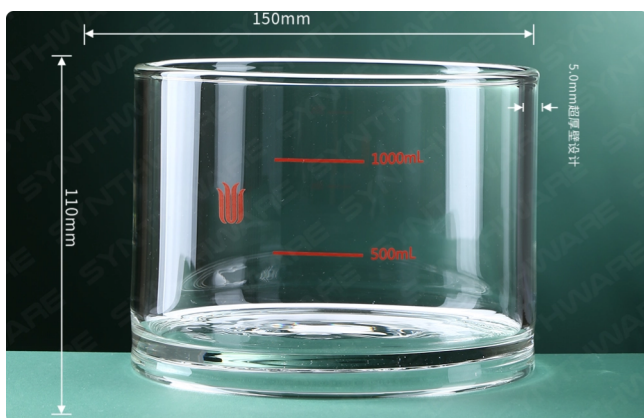

货号	外径*外高 (mm)	内径*内深 (mm)	卡槽内径*高度 (mm)
K290150H	150*110	140*96	140*10



扫码查看，今日实时
优惠价

- 底部带卡槽设计，防止玻璃锅在加热盘上移位或偏转。
- 可搭配直径140mm以内的加热盘，如：CL0001，CL0002系列磁力搅拌和大龙磁力搅拌。

油浴锅，卡槽，手柄

卡槽油浴锅，厚壁设计，锅壁壁厚3.5mm，起到一定的保温效果。

货号	外径*外高 (mm)	内径*内深 (mm)	卡槽内径*高度 (mm)
K280150	150*110	143*96	140*10
K280180	180*110	171*96	140*10



扫码查看，今日实时
优惠价



油浴锅，厚壁高强度，卡槽

厚壁高强度卡槽油浴锅，锅壁加厚至5mm，起到更好的保温效果。

货号	外径*外高 (mm)	内径*内深 (mm)	卡槽内径*高度 (mm)
K280150H	150*110	143*96	140*10



扫码查看，今日实时
优惠价



- 底部带卡槽设计，防止玻璃锅在加热盘上移位或偏转。
- 可搭配直径140mm以内的加热盘，如：CL0001，CL0002系列磁力搅拌和大龙磁力搅拌。

磁力搅拌器，套装（含玻璃浴锅）

套装标配K280150欣维尔自产3.3.高硼硅玻璃浴锅。玻璃锅具卡槽设计，防止其在加热盘上移位或偏转。

货号	型号
CL1150	基础款，BRT-Class (SWE-50C)
CL2150	经典款，BRT-Class (SWE-50C)



扫码查看，今日实时
优惠价



坩埚，陶瓷

陶瓷坩埚，热稳定性好，适用于灼烧，灰化等实验，耐温范围：1200℃。耐酸碱腐蚀性。



货号	容量ml	价格
TG0005	5	
TG0010	10	
TG0015	15	
TG0020	20	
TG0025	25	
TG0030	30	
TG0040	40	
TG0050	50	
TG0070	70	
TG0100	100	
TG0150	150	
TG0200	200	
TG0300	300	

扫码查看，今日实时优惠价


欣维尔监制加热模块由铸铝工艺制成。具有优异的导热性能和温度均匀性。可和不同规格模块组合，实现模块化组合设计。工作温度：低于150℃，否则外壁涂层会分解的风险。

加热模块，1/4圆，4mL

适配4mL样品瓶。

货号	描述
H251520	1/4圆加热模块 4ml 样品瓶 11孔孔径：15.5mm，孔深：20mm

扫码查看，今日实时优惠价

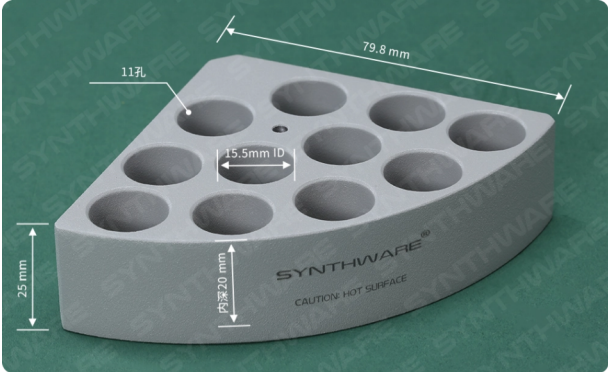


加热模块，1/4圆，8mL

适配8mL样品瓶。

货号	描述
H251826	1/4圆加热模块 8ml 样品瓶 6孔孔径：18mm 孔深：26mm

扫码查看，今日实时优惠价

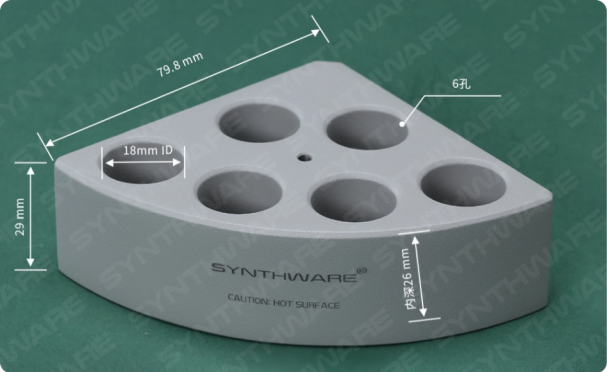

推荐搭配产品：

加热模块型号：	适配样品瓶型号：						
H251520 加热模块，1/4圆，4mL	X591304	X401304	X541304	X591304J	X141304	V315006	V135008
H251826 加热模块，1/4圆，8mL	X561508	X401508	X561508J	X161508	V315013	V361508J	V344004

加热模块，1/4圆

欣维尔监制加热模块由铸铝工艺制成。具有优异的导热性能和温度均匀性。可和其他规格孔径模块组合，实现模块化组合设计。工作温度：低于150℃，否则外壁涂层会分解的风险。

货号	描述	价格
H252131	1/4圆加热模块 16ml 反应管 4孔孔径：21.6mm 孔深：31.7mm	 扫码查看，今日实时 优惠价
H252824	1/4圆加热模块 20ml 样品瓶 4孔孔径：28.5mm，孔深：24mm	
H252830	1/4圆加热模块 30ml 样品瓶 4孔孔径：28.5mm，孔深：30mm	
H252843	1/4圆加热模块 40ml 样品瓶 4孔孔径：28.5mm 孔深：43mm	



推荐搭配产品：

加热模块型号：		适配样品瓶型号：	
H252824	1/4圆加热模块 20ml	X642420	X402420
H252830	1/4圆加热模块 30ml	X772430	X402430
H252843	1/4圆加热模块 40ml	X622440	X402440



扫码查看，今日实时
优惠价

载物盘，圆圈型

货号	型号	描述
H25135Q	MS 135.8	扩大载物圆圈单独或与H25135P联合使用



扫码查看，今日实时
优惠价



载物盘，圆盘型

货号	型号	描述
H25135P	MS 135.1	扩大载物圆盘单独或与H25135Q联合使用



扫码查看，今日实时
优惠价



- 欣维尔监制载物环、载物盘，由铸铝工艺制成。具有优异的导热性能和温度均匀性。
- 工作温度：需低于150℃，否则外壁涂层会分解。

金属砂浴，带支撑孔板

标配30mm孔径碳纤维板，方便管类容器加热。模块和金属砂均由铝合金材质制得。金属砂耐温500℃，沙浴锅耐温260℃。



货号	规格	价格
Z101500	500mL 260° T6高导热材 PTFE保温外壳(含1kg合金砂+固定板)	 扫码查看，今日实时 优惠价
Z10101L	1000mL 260° T6高导热材 PTFE保温外壳(含1.5kg合金砂+固定板)	
标配组件：		
G160500	碳纤维固定板,孔直径30mm， 匹配500ml金属浴	
G161000	碳纤维固定板，孔直径30mm， 匹配1000ml金属浴	
G180500	1.5mm合金砂 1000g/包， 匹配500ml金属浴	
G181000	1.5mm合金砂 1500g/包， 匹配1000ml金属浴	

- 电镀三脚架，三角结构设计，支撑稳定，减少倾倒风险。
- 采用不锈钢材质制成，表面经过电镀处理，耐腐蚀，耐高温。可与酒精灯，石棉网搭配使用，可用于支撑烧杯，烧瓶，蒸发皿等。

三脚架，三角型，电镀

货号	规格mm
J480125	125*190
J480150	150*190
J480200	200*190



扫码查看，今日实时
优惠价



三脚架，圆型，电镀

货号	规格
J470125	125mm*190mm
J470150	150mm*190mm
J470200	200mm*190mm



扫码查看，今日实时
优惠价



- 底座宝塔小咀需与胶管和外部气源连接，通过旋转阀门调节燃气流量，从而控制火焰大小。
- 可搭配支撑三角架和石棉网，对烧瓶进行加热。

本生灯

货号	燃气接口
W720001	天然气
W720002	煤气



扫码查看，今日实时
优惠价



本生灯，阀门调节

货号
W720004



扫码查看，今日实时
优惠价



将搅拌器盘面恒定在某个温度,通过盘面下电机带动磁铁转动,形成一个旋转磁场,从而带动盘面上容器内磁棒(搅拌子)搅拌液体,使得容器内液体充分混匀受热,高效完成化学合成反应。广泛应用于石油,化工,化学,生物和医药等行业。

磁力搅拌器,加热型,基础款



安全性

- 独立的可调式硬件安全温度超温保护,用户可任意设定安全温度,保护设备安全运行。
- 内置高温报警,保护板上电子元件;电机过热,过流保护,极大提升电机使用寿命。

货号	型号
CL0001	BRT-Basic (SWE-50B)
 扫码查看,今日实时优惠价	

产品特点

- 加热盘面采用铝合金材质,带表面陶瓷涂层,耐高温耐腐蚀。
- LED数码管显示实时转速;同时具有锁定键,可防止误操作。
- 自动正反转功能:可自定义搅拌方向,或选择自动正反转搅拌模式。同时具备间歇运转的搅拌模式。
- 自我诊断功能:当设备出现故障时,显示器会显示故障信息,方便判断故障点。

磁力搅拌器,加热型,经典款





安全性

- 内置高温报警,保护板上电子元件;电机过热,过流保护极大提升电机使用寿命。
- 机后实时显示盘面温度,防止烫伤。
- 独立的可调式硬件安全温度超温保护,用户可任意设定安全温度,保护设备安全运行。

货号	型号
CL0002	BRT-Class (SWE-50C)
 扫码查看,今日实时优惠价	

产品特点

- 蝴蝶状加热器,配合模糊PID控制算法,控温精度高,波动小,均匀性好。
- 自动正反转功能:可自定义搅拌方向,或选择自动正反转搅拌模式。同时具备间歇运转的搅拌模式。
- 一体化定时器/计时器,可分别控制加热、搅拌或加热搅拌。定时器具有蜂鸣器功能。加热跟搅拌可自由选择。

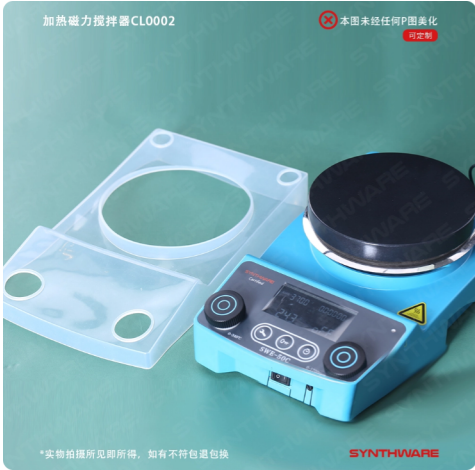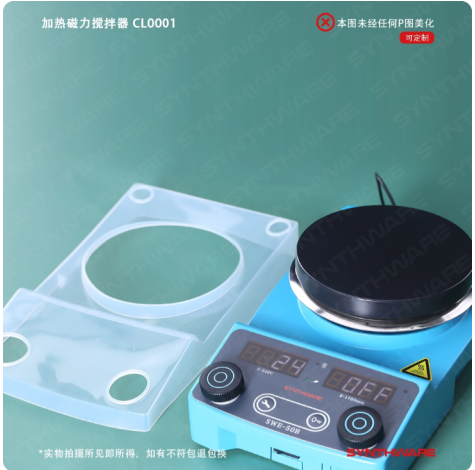		
型 号	CL0002	CL0001
温度范围(℃)	室温 - 340℃(加热盘面)	室温 - 340℃(加热盘面)
转速范围(RPM)	50 - 1700 (2000可选)	50 - 1700 (2000可选)
最大搅拌量	20L	20L
搅 拌 方 向	逆时针, 顺时针可设置; 也可间歇正反方向运行	逆时针, 顺时针可设置; 也可间歇正反方向运行
加 热 功 率	750W	550W
显 示 类 型	LCD液晶屏	LED数码管
温度稳定性	盘面: $\pm 1^{\circ}\text{C}$	盘面: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
安全性	外部样品 (500ml水, 600RPM转速): $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$	外部样品 (500ml水, 600RPM转速): $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$
	可调安全温度(℃): 28℃ - 370℃ (DN12878标准)	可调安全温度(℃): 28℃ - 370℃ (DN12878标准)
	可调软件超温保护, 菜单可设置	可调软件超温保护, 菜单可设置
	内部环境超温保护: $\geq 80^{\circ}\text{C}$	内部环境超温保护: $\geq 80^{\circ}\text{C}$
	余热提醒: 关机时盘面温度超过50℃提醒	余热提醒: 关机时盘面温度超过50℃提醒
外置温度传感器	PT1000	PT1000
定时计时功能	有	/
盘面介质	铝合金陶瓷涂层	铝合金陶瓷涂层
盘面尺寸(mm)	$\Phi 138$	$\Phi 138$
整机尺寸(WxDxH:mm)	160 × 272 × 97	160 × 272 × 97
工作环境温度(℃)	5℃ - 35℃	5℃ - 35℃
电 源 电 压	220V 50HZ	220V 50HZ
保护等级DIN EN60529	IP42	IP42

注: 性能参数测试在空载条件下, 环境温度25℃, 环境湿度55%。

磁力搅拌器，套装（含玻璃浴锅）

套装标配K280150欣维尔自产3.3L高硼硅玻璃浴锅。玻璃锅具卡槽设计，防止其在加热盘上移位或偏转。



货号	型号
CL1150	基础款，BRT-Class（SWE-50C）
CL2150	经典款，BRT-Class（SWE-50C）



扫码查看，今日实时
优惠价