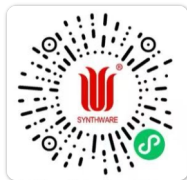
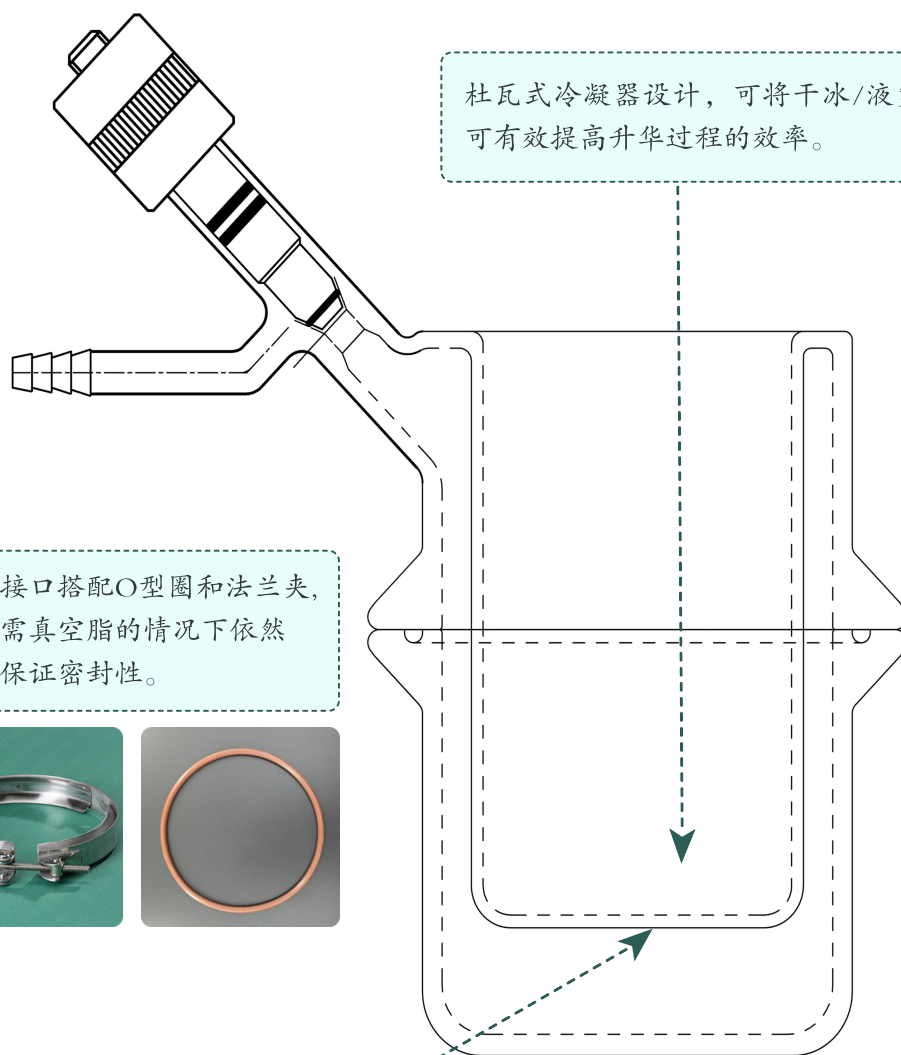


升华装置，磨砂面，真空，法兰口，改进型

注：表中容量指柱形冷指底部至装置底部的体积

货号	产品说明	容量	O型圈	法兰	价格
E740100	100 mL全套	100mL	R331	57mm	
E740150	150 mL全套	150mL	R339	80mm	
E740250	250mL全套	100mL	R100	100mm	
E740500	500mL全套	150mL	R150	150mm	
标配配件：					
CC0057	马蹄夹，57mm法兰				
CC0080	马蹄夹，80mm法兰				
CC100	不锈钢法兰夹，150#法兰专用				
CC150	不锈钢法兰夹，150#法兰专用				
R331	#331 “O”型圈				
R339	#339 “O”型圈				
R100	110#法兰专用，O型圈，材质VitoN-1				
R150	150#法兰专用，O型圈，材质VitoN-1				
S600008T	0-8mm四氟保护的高真空节门(四氟全包)				

扫码查看，今日实时
优惠价杜瓦式冷凝器设计，可将干冰/液氮直接放入冷凝器中，
可有效提高升华过程的效率。法兰接口搭配O型圈和法兰夹，
在无需真空脂的情况下依然
可以保证密封性。底部磨砂设计，可有效提高
结晶物的附着力。分体式法兰口升华器，底部平坦，
可直接放置于加热搅拌器上加热