


反应瓶，一体式，斜三口/斜四口，夹套，平底，可拆卸小咀

- 一体式斜三口/斜四口平底夹套反应瓶，瓶身壁厚高强度设计，使用3.3高硼硅玻璃管，经特殊工艺(数控机床等)制得，非大炉吹制，以达到瓶身厚实且均匀，结实耐用。
- 顶部内磨口由金刚砂精密研磨，锥度1:10经正弦规测试，保证密封性。
- 注：此反应瓶不适用于插入温度计套管，如需插入温度计套管可选购N50T系列产品。



斜三口

货号	容量 mL	磨口	螺纹	价格
N504250	250	24/40	14#	
N504500	500	24/40	14#	
N504000	1000	24/40	14#	
N502000	2000	24/40	18#	
N503000	3000	24/40	18#	
N505000	5000	24/40	18#	
标配配件:				
RC14	尼龙帽,9.5mm孔,# 14			
R201402	可拆式小咀,#14,直			
RC18	尼龙帽,11mm孔,#18			
R201801	可拆式小咀,#18,直			

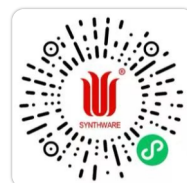

扫码查看，今日实时
优惠价



斜四口

货号	容量 mL	磨口	螺纹	价格
N514250	250	24/40	14#	
N514500	500	24/40	14#	
N514000	1000	24/40	14#	
N512000	2000	24/40	18#	
N513000	3000	24/40	18#	
N515000	5000	24/40	18#	
标配配件:				
RC14	尼龙帽,9.5mm孔,# 14			
R201402	可拆式小咀,#14,直			
RC18	尼龙帽,11mm孔,#18			
R201801	可拆式小咀,#18,直			



扫码查看，今日实时
优惠价

- ☑ 平底设计，可直接放置于操作台，稳定不晃。
- ☑ 可拆卸小咀设计为连接或断开外循环提供了一种安全和简便的连接方式。
- ☑ 外部夹套设计，循环介质下进上出。可对内层反应体系进行均匀，高效的加热，冷却或恒温控制，避免直接加热导致局部过热。

可根据需求连接功能性接头或装置，如：搅拌轴套，通气接头，冷凝器，加料漏斗等。
可用于合成、回流、蒸馏、结晶，等多种实验操作。

反应瓶，一体式，斜三口/斜四口，温度计，夹套，平底，可拆卸小咀


- 一体式斜三口/斜四口平底夹套反应瓶，瓶身壁厚高强度设计，使用3.3高硼硅玻璃管，经特殊工艺（数控机床等）制得，非大炉吹制，以达到瓶身厚实且均匀，结实耐用。
- 顶部内磨口由金刚砂精密研磨，锥度1:10经正弦规测试，保证密封性。
- 注：右侧口温度计套管（N27系列）需单独购买。

斜三口

货号	容量 mL	磨口	螺纹	价格
N504250T	250	24/40	14#	
N504500T	500	24/40	14#	
N504000T	1000	24/40	14#	
N502000T	2000	24/40	18#	
N503000T	3000	24/40	18#	
N505000T	5000	24/40	18#	
标配配件：				
RC14	尼龙帽,9.5mm孔,# 14			
R201402	可拆式小咀,#14,直			
RC18	尼龙帽,11mm孔,#18			
R201801	可拆式小咀,#18,直			



扫码查看，今日实时
优惠价

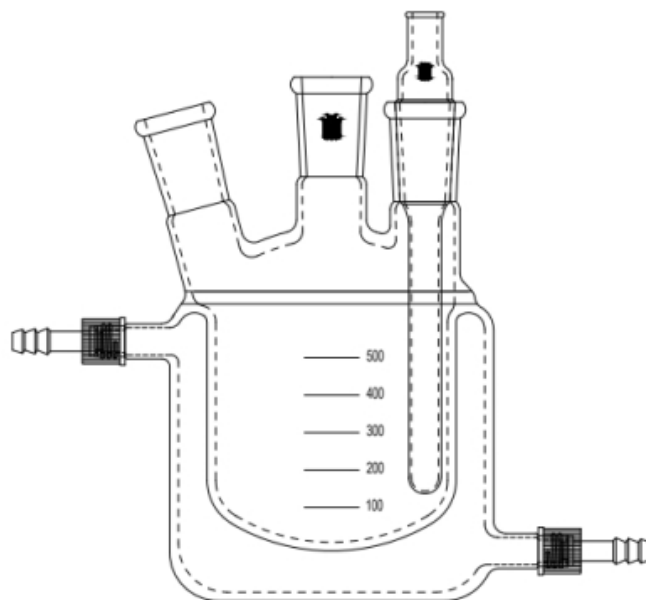


斜四口

货号	容量 mL	磨口	螺纹	价格
N514250T	250	24/40	14#	
N514500T	500	24/40	14#	
N514000T	1000	24/40	14#	
N512000T	2000	24/40	18#	
N513000T	3000	24/40	18#	
N515000T	5000	24/40	18#	
标配配件：				
RC14	尼龙帽,9.5mm孔,# 14			
R201402	可拆式小咀,#14,直			
RC18	尼龙帽,11mm孔,#18			
R201801	可拆式小咀,#18,直			



扫码查看，今日实时
优惠价

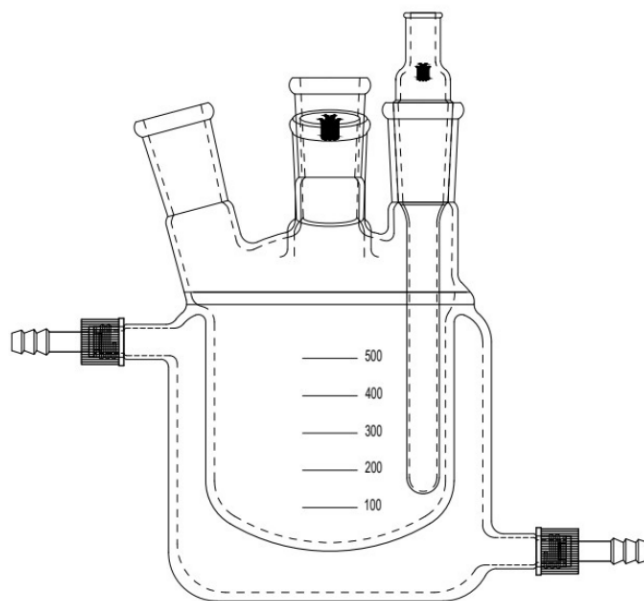


- ☑ 平底设计，可直接放置于操作台，稳定不晃。
- ☑ 可拆卸小咀设计为连接或断开外循环提供了一种安全和简便的连接方式。
- ☑ 外部夹套设计，循环介质下进上出。可对内层反应体系进行均匀，高效的加热，冷却或恒温控制，避免直接加热导致局部过热。

可根据需求连接功能性接头或装置，如：温度计套管，搅拌轴套，通气接头，冷凝器，加料漏斗等。可用于合成、回流、蒸馏、结晶，等多种实验操作。

反应釜，一体式，直四口，内螺纹，温度计，夹套，球磨接口，平底

一体式内螺纹直四口平底夹套反应瓶，瓶身厚壁高强度设计，使用3.3高硼硅玻璃管，经特殊工艺(数控机床等)制得，非大炉吹制，以达到瓶身厚实且均匀，结实耐用。顶部内螺纹设计，密封性好。

注：前口具孔螺纹盖，温度计及热电偶套管需单独购买。

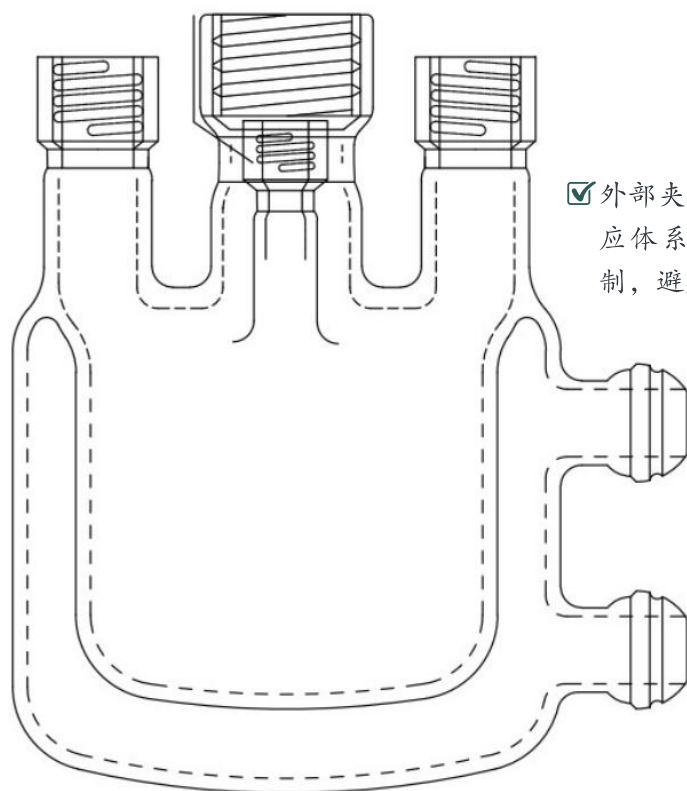


✓ 外部夹套设计，循环介质下进上出。可对内层反应体系进行均匀，高效的加热，冷却或恒温控制，避免直接加热导致局部过热。

✓ 28/15球磨连接，切向密封，以实现更高的循环效率。

货号	容量ml	外径mm	高度mm	主口	侧口	前口	价格
N540500	500	110	100	25#	15#	7#	 扫码查看，今日实时 优惠价
N541000	1000	110	180	25#	15#	7#	
N542000	2000	140	180	25#	15#	7#	
N543000	3000	165	185	25#	15#	7#	
N545000	5000	165	310	25#	15#	7#	
标配配件：							
R116	棕色O型圈，内径x宽度18.7x2.62						
B101007QB	7#内螺纹具孔尼龙塞子						

选配配件：

B101007G	7#内螺纹具孔盖尼龙材质
R015QB	O型圈,四氟全包耐腐蚀型, 内径*宽度5.88*2mm
R107EP	O型圈,黑色EP,抗极性溶剂, 内径×宽度,3.70×1.78mm
R107	O型圈,棕色氟橡胶, 内径×宽度,5.23×2.62mm
Q107	O型圈,白色全惰性, 内径×宽度,5.23×2.62mm
R116QB	O型圈,四氟全包耐腐蚀型, 内径*宽度18.7X2.62mm
R116EP	O型圈,黑色EP,抗极性溶剂, 内径×宽度,18.7X2.62mm
Q116	O型圈,白色全惰性, 内径×宽度,18.7X2.62mm

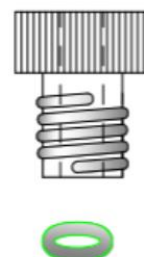


可根据需求连接功能性接头或装置，如：搅拌轴套，通气接头，冷凝器，加料漏斗等。可用于合成，回流，蒸馏，结晶，等多种实验操作。前口为7#螺纹口,可搭配B101007QB螺纹盖和温度计或N56系列热电偶套管，用于实时监测反应体系温度。

反应釜，一体式，直四口，内螺纹，温度计，夹套，球磨接口，底部出料阀

一体式内螺纹直四口平底夹套反应瓶，瓶身厚壁高强度设计，使用3.3高硼硅玻璃管，经特殊工艺(数控机床等)制得，非大炉吹制，以达到瓶身厚实且均匀，结实耐用。顶部内螺纹设计，密封性好。

注：前口具孔螺纹盖，温度计及热电偶套管需单独购买。

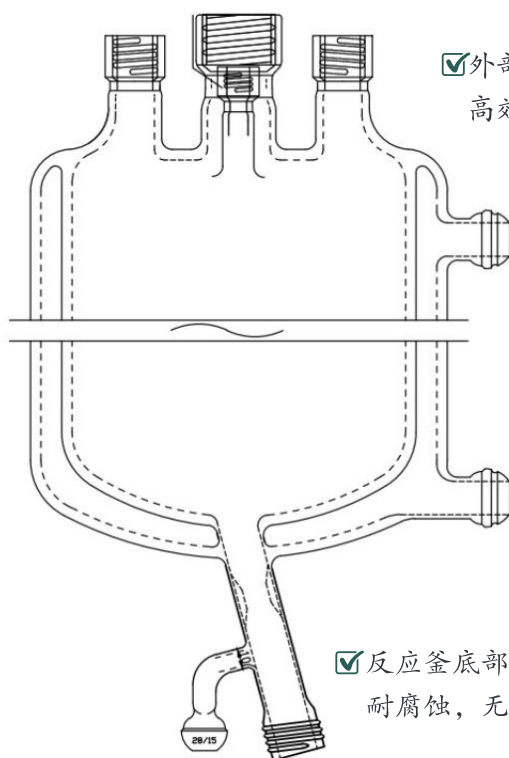

☑外部夹套设计，循环介质下进上出。可对内层反应体系进行均匀，高效的加热，冷却或恒温控制，避免直接加热导致局部过热。


☑28/15球磨连接，切向密封，以实现更高的循环效率。

☑反应釜底部具有高真空排料阀设计，阀体聚四氟乙烯材质包覆，耐腐蚀，无需真空脂即可达到密封效果，不漏液。

货号	高真空阀	容量ml	外径mm	高度mm	主口	侧口	前口	价格
N550500	8mm	500	110	100	25#	15#	7#	 扫码查看，今日实时 优惠价
N551000	8mm	1000	110	180	25#	15#	7#	
N552000	8mm	2000	140	180	25#	15#	7#	
N553000	12mm	3000	165	185	25#	15#	7#	
N555000	12mm	5000	165	310	25#	15#	7#	
标配配件：								
S660008T	四氟保护的精细可调的高真空阀(全包)0-8mm							
R116	棕色O型圈，内径x宽度18.7x2.62							
S660012T	四氟保护的精细可调的高真空阀（全包）0-12mm							
B101007QB	7#内螺纹具孔尼龙塞子							

选配配件：

B101007G	7#内螺纹具孔盖尼龙材质
R015QB	O型圈,四氟全包耐腐蚀型, 内径*宽度5.88*2mm
R107EP	O型圈,黑色EP,抗极性溶剂, 内径×宽度,3.70×1.78mm
R107	O型圈,棕色氟橡胶, 内径×宽度,5.23×2.62mm
Q107	O型圈,白色全惰性, 内径×宽度,5.23×2.62mm
R116QB	O型圈,四氟全包耐腐蚀型, 内径*宽度18.7X2.62mm
R116EP	O型圈,黑色EP,抗极性溶剂, 内径×宽度,18.7X2.62mm
Q116	O型圈,白色全惰性, 内径×宽度,18.7X2.62mm

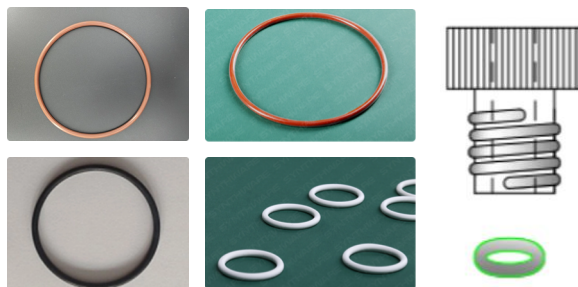


可根据需求连接功能性接头或装置，如：搅拌轴套，通气接头，冷凝器，加料漏斗等。可用于合成，回流，蒸馏，结晶，等多种实验操作。前口为7#螺纹口,可搭配B101007QB螺纹盖和温度计或N56系列热电偶套管，用于实时监测反应体系温度。

接头，温度计，内插式套管，反应瓶专用

- 顶部为具孔温度计胶套，孔径为7mm，有弹性，可插入T15系列温度计。
- 具标准锥度外磨口，由高精度无心磨制得，加厚设计，不易裂开，密封性好。可与24/40磨口反应瓶搭配使用，便于监测反应温度。



货号	磨口	匹配型号	价格
N274250	24/40	250ML	 扫码查看，今日实时 优惠价
N274500	24/40	500ML	
N274000	24/40	1000ML	
N27242L	24/40	2000ML	
N27243L	24/40	3000ML	
N27245L	24/40	5000ML	
标配配件：			
R045	具孔胶皮套		

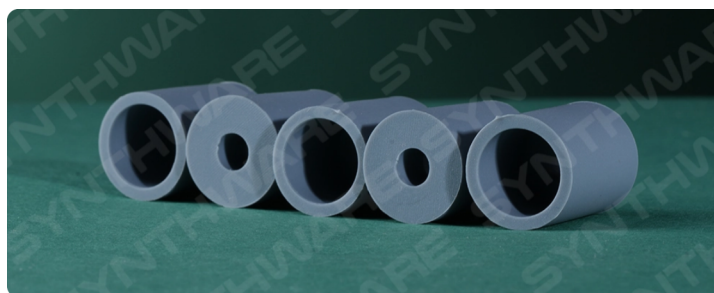

推荐搭配产品：

货号	温度范围	温差
T152100	-20° to 110°	<1°
T152250	-20° to 200°	<2°



扫码查看，今日实时
优惠价



接头，热电偶，套管

可匹配直径4mm及以下的热电偶使用。也可搭配具孔螺纹盖将套管固定至N54，N55系列反应瓶中做热电偶套管，实时监测反应瓶内温度。

货号	匹配型号
N560500	N54/N55 500ML
N561000	N54/N55 1000ML
N562000	N54/N55 2000ML
N563000	N54/N55 3000ML
N565000	N54/N55 5000ML



扫码查看，今日实时
优惠价



反应瓶，分体式，斜三口/斜四口，夹套，平底，可拆卸小咀

分体式斜三口/斜四口平底夹套反应瓶，瓶身壁厚高强度设计，使用3.3高硼硅玻璃管，经特殊工艺（数控机床等）制得，非大炉吹制，以达到瓶身厚实且均匀，结实耐用。

瓶盖顶部内磨口由金刚砂精密研磨，锥度1:10经正弦规测试，保证密封性。

注：此反应瓶不适用于插入温度计套管，如需插入温度计套管可选购N52T系列反应瓶套装或N18Z系列反应釜盖。



斜三口，磨口 24/40

货号	容量 mL	磨口	法兰型号	螺纹型号	价格
N524500	500	24/40	100	14#	
N524000	1000	24/40	100	14#	
N522000	2000	24/40	150	18#	
N523000	3000	24/40	150	18#	
N525000	5000	24/40	150	18#	
标配配件：					
RC14	#14具孔尼龙盖				
R201402	可拆式小咀（直管），8mm外径				
RC18	尼龙帽，11mm孔，#18				
R201801	可拆式小咀，#18，直				
R100	100#法兰专用O型圈，材质VitoN-1				
R150	150#法兰专用O型圈，材质VitoN-1				
CC100	不锈钢法兰夹，100#法兰专用				
CC150	不锈钢法兰夹，150#法兰专用				



扫码查看，今日实时
优惠价



斜四口，磨口 24/40

货号	容量 mL	磨口	法兰型号	螺纹型号	价格
N534500	500	24/40	100	14#	
N534000	1000	24/40	100	14#	
N532000	2000	24/40	150	18#	
N533000	3000	24/40	150	18#	
N535000	5000	24/40	150	18#	
标配配件：					
RC14	#14具孔尼龙盖				
R201402	可拆式小咀（直管），8mm外径				
RC18	尼龙帽，11mm孔，#18				
R201801	可拆式小咀，#18，直				
R100	100#法兰专用O型圈，材质VitoN-1				
R150	150#法兰专用O型圈，材质VitoN-1				
CC100	不锈钢法兰夹，100#法兰专用				
CC150	不锈钢法兰夹，150#法兰专用				



扫码查看，今日实时
优惠价

- ☑ 外部夹套设计，循环介质下进上出。可对内层反应体系进行均匀，高效的加热，冷却或恒温控制，避免直接加热导致局部过热。
- ☑ 瓶盖与瓶体由法兰口连接，法兰口具凹槽，可与O型圈，法兰夹和真空脂搭配使用，可快速连接并保证反应瓶密封性。
- ☑ 平底设计，可直接放置于操作台，稳定不晃。
- ☑ 可拆卸小咀设计为连接或断开外循环提供了一种安全和简便的连接方式。

可根据需求连接功能性接头或装置，如：搅拌轴套，通气接头，冷凝器，加料漏斗等。
可用于合成，回流，蒸馏，结晶，等多种实验操作。

反应瓶，分体式，斜三口/斜四口，温度计，夹套，平底，可拆卸小咀

分体式斜三口/斜四口平底夹套反应瓶，瓶身厚壁高强度设计，使用3.3高硼硅玻璃管，经特殊工艺(数控机床等)制得，非大炉吹制，以达到瓶身厚实且均匀，结实耐用。

瓶盖顶部内磨口由金刚砂精密研磨，锥度1:10经正弦规测试，保证密封性。

注：右侧口温度计套管（N27系列）需单独购买。

斜三口，磨口 24/40

货号	容量 mL	磨口	法兰型号	螺纹型号	价格
N524500T	500	24/40	100	14#	
N524000T	1000	24/40	100	14#	
N522000T	2000	24/40	150	18#	
N523000T	3000	24/40	150	18#	
N525000T	5000	24/40	150	18#	
标配配件：					
RC14	#14具孔尼龙盖				
R201402	可拆式小咀（直管），8mm外径				
RC18	尼龙帽，11mm孔，#18				
R201801	可拆式小咀，#18，直				
R100	100#法兰专用O型圈，材质VitoN-1				
R150	150#法兰专用O型圈，材质VitoN-1				
CC100	不锈钢法兰夹，100#法兰专用				
CC150	不锈钢法兰夹，150#法兰专用				




扫码查看，今日实时
优惠价



斜四口，磨口 24/40

货号	容量 mL	磨口	法兰型号	螺纹型号	价格
N534500T	500	24/40	100	14#	
N534000T	1000	24/40	100	14#	
N532000T	2000	24/40	150	18#	
N533000T	3000	24/40	150	18#	
N535000T	5000	24/40	150	18#	
标配配件：					
RC14	#14具孔尼龙盖				
R201402	可拆式小咀（直管），8mm外径				
RC18	尼龙帽，11mm孔，#18				
R201801	可拆式小咀，#18，直				
R100	100#法兰专用O型圈，材质VitoN-1				
R150	150#法兰专用O型圈，材质VitoN-1				
CC100	不锈钢法兰夹，100#法兰专用				
CC150	不锈钢法兰夹，150#法兰专用				

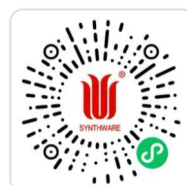

扫码查看，今日实时
优惠价



- ☑ 外部夹套设计，循环介质下进上出。可对内层反应体系进行均匀，高效的加热，冷却或恒温控制，避免直接加热导致局部过热。
- ☑ 瓶盖与瓶体由法兰口连接，法兰口具凹槽，可与O型圈，法兰夹和真空脂搭配使用，可快速连接并保证反应瓶密封性。
- ☑ 平底设计，可直接放置于操作台，稳定不晃。
- ☑ 可拆卸小咀设计为连接或断开外循环提供了一种安全和简便的连接方式。


可根据需求连接功能性接头或装置，如：温度计套管，搅拌轴套，通气接头，冷凝器，加料漏斗等。可用于合成、回流、蒸馏、结晶，等多种实验操作。

反应釜，斜三口，夹套，可拆卸小咀

- 分体式斜三口夹套反应釜，瓶身厚壁高强度设计，使用3.3高硼硅玻璃管，经特殊工艺(数控机床等)制得，非大炉吹制，以达到瓶身厚实且均匀，结实耐用。
- 釜盖顶部内磨口由金刚砂精密研磨，锥度1:10经正弦规测试，保证密封性。
- 此反应釜不适用于插入温度计套管，如需插入温度计套管可选购N18Z系列反应釜盖。



可根据需求连接功能性接头或装置，如：搅拌轴套，通气接头，冷凝器，加料漏斗等。
可用于合成，回流，蒸馏，结晶，等多种实验操作。

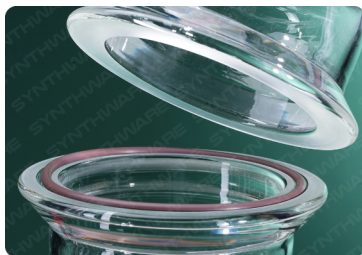

- ☑釜盖与釜体由法兰口连接,法兰口具凹槽,可与O型圈,法兰夹和真空脂搭配使用,可快速连接并保证反应釜密封性。
- ☑反应釜底部具有高真空排料阀设计,阀体聚四氟乙烯材质包覆,耐腐蚀,无需真空脂即可达到密封效果,不漏液。
- ☑外部夹套设计,循环介质下进上出。可对内层反应体系进行均匀,高效的加热,冷却或恒温控制,避免直接加热导致局部过热。可拆卸小咀设计为连接或断开外循环提供了一种安全和简便的连接方式。

货号	容量mL	法兰型号	高真空型号	主口	侧口	螺纹型号	价格
N894500	500	100	0-14mm	24/40	24/40	14#	
N898450	500	100	0-14mm	29/42	24/40	14#	
N894000	1000	100	0-14mm	24/40	24/40	14#	
N89841L	1000	100	0-14mm	29/42	24/40	14#	
N89242L	2000	150	0-14mm	24/40	24/40	18#	
N89842L	2000	150	0-14mm	29/42	24/40	18#	
N89242L	2000	150	0-14mm	24/40	24/40	18#	
N89842L	2000	150	0-14mm	24/42	24/40	18#	
N89243L	3000	150	0-14mm	24/40	24/40	18#	
N89843L	3000	150	0-14mm	29/42	24/40	18#	
N89245L	5000	150	0-14mm	24/40	24/40	18#	
N89845L	5000	150	0-14mm	29/42	24/40	18#	
N89295L	5000	150	0-14mm	29/42	29/42	18#	
标配配件:							
CC100	不锈钢法兰夹, 100#法兰专用						
CC150	不锈钢法兰夹, 150#法兰专用						
R100	100#法兰专用, O型圈, 材质VitoN-1						
R150	150#法兰专用, O型圈, 材质VitoN-1						
S600014T	0-14mm高真空阀(四氟全包)						
RC14	尼龙帽, 9.5mm孔, #14						
R201402	可拆式小咀, #14, 直						
RC18	尼龙帽, 11mm孔, #18						
R201801	可拆式小咀, #18, 直						




扫码查看, 今日实时
优惠价

- 釜体厚壁高强度设计，使用3.3高硼硅玻璃管，经特殊工艺（数控机床等）制得，非大炉吹制，以达到瓶身厚实且均匀，结实耐用。
- 外部夹套设计，循环介质下进上出。可对内层反应体系进行均匀，高效的加热、冷却或恒温控制，避免直接加热导致局部过热。
- 可拆卸小咀设计为连接或断开外循环提供了一种安全和简便的连接方式。
- 注：此系列产品仅釜体。釜盖，O型圈，法兰夹需单独购买。

推荐搭配产品：

反应釜盖	N18, N81, N18Z, N84, N84Z系列
O型圈	R100, R150, R100EP, R150EP, R100QB, R150QB
法兰夹	CC100, CC150

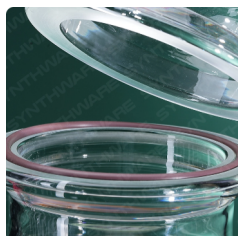

釜体顶部为法兰口，法兰口具凹槽，可与O型圈，法兰夹和真空脂搭配使用，可快速连接并保证反应釜密封性。

反应釜，过滤，G2砂板，夹套，可拆卸小咀

货号	容量mL	法兰型号	高真空型号	螺纹型号
N230500	500	100	0-12mm	14#
N231000	1000	100	0-12mm	14#

标配配件：

S600012T 0-12mm高真空阀(四氟全包)


RC14 尼龙帽,9.5mm孔,#14

R201402 可拆式小咀,#14,直



扫码查看，今日实时
优惠价

标配G2砂板，适用于常见过滤操作。
如需其他规格砂板，请联系销售获取报价。

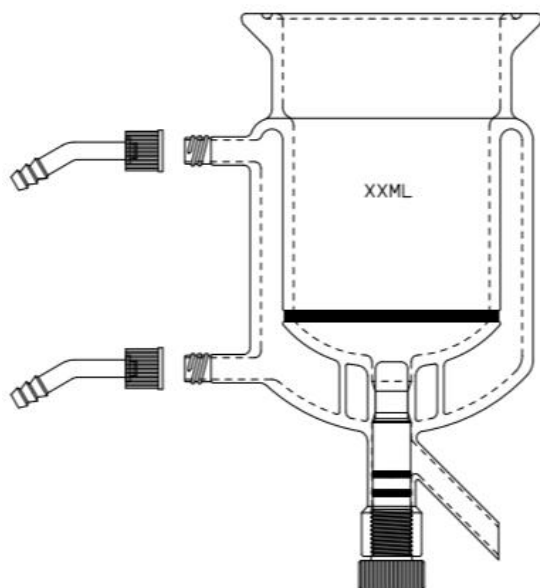

反应釜，刻度，夹套，可拆卸小咀

货号	容量mL	法兰型号	高真空型号	螺纹型号
N190500	500	100	0-14mm	14#
N191000	1000	100	0-14mm	14#
N19152L	2000	150	0-14mm	18#
N193000	3000	150	0-14mm	18#
N195000	5000	150	0-14mm	18#

标配配件：

S600014T 0-14mm高真空阀(四氟全包)

RC14 尼龙帽,9.5mm孔,#14

R201402 可拆式小咀,#14,直

RC18 尼龙帽,11mm孔,#18

R201801 可拆式小咀,#18,直



扫码查看，今日实时
优惠价



反应瓶，圆球型

反应瓶壁厚高强度设计，使用3.3高硼硅玻璃管，经特殊工艺（数控机床等）制得，非大炉吹制，以达到瓶身厚实且均匀，结实耐用。可搭配反应釜盖，O型圈和法兰夹使用。



货号	容量 mL	法兰型号
N801500	500	100
N80101L	1000	100
N80152L	2000	150
N80153L	3000	150
N80155L	5000	150





扫码查看，今日实时
优惠价

反应釜盖可支持定制

法兰口型号：	100#			150#		
定制接口数量：						
接口描述						
接口位置	距中心口距离	接口类型 ^①			接口型号 ^②	接口角度 ^③
中心口(主口)	mm	标准锥度磨口	球型磨口	螺纹口		
3:00	mm	标准锥度磨口	球型磨口	螺纹口		
6:00	mm	标准锥度磨口	球型磨口	螺纹口		
9:00	mm	标准锥度磨口	球型磨口	螺纹口		
12:00	mm	标准锥度磨口	球型磨口	螺纹口		
如接口需在其它位置 可在下图中标记	mm	标准锥度磨口	球型磨口	螺纹口		

- ①接口种类包含螺纹口，标准锥度磨口，球型磨口。
- ②请您提供螺纹口型号，如：#7、#15、#25等；请您提供直磨口型号，如：14/20、24/40等；请您提供球磨口型号，如：35/20等。
- ③接口角度指以主口中心轴线为基准与侧口中心轴线的角度。

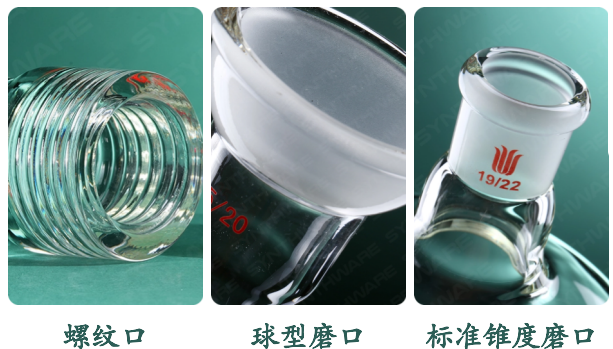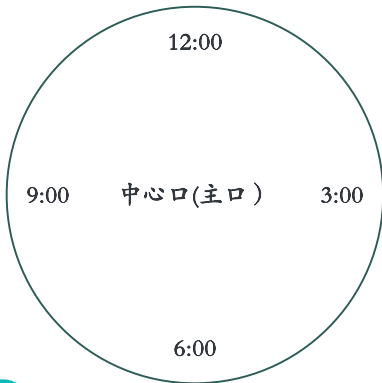

- 反应器盖盖顶部内磨口由金刚砂精密研磨，锥度1:10经正弦规测试，保证密封性。
- 可根据需求连接功能性接头或装置，如：搅拌轴套，通气接头，冷凝器，加料漏斗等。
- 釜盖底部为法兰口可与O型圈，法兰夹和真空脂搭配使用，可快速连接并保证反应釜密封性。
- 搭配釜体可用于合成，回流，过滤，蒸馏，结晶，等多种实验操作。

反应釜盖，单口

货号	主口	法兰型号	价格
N811100	14/20	100	 扫码查看，今日实时 优惠价
N819100	19/22	100	
N814100	24/40	100	
N818100	29/42	100	
N814150	24/40	150	
N818150	29/42	150	
N813150	34/45	150	



反应器盖，斜三口

货号	法兰型号	主口	侧口	价格
N181410	100	14/20	14/20	 扫码查看，今日实时 优惠价
N181910	100	19/22	19/22	
N184910	100	24/40	19/22	
N182410	100	24/40	24/40	
N188410	100	29/42	24/40	
N182415	150	24/40	24/40	
N188415	150	29/42	24/40	
N188815	150	29/42	29/42	
N183815	150	34/45	29/42	



- 反应器盖盖顶部内磨口由金刚砂精密研磨，锥度1:10经正弦规测试，保证密封性。
- 可根据需求连接功能性接头或装置，如：搅拌轴套，通气接头，冷凝器，加料漏斗等。
- 釜盖底部为法兰口可与O型圈，法兰夹和真空脂搭配使用，可快速连接并保证反应釜密封性。
- 搭配釜体可用于合成，回流，过滤，蒸馏，结晶，等多种实验操作。



反应器上盖，斜四口

货号	主口	侧口	前口	法兰型号	价格
N841410	14/20	14/20	14/20	100	
N841910	19/22	19/22	19/22	100	
N844910	24/40	19/22	19/22	100	
N844411	24/40	24/40	14/20	100	
N844491	24/40	24/40	19/22	100	
N842410	24/40	24/40	24/40	100	
N844915	24/40	24/40	19/22	150	
N842415	24/40	24/40	24/40	150	
N848495	29/42	24/40	19/22	150	
N848445	29/42	24/40	24/40	150	
N848845	29/42	29/42	24/40	150	
N842915	29/42	29/42	29/42	150	
N843445	34/45	24/40	24/40	150	
N843845	34/45	29/42	24/40	150	
N843885	34/45	29/42	29/42	150	



扫码查看，今日实时
优惠价

O型圈, Viton®

品号	品名
R100	100#法兰专用O型圈, 材质VitoN-1
R150	150#法兰专用O型圈, 材质VitoN-1



扫码查看, 今日实时
优惠价



O型圈, EP

货号	品名
R100EP	100#法兰专用, O型圈, 材质EP
R150EP	150#法兰专用, O型圈, 材质EP



扫码查看, 今日实时
优惠价



O型圈, 四氟包覆

货号	品名
R100QB	100#法兰专用, O型圈
R150QB	150#法兰专用, O型圈



扫码查看, 今日实时
优惠价



法兰夹, 不锈钢

该夹具由不锈钢制成, 可将反应容器和盖子牢固地固定在一起, 法兰夹夹持的力度由螺杆上的螺钉调节, 可实现快速安装和拆除。

品号	品名
CC100	不锈钢法兰夹, 100#法兰专用
CC150	不锈钢法兰夹, 150#法兰专用



扫码查看, 今日实时
优惠价

