

干燥器，高真空阀，法兰

1. 欣维尔自制高硼硅样品干燥器，可有效防止易潮解，易氧化的化学品变质。
2. 顶部具高真空节门，可连接真空泵，并保持瓶内真空度。
3. 瓶身厚壁高强度设计，使用3.3高硼硅玻璃管，经特殊工艺（数控机床等）制得，非大炉吹制，以达到瓶身厚实且均匀，结实耐用。



- 经实验测试，静态真空可以保持48小时以上。7天瓶内依然保持真空状态。
- 干燥器盖与瓶身由法兰口连接，法兰口具凹槽，可与O型圈，马蹄夹和真空脂搭配使用，可快速连接并保证干燥器密封性。

货号	法兰型号	价格
S860857	57#	
S860880	80#	
标配配件：		
CC0057	马蹄夹，57mm法兰	
CC0080	马蹄夹，80mm法兰	
D331	331# 膨体四氟垫片	
D339	339# 膨体四氟垫片	
S600008T	0-8mm四氟保护的高真空节门(四氟全包)	



扫码查看，今日实时
优惠价

选配配件：

货号	品名
R331QB	四氟全包“O”型圈，适用于57#法兰
R339QB	四氟全包“O”型圈，适用于80#法兰



四氟全包O型圈 更耐腐

干燥管，U型，SCHWARTZ

U型设计，较标准SCHWARTZ干燥管增加干燥路径，使气体与干燥剂更加充分的接触，提高干燥效率。



货号	磨口	高度*宽度mm
B401420	14/20	145*130



扫码查看，今日实时
优惠价



U型干燥管配有14/20空心玻璃塞，玻璃塞具孔与宝塔咀正对齐，作为干燥管开关，同时，便于填充干燥剂。

干燥管，厚壁高强度，无水无氧，可拆卸小咀

- 1. 干燥管主体采用厚壁高硼硅玻璃制得，结实耐用。
- 2. 管内可以填入干燥剂或活性分子筛，气体从一端进入另一端输出，从而达到去除水分，气体干燥的作用。
可用于纯化和干燥通入系统的惰性气体，特别是无水无氧操作。
- 3. 标配GL45尼龙盖含泡棉垫片，达到密封效果。

货号	螺纹型号	外径mm	有效长度mm	价格
H194030	45#	40	300	 扫码查看，今日实时 优惠价
H195030	45#	50	300	
H196025	45#	60	250	
H196030	45#	60	300	
标配配件：				
CG45-JK	具孔GL45尼龙螺纹盖，上端14#外螺纹可直接匹配可拆卸小咀，含泡棉垫片			注：螺纹盖颜色随机
RC14	尼龙帽，9.5mm孔，GL14			
R201402	可拆式小咀，8mm外径，直管			

内螺纹盖，具孔，干燥管

货号	螺纹型号
CG45-JK	具孔GL45尼龙螺纹盖，上端14#外螺纹 可直接匹配可拆卸小咀，含泡棉垫片
标配配件：	
RC14	尼龙帽，9.5mm孔，GL14
R201402	可拆式小咀，8mm外径，直管


扫码查看，今日实时
优惠价



干燥管, KS-G型

分子筛装量: 100g 气体流量: ≤ 500 ml/min

货号	外径mm	有效长度mm
H186330	43	330



扫码查看, 今日实时
优惠价



脱氧管, KSL-K型

脱氧剂装量: 120g 气体流量: ≤ 500 ml/min

货号	外径mm	有效长度mm
H176330	43	330



扫码查看, 今日实时
优惠价



分子筛, 颗粒

货号	型号	颗粒规格mm	包装
P280004	4A	1.6-2.5	500g/瓶
P280013	13X	1.6-2.5	500g/瓶



扫码查看, 今日实时
优惠价



分子筛, 粉末

货号	型号	颗粒规格mm	包装
P310004	4A	粉末	200g/袋
P310013	13X	粉末	200g/袋



扫码查看, 今日实时
优惠价



- 4Å分子筛, 是常见的干燥剂, 也可用于制备复合吸附剂, 是Schlenk管线气体纯化首选。
- 13X分子筛, 常用于一般气体的深度干燥, 天然气或煤气中的脱硫处理。
- 粉末状分子筛, 比表面积较颗粒状大, 易于充分接触反应体系, 可用于干燥剂或裂化催化剂的活性组分。

冷冻干燥瓶，冷冻干燥机

标配黑色硅胶盖和瓶身。瓶身厚壁高强度设计，使用3.3高硼硅玻璃管，经特殊工艺(数控机床等)制得，非大炉吹制，以达到瓶身厚实且均匀，结实耐用，耐负压真空环境。可与连接管搭配，用于冷冻干燥机上。

货号	容量ml	价格
D330075	75	 扫码查看，今日实时 优惠价
D330150	150	
D330300	300	
D330600	600	
D330900	900	
D331200	1200	
D332000	2000	
标配配件：		
S330075	冷冻干燥瓶盖，材质：黑色硅胶	



连接管，厚壁，150°，冻干瓶专用

150° 冻干瓶专用连接管。

连接管由厚壁玻璃管制得，壁厚均匀，保证冷冻干燥操作安全性。

货号	规格
N332055	冷冻干燥瓶专用
 扫码查看，今日实时 优惠价	



可根据客户机器型号，
接受不同管径及角度定制。

冷冻干燥瓶，冷冻干燥机，仅瓶身

可与专用瓶盖及连接管搭配，用于冷冻干燥机上。

货号	容量ml	价格
D340075	75	 扫码查看，今日实时 优惠价
D340150	150	
D340300	300	
D340600	600	
D340900	900	
D341200	1200	
D342000	2000	



温馨提示：

由于市面上冷冻干燥瓶盖尺寸多样，所以D33系列冷冻干燥瓶确保能与标配瓶盖完美匹配，但不能确保和其它品牌的盖子兼容。如果要单独订购冻干瓶，请和客服沟通确认尺寸，即便我们常规的冻干瓶不能与您的盖子匹配，我们提供定制服务，能够根据您的盖子尺寸，生产适配的冻干瓶，满足您的个性化需求。

连接管，厚壁，150°，标准磨口

150° 冻干瓶专用具磨口连接管，可将磨口烧瓶直接连接于冻干机。

连接管由厚壁玻璃管制得，壁厚均匀，保证冷冻干燥操作安全性。下端外磨口由高精度无心磨精细打磨，保证密封性。




可根据客户机器型号，接受不同管径及角度定制。

货号	磨口	砂芯
N332440	24/40	无
N332440K	24/40	G1



扫码查看，今日实时
优惠价

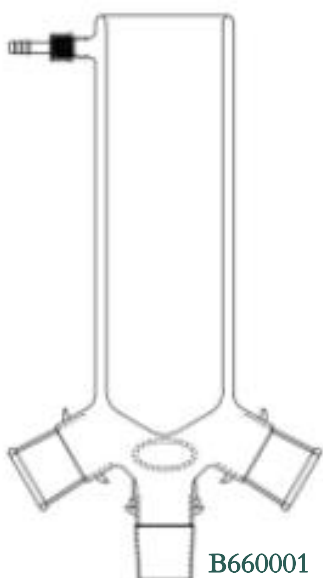


B660001



B660002



F12552L

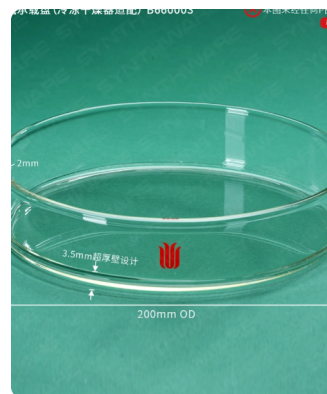

B660003

冷凝器，杜瓦式，冷冻干燥


货号	磨口
B660001	55/50



扫码查看，今日实时
优惠价

冷冻干燥瓶，外磨口，平底

货号	磨口
B660002	55/50

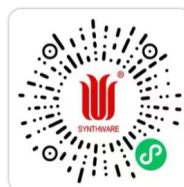

扫码查看，今日实时
优惠价

液氮承载盘


货号	描述
B660003	冷冻干燥器适配



扫码查看，今日实时
优惠价

烧瓶，厚壁高强度，球型，平底

货号	磨口	容量ml
F12552L	55/50	2000

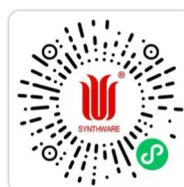

扫码查看，今日实时
优惠价

冷冻干燥装置套装

干燥装置整体厚壁设计，坚固耐用，可在低温，真空的环境下，将药物溶液或悬浊液中的溶剂直接由固态冰升华位气态，从而得到干燥的固体产品。相较于冷冻干燥机，更加经济实惠。

