

接头，连接，120°

- 两端均为外磨口，呈120° 夹角且磨口规格一致。接头打弯处加厚处理，壁厚均匀，坚固耐用。
- 两端标准外磨口由无心磨精密研磨，保证连接的密封性。



货号	磨口
E151420	14/20
E151922	19/22
E152440	24/40

扫码查看，今日实时
优惠价

接头，连接，SWAGELOK®，90°

- 可与具磨砂口（外径为1/2"）的SWAGELOK®接头连接。
- 支管为精密研磨的直型结构，保证气密性。下端外磨口外磨口由高精度无心磨精细打磨。


货号	磨口	侧支管外径mm
B331420	14/20	12.70
B331922	19/22	12.70
B332440	24/40	12.70
B332942	29/42	12.70

扫码查看，今日实时
优惠价



接头，连接，SWAGELOK®，直型

- 可与具磨砂口（外径为1/2"）的SWAGELOK®接头连接。
- 上端直管为精密研磨的直型结构，保证气密性。下端外磨口外磨口由高精度无心磨精细打磨。

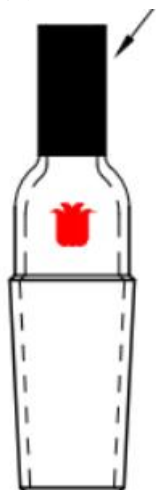

货号	磨口
A042440	24/40
A042942	29/42
A044550	45/50

扫码查看，今日实时
优惠价

接头，连接，'X'型，无水无氧

X型连接接头，可同时连接四个Schlenk容器。四个标准磨口规格一致。常用于无水无氧操作实验。

货号	磨口
A421420	14/20
A422440	24/40



扫码查看，今日实时
优惠价



接头，流量控制，玻璃节门，滴液管

上下两端可连接具磨口容器，通过玻璃旋塞进行流量控制。下端出口具内滴管设计，可将液体精准地加至下方容器，防止溶液污染磨口。

接头具2mm孔径玻璃节门，标准1:10锥度精密研磨，孔位正对齐，确保可互换。涂抹真空脂可保证密封性。接头上端内磨口由金刚砂研磨，锥度1:10经正弦规测试，保证连接的密封性。下端外磨口由无心磨精密研磨，加厚设计，不易裂开，密封性好。

货号	磨口	节门孔径(mm)
A731420G	14/20	2
A731922G	19/22	2
A732440G	24/40	2
A732942G	29/42	2
标配配件：		
S461230	可替换的1:10玻璃节门，2mm孔径	
S691230	不锈钢弹簧及卡子	



扫码查看，今日实时
优惠价



接头，流量控制，砂板，90°

- 宝塔小咀连接真空源，可控制抽气流量。
- 接头具砂板设计，可有效避免固体样品抽进真空线，污染真空源。
- 接头顶部具有90° 的通气小咀，打弯处加厚处理，壁厚均匀，避免薄点，不易破损。
- 下端外磨口由无心磨精密研磨，加厚设计，不易裂开，密封性好。



接头具2mm孔径玻璃节门，标准1:10锥度精密研磨，孔位正对齐，确保可互换。涂抹真空脂可保证密封性。

玻璃节门

货号	磨口	砂芯孔隙	价格
A751420X	14/20	G1	 扫码查看，今日实时 优惠价
A751420C	14/20	G2	
A751420M	14/20	G3	
A751922X	19/22	G1	
A751922C	19/22	G2	
A751922M	19/22	G3	
A752440X	24/40	G1	
A752440C	24/40	G2	
A752440M	24/40	G3	
A752942X	29/42	G1	
A752942C	29/42	G2	
A752942M	29/42	G3	
标配配件：			
S461230	2mm玻璃节门塞		
S691230	不锈钢弹簧及卡子		



接头具2mm孔径四氟节门设计，标准1:5锥度精密研磨，旋塞磨口抛光处理，延长四氟旋塞使用寿命，确保良好的密封性和互换性。

四氟节门

货号	磨口	砂芯空隙	价格
A381420X	14/20	G1	 扫码查看，今日实时 优惠价
A381420C	14/20	G2	
A381420M	14/20	G3	
A381922X	19/22	G1	
A381922C	19/22	G2	
A381922M	19/22	G3	
A382440X	24/40	G1	
A382440C	24/40	G2	
A382440M	24/40	G3	
A382942X	29/42	G1	
A382942C	29/42	G2	
A382942M	29/42	G3	
标配配件：			
S181125	2mm四氟节门塞		

砂芯微孔平均直径标准	
砂芯规格	砂芯平均滤孔 (μm)
G1(XC)	80-120
G2(C)	40-80
G3(M)	15-40
G4(F)	5-15

接头，流量控制，高真空节门

- 接头采用聚四氟乙烯材质包裹的高真空节门，此节门专为真空应用设计，可耐真空低至 10^{-4} Pa。具高强度螺纹及双层密封圈设计，可有效防止O型圈直接暴露于试剂中，耐腐蚀。同时，无需真空脂即可提供出色的真空密封效果及动态密封条件，同时减少试剂被真空脂污染。
- 节门杆顶部精密锥形角度设计，减少磨损，可与玻璃件紧密密封（密封状态时呈现白色密封环）。
- 具固定棒设计，强化支撑，更耐用。
- 可搭配M16系列溶剂转移装置与Schlenk管线连接进行溶剂转移操作。

货号	磨口	总高×宽度 (mm)
A391420	14/20	150×75
A391922	19/22	160×75
A392440	24/40	180×75
A392942	29/42	180×75
标配配件：		
S600004T	0-4mm高真空阀(四氟全包)	



扫码查看，今日实时优惠价



密封状态时呈现白色密封环



接头，流量控制，三通，‘T’型

- 可将接头置于反应瓶顶端，两端宝塔小咀连接胶管，用于控制进入反应体系气体或液体的流向和流量。
- 接头下端外磨口由无心磨精密研磨，加厚设计，不易裂开，密封性好。
- 节门旋塞有四氟材质和玻璃材质两种选择。



扫码查看，今日实时优惠价

四氟节门


货号	磨口	节门塞
A881420	14/20	四氟
A881922	19/22	四氟
A882440	24/40	四氟
A882942	29/42	四氟
标配配件：		
S201530	可替换的2mm具四氟T型节门	

玻璃节门

货号	磨口	节门塞
A881420G	14/20	玻璃
A881922G	19/22	玻璃
A882440G	24/40	玻璃
A882942G	29/42	玻璃
标配配件：		
S510217	T型孔玻璃塞，2mm孔径	
S691230	不锈钢弹簧及卡子	

玻璃节门：节门旋塞具2mm孔径玻璃节门，标准1:10锥度精密研磨，孔位正对齐，确保可互换。涂抹真空脂可保证密封性。

四氟节门：节门旋塞具2mm孔径四氟节门设计，标准1:5锥度精密研磨，旋塞磨口抛光处理，延长四氟旋塞使用寿命，确保良好的密封性和互换性。

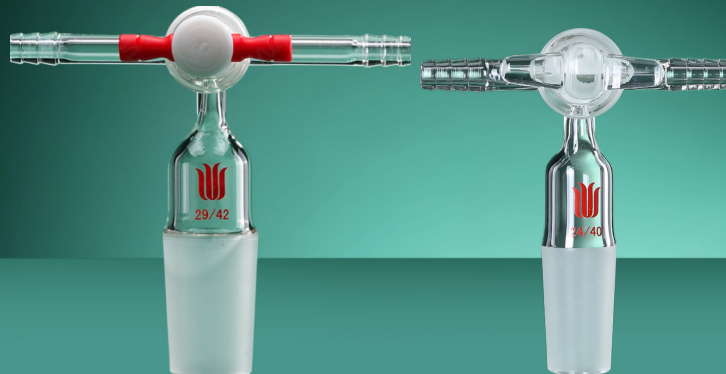

接头，流量控制，砂板，三通

- 宝塔小咀连接真空源和气源，可控制进/抽气流量。
- 接头具砂板设计，可有效避免固体样品抽进真空线，污染真空源。
- 下端外磨口由无心磨精密研磨，加厚设计，不易裂开，密封性好。

玻璃节门

节门旋塞具2mm孔径玻璃节门，标准1:10锥度精密研磨，孔位正对齐，确保可互换。涂抹真空脂可保证密封性。



货号	磨口	砂芯空隙	价格
A681420GX	14/20	G1	 扫码查看，今日实时 优惠价
A681420GC	14/20	G2	
A681420GM	14/20	G3	
A681922GX	19/22	G1	
A681922GC	19/22	G2	
A681922GM	19/22	G3	
A682440GX	24/40	G1	
A682440GC	24/40	G2	
A682440GM	24/40	G3	
A682942GX	29/42	G1	
A682942GC	29/42	G2	
A682942GM	29/42	G3	
标配配件：			
S510217	T型孔玻璃塞，2mm孔径		
S691230	不锈钢弹簧及卡子		

四氟节门

节门旋塞具2mm孔径四氟节门设计，标准1:5锥度精密研磨，旋塞磨口抛光处理，延长四氟旋塞使用寿命，确保良好的密封性和互换性。



货号	磨口	砂芯空隙	价格
A681420X	14/20	G1	 扫码查看，今日实时 优惠价
A681420C	14/20	G2	
A681420M	14/20	G3	
A681922X	19/22	G1	
A681922C	19/22	G2	
A681922M	19/22	G3	
A682440X	24/40	G1	
A682440C	24/40	G2	
A682440M	24/40	G3	
A682942X	29/42	G1	
A682942C	29/42	G2	
A682942M	29/42	G3	
标配配件：			
S201530	可替换2mm具四氟T型节门		

砂芯微孔平均直径标准	
砂芯规格	砂芯平均滤孔 (μ m)
G1(XC)	80-120
G2(C)	40-80
G3(M)	15-40
G4(F)	5-15

- 具挂钩设计，方便接头固定。
- 宝塔小咀可用软管连接至气源/真空源。
- 下端外磨口由无心磨精密研磨，加厚设计，不易裂开，连接密封性好。



接头，输入，具挂钩，90°

接头顶部具有90°的通气小咀，打弯处加厚处理，壁厚均匀，避免薄点，不易破损。

货号	磨口	小咀外径 (mm)
A921420R	14/20	8
A921922R	19/22	8
A922440R	24/40	10
A922942R	29/42	10



扫码查看，今日实时
优惠价



接头，输入，省空间式，具挂钩，90°

省空间式设计缩短了通气口与磨口间的距离。

货号	磨口	小咀外径 (mm)
A291420R	14/20	8
A291922R	19/22	8
A292440R	24/40	10
A292942R	29/42	10



扫码查看，今日实时
优惠价

接头，输入，具挂钩，直型

货号	磨口	小咀外径 (mm)
A301420R	14/20	8
A301922R	19/22	8
A302440R	24/40	10
A302942R	29/42	10



扫码查看，今日实时
优惠价



接头，输入，长颈滴管

- 长颈设计方便向较大反应容器或烧瓶底部导入气体或液体。
- 接头上端为标准锥度内磨口由金刚砂研磨，锥度1:10经正弦规测试。下端外磨口由无心磨精密研磨，保证连接的密封性。




货号	磨口	小咀外径 (mm)	下管延伸长度(mm)
B641420	14/20	8	100
B641922	19/22	8	100
B642440	24/40	10	200
B642942	29/42	10	200




扫码查看，今日实时
优惠价

接头，输入，内滴管

- 用于气体或液体的输入或连接真空源用于抽气。
- 具内滴管设计，可将气/液精准导入。
- 接头顶部具有90° 的通气小咀，打弯处加厚处理，壁厚均匀，避免薄点，不易破损。
- 下端外磨口由无心磨精密研磨，加厚设计，不易裂开，连接密封性好。

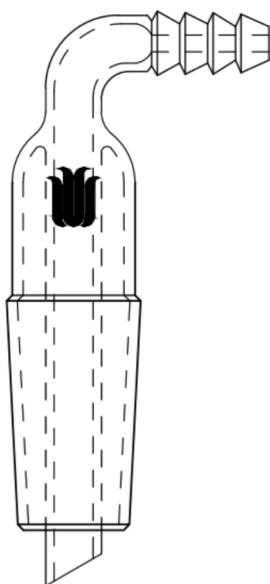

货号	磨口
A921420N	14/20
A921922N	19/22
A922440N	24/40
A922942N	29/42

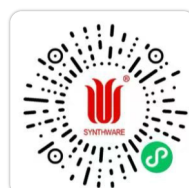

扫码查看，今日实时
优惠价


接头，输入，省空间式，导流管，90°

- 宝塔小咀连接气源，用于气体的导入。
- 磨口下具导流管设计，方便气体伸入液面以下。
- 接头外磨口由无心磨精密研磨，加厚设计，不易裂开，连接密封性好。

货号	磨口下长度(mm)	磨口
B321420	75	14/20
B321922	75	19/22
B322440	200	24/40
B322942	200	29/42



扫码查看，今日实时
优惠价

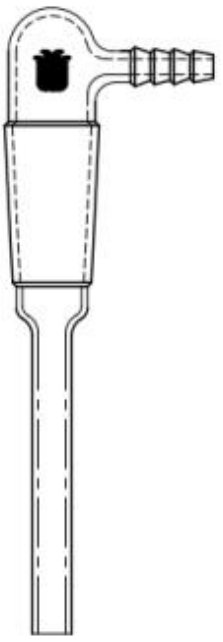


接头，输入，高真空阀，无水无氧

- 具高真空阀导气管，高真空阀门可控制气源或真空源。
- 四氟包覆高真空阀，阀门杆上具有双密封圈，可耐受真空低至 10^{-4} Pa(动态真空)，可有效防止O型圈直接暴露于试剂中，同时提供出色的密封效果。
- 接头外磨口由无心磨精密研磨，加厚设计，不易裂开，连接密封性好。

货号	产品说明
N571420	用于玻璃橄榄的配料（角度：90°），带锥形 NS14/20，从接头顶部起的管长：约 150 mm
标配配件：	
S600004T	四氟保护的高真空阀(全包)0-4mm



扫码查看，今日实时
优惠价

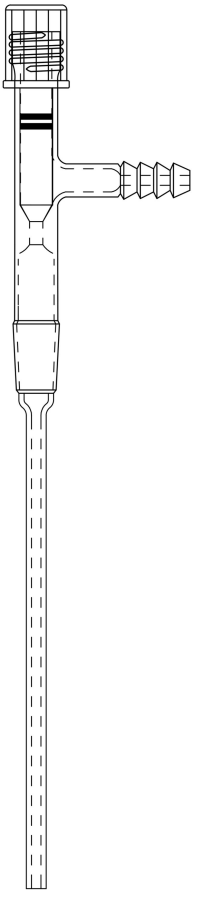

接头，旋蒸，样品瓶

接头可将欣维尔自制标准螺纹口样品瓶直接连接到旋转蒸发器上。螺纹端接头采用尼龙材质。



W2013:
20-400转13-425



W2020:
20-400转20-400



W2014:
20-400转15-425



W2024:
20-400转24-400



A981922
上磨口 19/22



A982440
上磨口 24/40



A982942
上磨口 29/42

货号	磨口	组成明细
W981922	19/22	A981922, W2013, W2014, W2020, W2024
W982440	24/40	A982440, W2013, W2014, W2020, W2024
W982942	29/42	A982942, W2013, W2014, W2020, W2024
W989442	19/22、24/40、29/42三种组合	A981922, A982440, A982942, W2013, W2014, W2020, W2024



扫码查看，今日实时
优惠价

接头，旋蒸，内螺纹口

可搭配内螺纹口的耐压瓶(如: P16, P17)进行旋转蒸发，减少样品转移损耗。标配全惰性O型圈，具有更高的防腐性。也可搭配A29将气源或真空源引入。



货号	螺纹型号	磨口
B391524	15#	24/40
B391529	15#	29/42
B392524	25#	24/40
B392529	25#	29/42

标配配件:


Q110	全惰性白色O型圈，内径9.2线径2.62mm
Q212	全惰性白色O型圈，内径21.8线径3.5mm
B100015JK	#15内螺纹具孔四氟塞子
B100025JK	#25内螺纹具孔四氟塞子



扫码查看，今日实时
优惠价

组装示意图:



下端可连接P16 P17系列耐压瓶

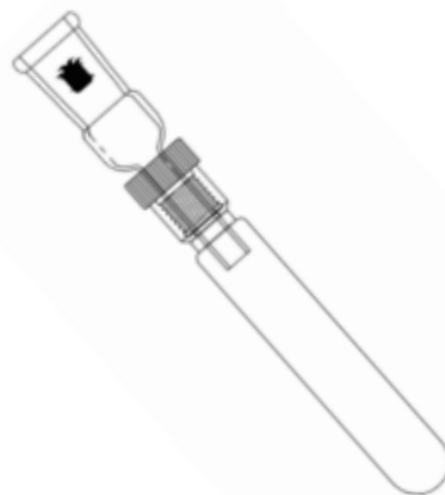

接头，旋蒸，玻璃孔板

- 可用做旋转蒸发器防溅接头，减缓起泡及爆沸的程度。
- 适用于不同标准磨口之间的转接。上端内磨口规格大，下端外磨口规格小。
- 上端内磨口由金刚砂研磨，锥度1:10经正弦规测试。下端外磨口由无心磨精密研磨，保证连接密封性。

货号	上磨口	下磨口	价格
B382414	24/40	14/20	 扫码查看，今日实时 优惠价
B382419	24/40	19/22	
B382424	24/40	24/40	
B382914	29/42	14/20	
B382919	29/42	19/22	
B382924	29/42	24/40	
B382929	29/42	29/42	

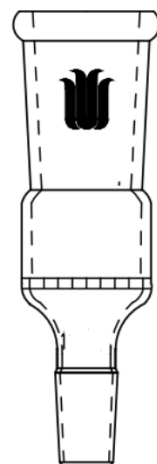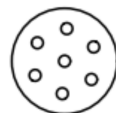

接头，采样，直型，无水无氧

- 接头顶部具翻口橡胶塞口，用于对空气敏感的体系进行采样或进样。
- 标配一个翻口橡胶塞，如需替换请单独购买。
- 接头下端外磨口由无心磨精密研磨，保证连接密封性。


货号	磨口	价格
N251420	14/20	 扫码查看，今日实时 优惠价
N251922	19/22	
N252440	24/40	
N252942	29/42	
标配配件：		
RS1305	翻口橡胶帽	



接头，采样，四氟节门，无水无氧

- 具四氟节门，顶部配有两个翻口橡胶塞口，用于进/取样对空气敏感的体系。
- 标配两个翻口橡胶塞，如需替换请单独购买。
- 接头下端外磨口由无心磨精密研磨，保证连接密封性。

货号	磨口	价格
N351420	14/20	 扫码查看，今日实时 优惠价
N351922	19/22	
N352440	24/40	
N352942	29/42	
标配配件：		
RS1305	翻口橡胶帽	
S181125	1:5直孔四氟节门塞	

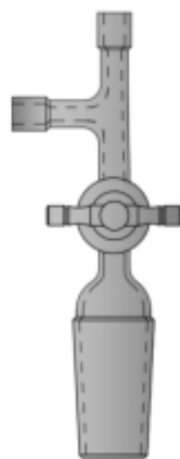

接头，采样，加料

在蒸馏装置中，将适配器插入烧瓶和冷凝器之间，通过侧口胶帽插入注射器/泵进行加料。



货号	磨口	高度mm
B532440	24/40	72
B532942	29/42	105
标配配件：		
RS1305	翻口橡胶帽	
 扫码查看，今日实时 优惠价		

接头，温度计，可调式，四氟全包O型圈，四氟节门

- 标配四氟包覆O型圈。内螺纹设计较同类型外螺纹盖密封性更好，温度计加持更牢固。
- 具2mm孔径四氟节门设计，标准1:5锥度精密研磨，旋塞磨口抛光处理，延长四氟旋塞使用寿命，确保良好的密封性和互换性。
- 具孔尼龙盖和四氟全包O型圈可确保与温度计的密封性。
- 可与外径为4.0-6.5mm的温度计，热电偶，通气管搭配使用。



货号	磨口	节门
N111420S	14/20	四氟
N111922S	19/22	四氟
N112440S	24/40	四氟
N112942S	29/42	四氟
标配配件:		
S181125	2mm四氟节门塞	
B101007QB	7#内螺纹具孔尼龙塞子，标配R015QB O型圈	
 扫码查看，今日实时 优惠价		



此接头将通气口与温度计接口二合一，可将温度计插入多口烧瓶中，监测体系温度。通过对尼龙帽的调节，调整温度计插入深度。

推荐搭配产品：

温度计		
货号	温度范围	温差
T152100	-20° to 110°	<1°
T152250	-20° to 200°	<2°



接头，温度计，可调式

- 内螺纹盖较同类型外螺纹盖密封性好，温度计夹持更牢固。
- 具孔尼龙盖和O型圈可确保其与温度计的密封性。可与外径为4.0–6.5mm的温度计，热电偶搭配使用。

标配EP材质O型圈

货号	磨口	价格
A521407	14/20	
A521907	19/22	
A522407	24/40	
A522907	29/42	
标配配件：		
B101007EP	7#内螺纹具孔盖尼龙塞子， 标配R107EP O型圈	

扫码查看，今日实时
优惠价

扫码查看，今日实时
优惠价

标配四氟包覆O型圈

货号	磨口	价格
A521407F	14/20	
A521907F	19/22	
A522407F	24/40	
A522907F	29/42	
标配配件：		
B101007QB	7#内螺纹具孔盖尼龙塞子， 标配R015QB O型圈	

扫码查看，今日实时
优惠价

选配配件：

B101007G	7#内螺纹具孔盖尼龙材质	
R015QB	O型圈,四氟全包耐腐蚀型, 内径*宽度5.88*2mm	
R107EP	O型圈,黑色EP,抗极性溶剂, 内径×宽度,5.23×2.62mm	
R107	O型圈,棕色氟橡胶, 内径×宽度,5.23×2.62mm	
Q107	O型圈,白色全惰性, 内径×宽度,5.23×2.62mm	

推荐搭配产品：

温度计		
货号	温度范围	温差
T152100	-20° to 110°	<1°
T152250	-20° to 200°	<2°



四氟包覆O型圈



EP材质O型圈



B101007G



R015QB



Q107



R107EP



R107



通过对尼龙盖的调节，调整温度计插入深度。



通过对四氟盖的调节，调整温度计插入深度。

- 标配四氟材质具孔螺纹盖，相较于尼龙材质更耐腐蚀，更耐温。
- 具孔四氟盖与Vtion O型橡胶圈可确保与温度计的密封性。
- 可与外径为5.0mm—7.5mm的温度计或通气管搭配使用。
- 底部标准锥度外磨口，由高精度无心磨制得，加厚设计，不易裂开，密封性好。

接头，温度计，可调式，四氟盖

货号	磨口	价格
A521420F	14/20	 扫码查看，今日实时 优惠价
A521922F	19/22	
A522440F	24/40	
A522942F	29/42	
标配配件：		
SF119001	全四氟具孔盖螺纹盖	
R108	棕色, O型圈, 内径*线径6*2.62	



R108EP



Q108

选配配件：

R108EP	黑色O型圈,抗极性溶剂型, 内径×宽度,6.0×2.62
Q108	全惰性白色O型圈(进口材质), 内径6线径2.62mm

推荐搭配产品：

温度计		
货号	温度范围	温差
T152100	-20° to 110°	<1°
T152250	-20° to 200°	<2°

通气导管	
货号	描述
T157265	7*265
T151922	7*268



温度计




通气导管

- 接头整体四氟材质，更耐温，耐腐蚀。
- 具孔盖尼龙帽和Viton O型圈可确保与温度计的密封性。通过对尼龙盖的调节，调整温度计插入深度。
- 可与外径为5.0–7.5mm的温度计或通气管搭配使用。

接头，温度计，PTFE


货号	规格	价格
S921420	14/20	 扫码查看，今日实时 优惠价
S921922	19/22	
S922440	24/40	
S922942	29/42	
标配配件：		
RC009	具孔盖,尼龙,13mm具孔盖螺纹盖	
R108	棕色, O型圈,内径*线径 6*2.62	

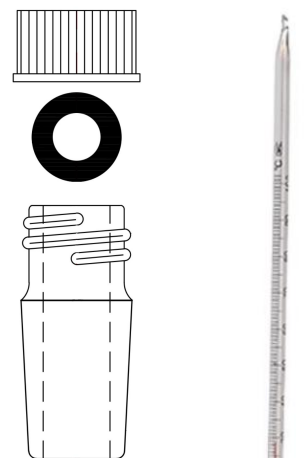

接头，温度计，PTFE，四氟环

四氟接头外磨口具双层四氟环设计，可增加四氟接头与玻璃件密封性。

货号	规格	价格
S931420	14/20	 扫码查看，今日实时 优惠价
S931922	19/22	
S932440	24/40	
S932942	29/42	
标配配件：		
RC009	具孔盖,尼龙,13mm具孔盖螺纹盖	
R108	棕色, O型圈,内径*线径 6*2.62	

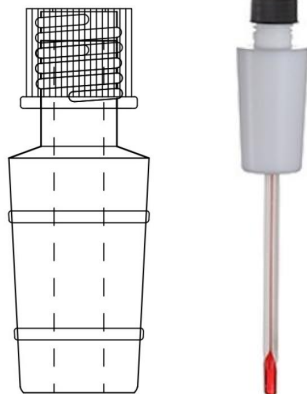

选配配件：

R108EP	黑色O型圈,抗极性溶剂型,内径×宽度,6.0×2.62
Q108	全惰性白色O型圈(进口材质),内径6线径2.62mm



R108EP



Q108

推荐搭配产品：

温度计		
货号	温度范围	温差
T152100	-20° to 110°	<1°
T152250	-20° to 200°	<2°

通气导管	
货号	描述
T157265	7*265
T151922	7*268




温度计



通气导管

接头，热电偶

- 底部管径缩小，可将热电偶固定，避免与搅拌浆发生碰撞。
- 该产品可与外径为5.0-6.0mm的热电偶配用。

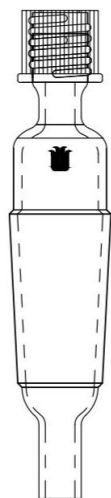

货号	磨口	价格
B631420	14/20	 扫码查看，今日实时 优惠价
B631922	19/22	
B632440	24/40	
B632942	29/42	
标配配件：		
RC009	具孔盖,尼龙,13mm具孔盖螺纹盖	
R108	棕色, O型圈,内径*线径 6*2.62	



R108EP



Q108

选配配件：


R108EP	黑色O型圈,抗极性溶剂型, 内径×宽度,6.0×2.62
Q108	全惰性白色O型圈(进口材质), 内径6线径2.62mm

接头，转移，四氟节门

具刻度滴球型分液漏斗,容量为50ml。可用于溶剂添加。

货号	磨口	容量	节门
N102450S	24/40	50ml	四氟
标配配件：			
S181125	2mm四氟节门塞		
 扫码查看，今日实时 优惠价			

刻度精准，激光标定，
耐磨，不变色。

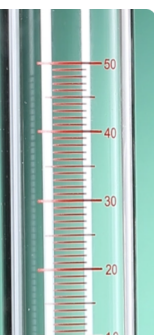

- 可连接真空源用做抽气接头。可将常压蒸馏头改为减压蒸馏头。
- 抽滤接头上端内磨口由金刚砂研磨，锥度1:10经正弦规测试。下端外磨口由高精度无心磨制得，加厚设计，不易裂开，密封性好。

接头，真空，四氟节门

接头具2mm孔径四氟节门设计，标准1:5锥度精密研磨，旋塞磨口抛光处理，延长四氟旋塞使用寿命，确保良好的密封性和互换性。

货号	磨口	小咀外径	节门塞	价格
A741420	14/20	8mm	四氟	 扫码查看，今日实时 优惠价
A741922	19/22	8mm	四氟	
A742440	24/40	10mm	四氟	
A742942	29/42	10mm	四氟	
标配配件：				
S181125	可替换的2mm四氟节门塞			



接头，真空，玻璃节门

接头具2mm孔径玻璃节门，标准1:10锥度精密研磨，孔位正对齐，确保可互换。涂抹真空脂可保证密封性。


货号	磨口	小咀外径	节门塞	价格
A741420G	14/20	8mm	玻璃	 扫码查看，今日实时 优惠价
A741922G	19/22	8mm	玻璃	
A742440G	24/40	10mm	玻璃	
A742942G	29/42	10mm	玻璃	
标配配件：				
S461230	可替换的1:10玻璃节门，2mm孔径			
S691230	不锈钢弹簧及卡子			



接头，真空，四氟节门，胶塞口

- 可连接真空源，搭配布氏漏斗用于真空过滤操作。
- 抽滤接头具2mm孔径四氟节门设计，标准1:5锥度精密研磨，旋塞磨口抛光处理，延长四氟旋塞使用寿命，确保良好的密封性和互换性。


货号	磨口	节门孔径	价格
B671420	14/20	2mm	 扫码查看，今日实时 优惠价
B671922	19/22	2mm	
B672440	24/40	2mm	
B672942	29/42	2mm	
标配配件：			
S181125	1:5直孔四氟节门塞		

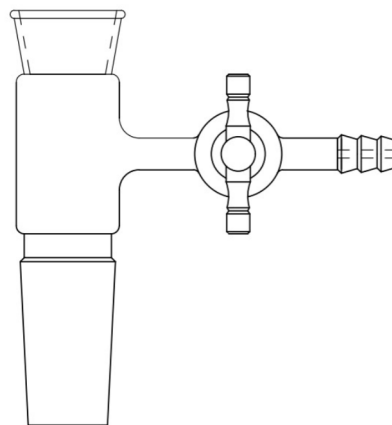

接头，连接，玻璃节门，无水无氧

- 接头支管宝塔小咀可连接气源或真空源，用于空气敏感体系的物料转移，也可做抽滤接头使用。
- 接头具2mm孔径玻璃节门，标准1:10锥度精密研磨，孔位正对齐，确保可互换。涂抹真空脂可保证密封性。
- 接头上端内磨口由金刚砂研磨，锥度1:10经正弦规测试，保证连接的密封性。下端外磨口由无心磨精密研磨，加厚设计，不易裂开，密封性好。

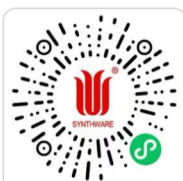

货号	磨口	价格
A191414G	14/20	 扫码查看，今日实时 优惠价
A191919G	19/22	
A192424G	24/40	
A192942G	29/42	
标配配件：		
S461230	可替换的1:10玻璃节门, 2mm孔径	
S691230	不锈钢弹簧及卡子	

组装搭配示意图：

F694250	反应管,外磨口24/40,玻璃节门
A192424G	接头,具玻璃节门,磨口:24/40
F484500	溶剂存储转移球瓶,磨口:24/40

