

连续提取器，索氏，蛇型，套装


索氏提取器（脂肪提取器）标配蛇型冷凝器，蛇型内管由特殊工装制得，确保螺旋间距一致，冷却均匀。外循环液从冷凝器底部进，从顶部出。冷凝夹层延伸至磨口底部，可有效防止长时间加热回流导致磨口互相锁死。



扫码查看，今日实时
优惠价

组成描述：

货号：	ZH112534C	ZH112534X	ZH113545C	ZH113545X	ZH114555C	ZH114555X
抽提套管：	小号，孔隙度C	小号，孔隙度XC	中号，孔隙度C	中号，孔隙度XC	大号，孔隙度C	大号，孔隙度XC
蛇型冷凝器磨口：	34/45	34/45	45/50	45/50	55/50	55/50
蛇型冷凝器高度(mm)：	275	275	365	365	405	405
脂肪提取器上磨口：	34/45	34/45	45/50	45/50	55/50	55/50
单口平底烧瓶容量(ml)：	500	500	1000	1000	1000	1000
磨口塑料夹：	24/40	24/40	24/40	24/40	24/40	24/40

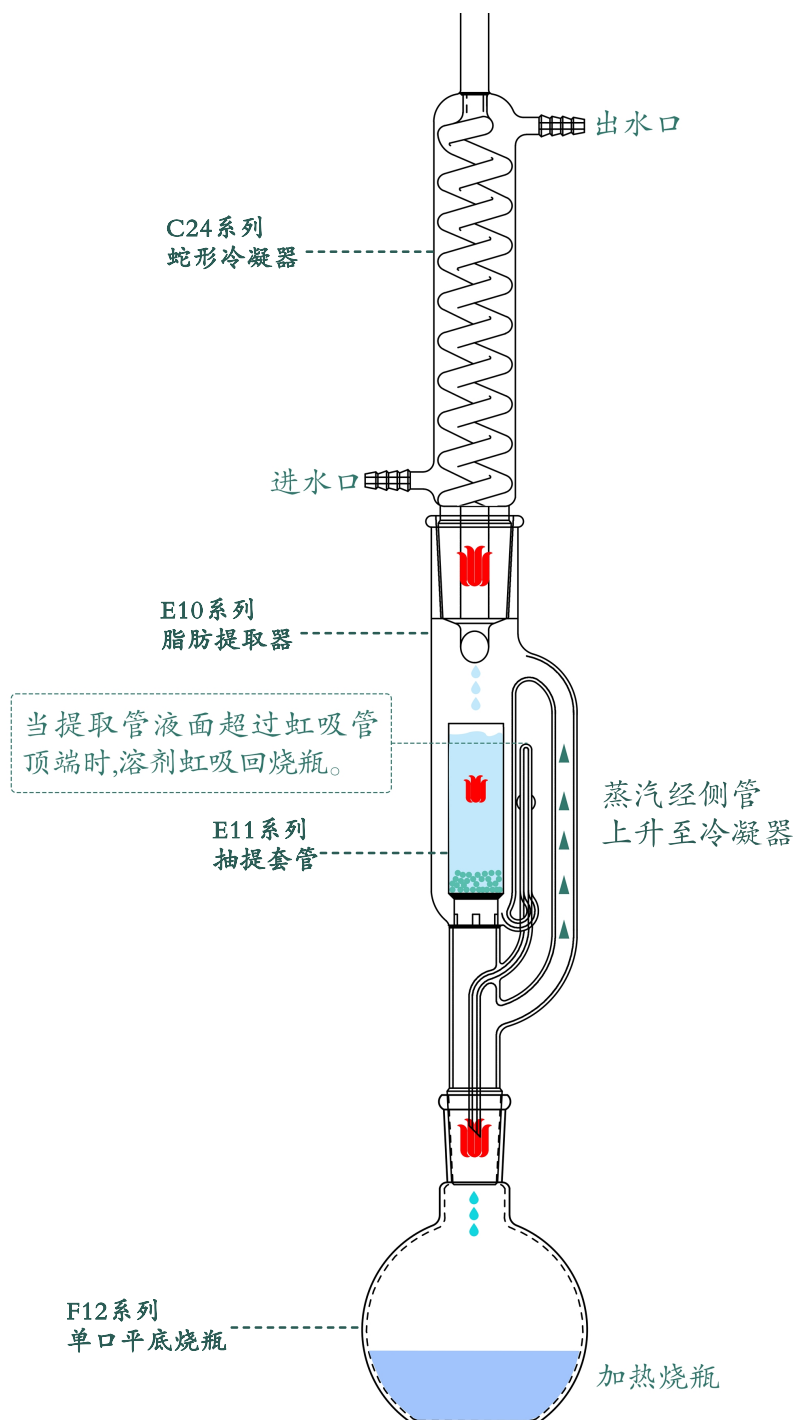

选配配件：

E112585C	抽提套管，小号，孔隙度C
E112585X	抽提套管，小号，孔隙度XC
E113590C	抽提套管，中号，孔隙度C
E113590X	抽提套管，中号，孔隙度XC
E114513C	抽提套管，大号，孔隙度C
E114513X	抽提套管，大号，孔隙度XC
C243445S	蛇型冷凝器，34/45，高度275mm
C244500S	蛇型冷凝器，45/50，高度365mm
C245550S	蛇型冷凝器，55/50，高度405mm
E103424	脂肪提取器，上磨口34/45，下磨口24/40
E104524	脂肪提取器，上磨口45/50，下磨口24/40
E105550	脂肪提取器，上磨口55/50，下磨口24/40
F124500	单口平底烧瓶，500mL，24/40
F124000	单口平底烧瓶，1000mL，24/40
CS002440	磨口塑料夹，24/40
CS003445	磨口塑料夹，34/45 (需单独购买)
CS004550	磨口塑料夹，45/50 (需单独购买)

