

- 烧瓶顶部内磨口由金刚砂精密研磨，锥度1:10经正弦规测试，保证密封性。
- 旋蒸专用茄型烧瓶，同心度低于0.5mm，旋转稳定，不偏摆。适用于旋转蒸发仪。
- 瓶身外部选用进口镀膜材料包覆，从而有效避免旋蒸过程中发生爆裂的危险，有效提高实验安全系数。
- 瓶身壁厚高强度设计，使用3.3高硼硅玻璃管，经特殊工艺（数控机床等）制得，非大炉吹制，以达到瓶身厚实且均匀，结实耐用。



旋蒸烧瓶，薄壁，茄型

货号	容量 (mL)	磨口	价格
F311100XZ-B	100	14/20	
F319100XZ-B	100	19/22	
F314100XZ-B	100	24/40	
F318100XZ-B	100	29/42	
F311200XZ-B	200	14/20	
F319200XZ-B	200	19/22	
F314200XZ-B	200	24/40	
F318200XZ-B	200	29/42	
F311250XZ-B	250	14/20	
F319250XZ-B	250	19/22	
F314250XZ-B	250	24/40	
F318250XZ-B	250	29/42	
F314500XZ-B	500	24/40	
F318500XZ-B	500	29/42	
F314000XZ-B	1000	24/40	
F31291LXZ-B	1000	29/42	
F31242LXZ-B	2000	24/40	
F31292LXZ-B	2000	29/42	



扫码查看，今日实时
优惠价

旋蒸烧瓶，厚壁高强度，镀膜，茄型

货号	容量 (mL)	磨口	价格
F311100XD-B	100	14/20	
F319100XD-B	100	19/22	
F314100XD-B	100	24/40	
F318100XD-B	100	29/42	
F311200XD-B	200	14/20	
F319200XD-B	200	19/22	
F314200XD-B	200	24/40	
F318200XD-B	200	29/42	
F311250XD-B	250	14/20	
F319250XD-B	250	19/22	
F314250XD-B	250	24/40	
F318250XD-B	250	29/42	
F314500XD-B	500	24/40	
F318500XD-B	500	29/42	
F314000XD-B	1000	24/40	
F31291LXD-B	1000	29/42	
F31242LXD-B	2000	24/40	
F31292LXD-B	2000	29/42	



扫码查看，今日实时
优惠价

使用提示：

由于镀膜产品材料特性，使用后会出现表面发黄或不平整褶皱等情况，但并不影响使用效果。且镀膜产品需要在 - 40℃至80℃(融化温度：90° -100°) 之间使用，不可用于高温灭菌，微波或烘箱，过高温会导致镀膜融化。

浓缩瓶，梨型，刻度

- 浓缩瓶，瓶身厚壁高强度设计，使用3.3高硼硅玻璃管，经特殊工艺(数控机床等)制得，非大炉吹制，以达到瓶身厚实且均匀，结实耐用。可用作Kuderna-Danish浓缩瓶。
- 瓶身底部细管具刻度，可直接在浓缩后读取读数，避免浓缩液因转移造成损失。

货号	磨口	球瓶容量mL	浓缩管容量mL	最小分度值mL
N321910-1	19/22	10	1	0.1
N321925-1	19/22	25	1	0.1
N321950-1	19/22	50	1	0.1
N322450-1	24/40	50	1	0.1
N324100-1	24/40	100	1	0.1
N324250-1	24/40	250	1	0.1
N322450-2	24/40	50	2	0.1
N324100-2	24/40	100	2	0.1
N324250-2	24/40	250	2	0.1



扫码查看，今日实时
优惠价



防泡沫球，茄型

- 防泡沫球，同心度低于0.5mm，旋转稳定，不偏摆。适用于旋转蒸发仪，溶剂蒸汽从内管上的两个相对的孔快速流出，同时防止产生的泡沫进入冷凝器中污染冷凝器及真空线。
- 防泡沫球整体厚壁高强度设计，可在负压条件下连续使用，也适用于减压蒸馏操作。

产品出厂前同心度逐一检测，
如有质量问题包退包换。

货号	上磨口	下磨口	容量(mL)	价格
E272414	24/40	14/20	100	
E272419	24/40	19/22	100	
E274100	24/40	24/40	100	
E272914	29/42	14/20	100	
E272919	29/42	19/22	100	
E272924	29/42	24/40	100	
E272929	29/42	29/42	100	
E272150	24/40	14/20	250	
E272950	24/40	19/22	250	
E274250	24/40	24/40	250	
E279150	29/42	14/20	250	
E279250	29/42	19/22	250	
E279450	29/42	24/40	250	



扫码查看，今日实时
优惠价



接头，旋蒸，样品瓶

接头可将欣维尔自制标准螺纹口样品瓶直接连接到旋转蒸发器上。螺纹端接头采用尼龙材质。



W2013:
20-400转13-425



W2020:
20-400转20-400



W2014:
20-400转15-425



W2024:
20-400转24-400



A981922
上磨口 19/22



A982440
上磨口 24/40



A982942
上磨口 29/42

货号	磨口	组成明细
W981922	19/22	A981922, W2013, W2014, W2020, W2024
W982440	24/40	A982440, W2013, W2014, W2020, W2024
W982942	29/42	A982942, W2013, W2014, W2020, W2024
W989442	19/22、24/40、29/42三种组合	A981922, A982440, A982942, W2013, W2014, W2020, W2024



扫码查看，今日实时
优惠价

接头，旋蒸，内螺纹口

可搭配内螺纹口的耐压瓶(如: P16, P17)进行旋转蒸发，减少样品转移损耗。标配有全惰性O型圈，具有更高的防腐性。也可搭配A29将气源或真空源引入。



货号	螺纹型号	磨口
B391524	15#	24/40
B391529	15#	29/42
B392524	25#	24/40
B392529	25#	29/42

标配配件:


Q110	全惰性白色O型圈，内径9.2线径2.62mm
Q212	全惰性白色O型圈，内径21.8线径3.5mm
B100015JK	#15内螺纹具孔四氟塞子
B100025JK	#25内螺纹具孔四氟塞子



扫码查看，今日实时
优惠价

组装示意图:

下端可连接P16 P17系列耐压瓶

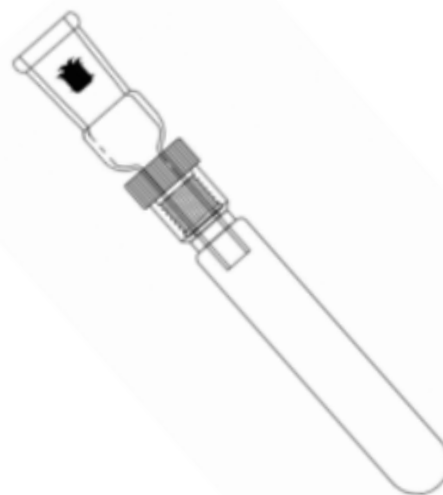

接头，旋蒸，钳口

聚四氟乙烯材质的钳口旋蒸接头，上端可与旋蒸接口或防溅球磨口连接，下端可匹配20mm钳口瓶，如：F82-Y/J系列微波反应管及欣维尔自制钳口样品瓶(X33系列，X48系列)。

货号	上磨口
W221922	19/22
W222440	24/40
W222942	29/42



扫码查看，今日实时优惠价



- 总长度保持在最低限度，在旋蒸时可以达到最佳的旋转同心度，防止蒸发瓶出现严重偏摆。
- 也可放置在蒸馏瓶和分馏柱之间，防止突沸。

接头，旋蒸，防溅

货号	上磨口	下磨口
N102414	24/40	14/20
N102419	24/40	19/22
N102424	24/40	24/40
N102924	29/42	24/40



扫码查看，今日实时优惠价

接头，旋蒸，防溅，砂板

货号	上磨口	下磨口
N122414	24/40	14/20
N122419	24/40	19/22
N122424	24/40	24/40
N122924	29/42	24/40



扫码查看，今日实时优惠价



带EC (G1) 砂板，防止旋蒸时蒸发瓶内液体或固体进入旋蒸仪内。



蒸汽管，BUCHI，不包括Combi-Clip

适配于Buchi的旋转蒸发仪。蒸汽管经特殊加工工艺适合其特定的旋转蒸发仪，偏摆度，圆度均达到原厂配件要求。中间部分具GL螺纹可与Combi-Clip一起使用（注：本品不含Combi-Clip）。如需定制BUCHI品牌其他型号的蒸汽管请联系定制部。



货号	磨口	试用旋转蒸发仪
V222932BQ	29/32	步琦



扫码查看，今日实时
优惠价