

漏斗，厚壁，加料，偏移58°




货号	上部直径 (mm)	磨口	价格
N261465	65	14/20	
N261477	77	14/20	
N261497	97	14/20	
N261965	65	19/22	
N261977	77	19/22	
N261997	97	19/22	
N262465	65	24/40	
N262477	77	24/40	
N262497	97	24/40	
N262965	65	29/42	
N262977	77	29/42	
N262997	97	29/42	



扫码查看，今日实时
优惠价

推荐搭配组装产品：

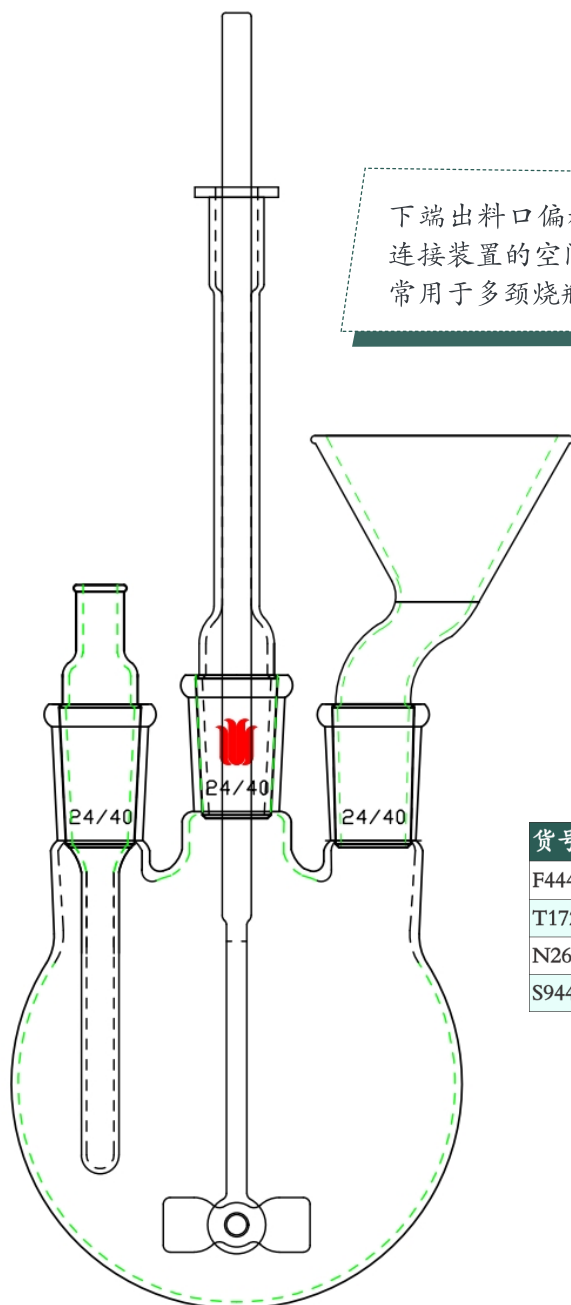

下端出料口偏移58° 设计，可有效解决多口反应釜/瓶顶部连接装置的空间限制问题，避免与旁边其他装置发生冲突。常用于多颈烧瓶或反应釜的固体物料添加操作中。

货号	描述
F444500	直三口球瓶,厚壁高强度,中间磨口:24/40,侧磨口:24/40
T172407	温度计套管,磨口: 24/40,匹配500ml球瓶
N262477	具磨口加料漏斗, 58° 偏置, 磨口: 24/40
S944507	一片式玻璃搅拌桨, 外径7mm, 适配500ml反应瓶,

漏斗，厚壁，固体加料，内磨口

具内磨口设计，常用于手套箱操作中的固体加料，可与F69系列反应管搭配使用。

推荐搭配产品：F69系列 反应瓶



扫码查看，今日实时
优惠价



漏斗壁厚在2mm以上，
漏斗壁的倾斜度约为60°

货号	上部直径 (mm)	磨口	价格
L171950	50	19/22	
L172450	50	24/40	
L172950	50	29/42	
L171975	75	19/22	
L172475	75	24/40	
L172975	75	29/42	
L179100	100	19/22	
L174100	100	24/40	
L178100	100	29/42	



扫码查看，今日实时
优惠价

漏斗，样品瓶，PTFE

漏斗由聚四氟乙烯材质制得，漏斗底部具螺纹设计可以连接到具有GPI螺纹的样品瓶上。

可以轻松、安全地将样品转移至螺纹口样品瓶中。适配欣维尔系列样品瓶。



组
装
效
果



货号	上口外径mm	下端螺纹型号	价格
L200825	25	8-425	
L200925	25	9-425	
L201335	35	13-42	
L201535	35	15-425	
L201850	50	18-400	
L202050	50	20-400	
L202450	50	24-400	



扫码查看，今日实时
优惠价

根据国标GB/T5508-2011《粮油检验 粉类粮食含砂量测定》设计制造，用于测定粉类粮食中所含的无机沙尘的量。

漏斗类



图片仅供参考，具体规格型号请根据品名描述选购

漏斗，薄壁，细砂分离，玻璃节门

货号	上口外径mm	节门
L742480G	80	玻璃
L742490G	90	玻璃
L744100G	100	玻璃
标配配件：		
S461230	2mm玻璃节门塞	
S691230	玻璃单通节门弹簧及卡子用于2mm玻璃节门	



扫码查看，今日实时
优惠价



图片仅供参考，具体规格型号请根据品名描述选购。

漏斗，薄壁，细砂分离，四氟节门

货号	上口外径mm	节门
L742480S	80	四氟
L742490S	90	四氟
L744100S	100	四氟
标配配件：		
S181125	2mm具四氟节门塞	



扫码查看，今日实时
优惠价

漏斗，高硼硅，薄壁，出液口斜切45°

- 高硼硅漏斗，良好的耐温，耐腐蚀特性。薄壁做工，使用起来更加轻便。
- 出液口斜切45°设计，液体会优先从斜口尖端滴下，使液体流出顺畅，稳定。同时，相较于平口，更容易插入窄小的容器口，操作更方便。
- 适用于液体加料。配合滤纸使用时，可用于常压过滤，热过滤。

短颈

货号	上口外径 mm	规格	下管外径 mm	下管长度 mm	价格
F740040	40	短颈	6	40	 扫码查看，今日实时 优惠价
F740050	50	短颈	7	50	
F740060	60	短颈	8	60	
F740075	75	短颈	8	75	
F740080	80	短颈	10	80	
F740090	90	短颈	11	90	
F740100	100	短颈	12	100	
F740120	120	短颈	13	120	
F740150	150	短颈	15	150	
F740180	180	短颈	15	180	



长颈

货号	上口外径 mm	规格	下管外径 mm	下管长度 mm	价格
F740040L	40	长颈	5	150	 扫码查看，今日实时 优惠价
F740050L	50	长颈	7	155	
F740060L	60	长颈	7	157	
F740075L	75	长颈	9	157	
F740080L	80	长颈	10	150	
F740090L	90	长颈	11	155	
F740100L	100	长颈	12	157	
F740120L	120	长颈	14	182	
F740150L	150	长颈	18	225	



漏斗, PP

常用于试剂的转移, 过滤, 加液, 分装等。聚丙烯材质耐大部分化学试剂。相较于玻璃材质, 聚丙烯漏斗更加轻便, 便于拿取, 耐摔不易破碎。漏斗表面光滑, 表面疏水, 不挂水液体流动更顺畅, 残留少。

长颈

货号	漏斗直径mm	下支管外径*长度mm
L180060	60	7*52
L180075	75	10*86
L180090	90	9*103



扫码查看, 今日实时
优惠价



短颈

货号	漏斗直径mm	下支管外径*长度mm
L190050	50	8*30
L190060	60	11*27
L190100	100	14*46
L190120	120	21*46
L190150	150	21*43



扫码查看, 今日实时
优惠价




分液漏斗, 梨型, 可拆卸PTFE滴头



聚四氟乙烯材质磨口塞,
耐腐蚀。

货号	容量mL	磨口	节门mm	价格
L474125	125	24/40	2	
L474250	250	24/40	4	
L474500	500	24/40	4	
L474000	1000	24/40	4	
标配配件:				
S532440	四氟塞子, 具尼龙螺母, 24/40			
S181125	2mm四氟节门塞子			
S181530	4mm四氟节门塞子			
B100007Z	7#内螺纹抽气小咀			

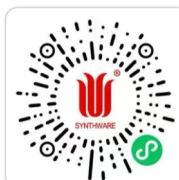

扫码查看, 今日实时
优惠价

可拆卸聚四氟乙烯滴头设计, 可有效避免玻璃滴头碰撞后的破损问题, 以及便于清洁和更换。四氟滴头配有O型圈螺纹设计即可保证与玻璃件的密封。

分液漏斗，梨型，玻璃节门，PP塞

- 常用于液-液分离，萃取和洗涤等实验操作。漏斗顶部标配PP材质磨口塞。
- 漏斗底部具玻璃节门，标准1:10锥度精密研磨，孔位正对齐，确保可互换。涂抹真空脂以保证密封和转动顺畅。

货号	容量 (mL)	磨口	四氟节门(mm)	价格
F471010AP	10	14/23	2	
F479010AP	10	19/26	2	
F471025AP	25	14/23	2	
F479025AP	25	19/26	2	
F471050AP	50	14/23	2	
F479050AP	50	19/26	2	
F471100AP	100	14/23	2	
F479100AP	100	19/26	2	
F471125AP	125	14/23	2	
F479125AP	125	19/26	2	
F474125AP	125	24/29	2	
F479250AP	250	19/26	4	
F474250AP	250	24/29	4	
F472925AP	250	29/32	4	
F474500AP	500	24/29	4	
F472950AP	500	29/32	4	
F474000AP	1000	24/29	4	
F478000AP	1000	29/32	4	
F47242LAP	2000	24/29	4	
F47292LAP	2000	29/32	4	
F47243LAP	3000	24/29	4	
F47293LAP	3000	29/32	4	
F47245LAP	5000	24/29	4	
F47295LAP	5000	29/32	4	
标配配件:				
S461230	2mm玻璃节门塞			
S461740	4mm玻璃节门塞			
S691230	玻璃单通节门弹簧及卡子用于2mm玻璃节门			
S691740	玻璃单通节门弹簧及卡子用于4mm玻璃节门			
SL1423	14/23 pp塑料材质口塞			
SL1926	19/26 pp塑料材质口塞			
SL2429	24/29 pp塑料材质口塞			
SL2932	29/32 pp塑料材质口塞			



扫码查看，今日实时
优惠价



注意事项：在混合震荡操作中，由于漏斗内部会产生蒸汽压，必须及时排气。将漏斗颈向上倾斜，朝向无人且无火源方向，缓慢打开活塞，释放压力。防止瓶塞喷出造成危险。

推荐搭配产品：



W61系列，
带顶丝支撑环



W62系列，
直杆支撑环

分液漏斗，梨型，四氟节门，PP塞

- 常用于液-液分离，萃取和洗涤等实验操作。漏斗顶部标配PP材质磨口塞。
- 漏斗底部具四氟节门，标准1:5锥度精密研磨，旋塞磨口抛光处理, 延长四氟旋塞使用寿命, 确保良好的密封性和互换性。



货号	容量 (mL)	磨口	四氟节门(mm)	价格
F471010P	10	14/23	2	
F479010P	10	19/26	2	
F471025P	25	14/23	2	
F479025P	25	19/26	2	
F471050P	50	14/23	2	
F479050P	50	19/26	2	
F471100P	100	14/23	2	
F479100P	100	19/26	2	
F471125P	125	14/23	2	
F479125P	125	19/26	2	
F474125P	125	24/29	2	
F479250P	250	19/26	4	
F474250P	250	24/29	4	
F472925P	250	29/32	4	
F474500P	500	24/29	4	
F472950P	500	29/32	4	
F474000P	1000	24/29	4	
F478000P	1000	29/32	4	
F47242LP	2000	24/29	4	
F47292LP	2000	29/32	4	
F47243LP	3000	24/29	4	
F47293LP	3000	29/32	4	
F47245LP	5000	24/29	4	
F47295LP	5000	29/32	4	
标配配件:				
S181125	2mm四氟节门塞			
S181530	4mm四氟节门塞			
SL1423	14/23 pp塑料材质口塞			
SL1926	19/26 pp塑料材质口塞			
SL2429	24/29 pp塑料材质口塞			
SL2932	29/32 pp塑料材质口塞			



扫码查看，今日实时
优惠价

注意事项：在混合震荡操作中，由于漏斗内部会产生蒸汽压，必须及时排气。将漏斗颈向上倾斜，朝向无人且无火源方向，缓慢打开活塞，释放压力。防止瓶塞喷出造成危险。

推荐搭配产品:



W61系列，
带顶丝支撑环



W62系列，
直杆支撑环

分液漏斗，球型，四氟节门

具长颈设计，便于分层观察，同时操作时更容易抓握，用爪夹或支撑环固定时，更易夹紧固定。较常规锥形分液漏斗更经济实惠。

空心玻璃塞

货号	容量 (mL)	磨口	四氟节门 (mm)	顶端塞子	价格
F687500A	500	27#	4	空心玻璃塞	 扫码查看，今日实时 优惠价
F687000A	1000	27#	4	空心玻璃塞	
F68272LA	2000	27#	4	空心玻璃塞	
F68383LA	3000	38#	4	空心玻璃塞	
F68385LA	5000	38#	6	空心玻璃塞	
标配配件：					
S400038	玻璃塞,空心,#38				
S400027	玻璃塞,空心,#27				
S181530	4mm四氟节门塞				
S181635	6mm四氟节门塞				



具四氟乙烯塞

货号	容量 (mL)	磨口	四氟节门 (mm)	顶端塞子	价格
F687500	500	27#	4	四氟	 扫码查看，今日实时 优惠价
F687000	1000	27#	4	四氟	
F68272L	2000	27#	4	四氟	
F68383L	3000	38#	4	四氟	
F68385L	5000	38#	6	四氟	
标配配件：					
S120027	27#四氟塞				
S120038	38#四氟塞				
S181530	4mm四氟节门塞				
S181635	6mm四氟节门塞				



分液漏斗升级新发现：
这些小细节你注意到了吗？



扫码观看 视频讲解



手持更稳定，固定更牢靠

- 刻度激光标定，精准性高于普通注射器。可以进行精准计量的加液。
- 可以利用双针头法与溶液转针头搭配使用进行空气敏感的液体定量转移。
- 压力平衡支管可有效调节加料漏斗与反应瓶间的压差，保证物料顺利滴入反应容器中。

加料漏斗，液体，恒压，激光刻度，四氟节门



货号	容量 (mL)	磨口	节门 (mm)	价格
N621410	10	14/20	2	
N621425	25	14/20	2	
N621925	25	19/22	2	
N622425	25	24/40	2	
N621460	60	14/20	2	
N621960	60	19/22	2	
N622460	60	24/40	2	
N621125	125	14/20	2	
N629125	125	19/22	2	
N624125	125	24/40	2	
N629250	250	19/22	2	
N624250	250	24/40	2	
N624500	500	24/40	4	
N628500	500	29/42	4	
N62241L	1000	24/40	4	
N62291L	1000	29/42	4	
标配配件:				
S181125	2mm具四氟节门塞			
S181530	4mm具四氟节门塞			



扫码查看，今日实时
优惠价

加料漏斗，液体，恒压，激光刻度，玻璃节门，无水无氧




货号	容量 (mL)	磨口	节门 (mm)	价格
N621410G	10	14/20	2	
N621425G	25	14/20	2	
N621925G	25	19/22	2	
N622425G	25	24/40	2	
N621460G	60	14/20	2	
N621960G	60	19/22	2	
N622460G	60	24/40	2	
N621125G	125	14/20	2	
N629125G	125	19/22	2	
N624125G	125	24/40	2	
N629250G	250	19/22	2	
N624250G	250	24/40	2	
N624500G	500	24/40	4	
N628500G	500	29/42	4	
N62241LG	1000	24/40	4	
N62291LG	1000	29/42	4	
标配配件:				
S461230	2mm玻璃节门塞			
S461740	4mm玻璃节门塞			
S691230	不锈钢弹簧及夹子,12/30			
S691740	不锈钢弹簧及夹子,17/40			



扫码查看，今日实时
优惠价

推荐搭配组装产品：双针头法转移装置

货号	描述
B250005	防倒吸鼓泡器
C232440X	新型球冷芯，高效冷却器,24/40,有效长:330mm
N624250	高精度激光刻度恒压滴液漏斗,250mL,24/40
F444500	直三口球瓶,厚壁高强度,中间磨口:24/40,侧磨口:24/40
C701636	双头溶剂转移输液针头,不锈钢, #16
S962415-8	玻璃搅拌桨，一片式搅拌叶，直径8mm
S944508	一片式玻璃搅拌桨，外径8mm，适配500ml反应瓶，

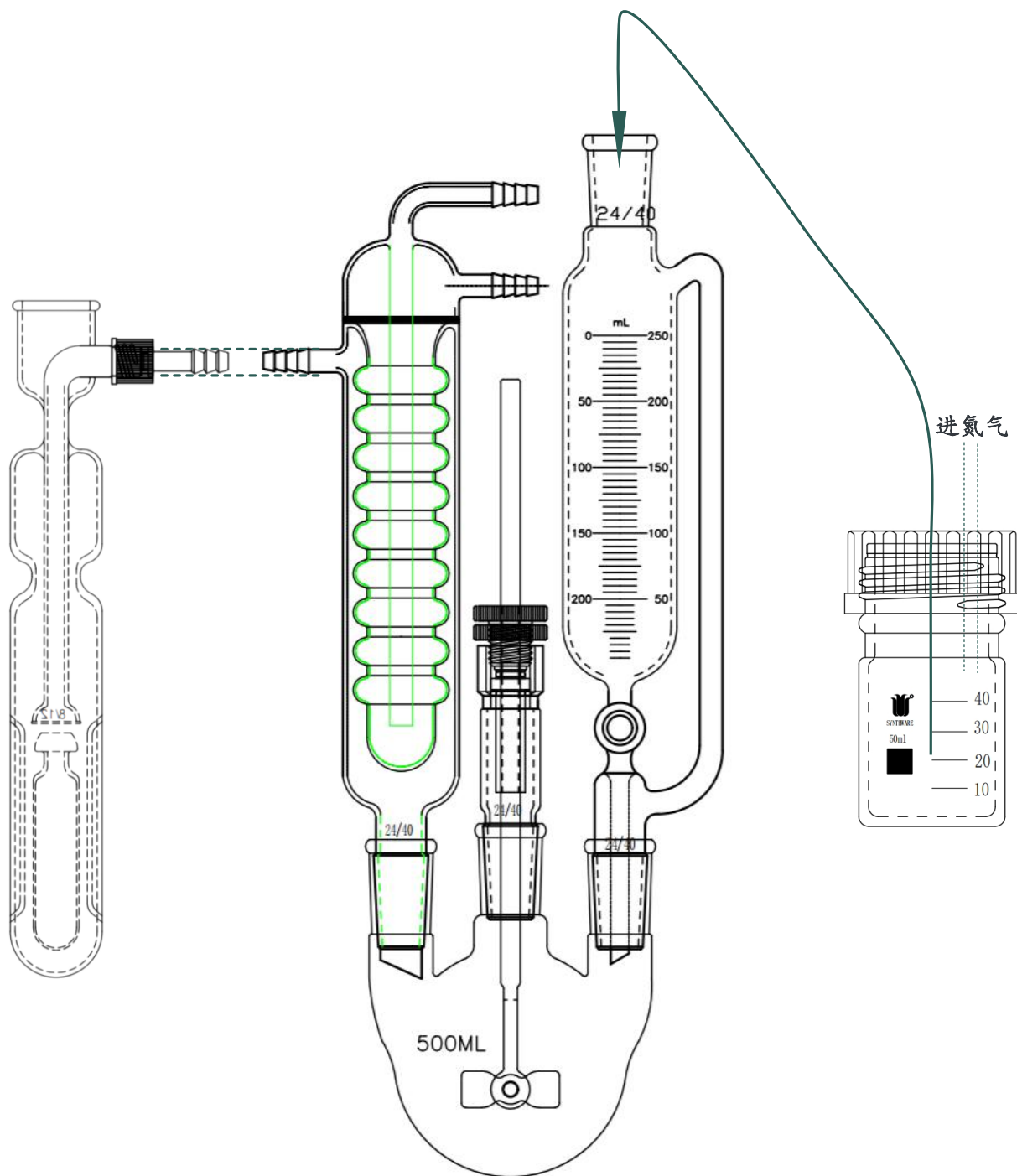



加料漏斗，固体，刻度，调压旋塞

货号	容量mL	磨口
B494100	100	24/40-19/38
B494250	250	24/40-19/38
B494500	500	24/40-19/38
标配配件：		
S870001	四氟螺旋杆送料阀	
S881938	19/38口塞	




扫码查看，今日实时
优惠价



加料漏斗，固体

货号	容量mL	磨口
B694100	100	24/40
B694250	250	24/40
B694500	500	24/40
标配配件：		
S870001	四氟螺旋杆送料阀	

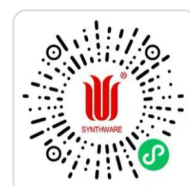


扫码查看，今日实时
优惠价

- 可用于固体粉末加料至反应体系中。易于拆卸的四氟螺旋输送阀可均匀地将粉末输送至反应体系中，通过调节输送杆的转速，控制物料输送量。
- 压力平衡支管可有效调节加料漏斗与反应瓶间的压差，保证物料顺利落入反应容器中。

- 液体加料漏斗具夹套设计,循环介质下进上出。可对加料物质进行均匀,高效的加热,冷却或恒温控制。
- 具压力平衡侧管设计,可维持系统内部的压力平衡,无需中断操作,确保物料能够顺利,可控地加入反应体系中。
- 下端出液口具四氟节门设计标准1:5锥度精密研磨,旋塞磨口抛光处理,延长四氟旋塞使用寿命,确保良好的密封性和互换性。

筒型漏斗主体外壁具刻度设计,可向反应体系可控,定量地加入液体或反应液。方便观察,易于操作。

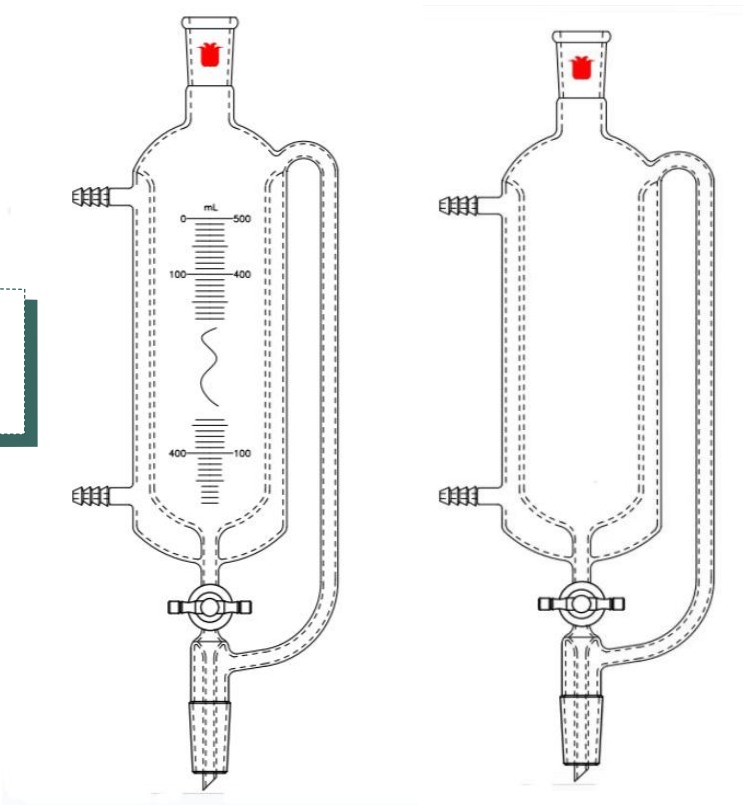

加料漏斗, 液体, 恒压, 夹套, 带刻度

货号	容量 (mL)	磨口	节门 (mm)	价格
F621425KJ	25	14/20	2	
F621925KJ	25	19/22	2	
F622425KJ	25	24/40	2	
F621460KJ	60	14/20	2	
F621960KJ	60	19/22	2	
F622460KJ	60	24/40	2	
F621125KJ	125	14/20	2	
F629125KJ	125	19/22	2	
F624125KJ	125	24/40	2	
F629250KJ	250	19/22	2	
F624250KJ	250	24/40	2	
F624500KJ	500	24/40	4	
F628500KJ	500	29/42	4	
F62241LKJ	1000	24/40	4	
F62291LKJ	1000	29/42	4	
标配配件:				
S181125	2mm具四氟节门塞			
S181530	4mm具四氟节门塞			



扫码查看, 今日实时
优惠价

加料漏斗, 液体, 恒压, 夹套

货号	容量 (mL)	磨口	节门 (mm)	价格
F621425WJ	25	14/20	2	
F621925WJ	25	19/22	2	
F622425WJ	25	24/40	2	
F621460WJ	60	14/20	2	
F621960WJ	60	19/22	2	
F622460WJ	60	24/40	2	
F621125WJ	125	14/20	2	
F629125WJ	125	19/22	2	
F624125WJ	125	24/40	2	
F629250WJ	250	19/22	2	
F624250WJ	250	24/40	2	
F624500WJ	500	24/40	4	
F628500WJ	500	29/42	4	
F62241LWJ	1000	24/40	4	
F62291LWJ	1000	29/42	4	
标配配件:				
S181125	2mm具四氟节门塞			
S181530	4mm具四氟节门塞			



扫码查看, 今日实时
优惠价

加料漏斗，固体，高硼硅玻璃，称量
出料口收窄设计，方便将物料转移至窄口容器中。



货号	规格 (mm)
N910001	15*25
N910002	15*40
N910003	20*60
N910004	25*75
N910005	30*85



扫码查看，今日实时
优惠价

