

广口瓶，高硼硅，玻璃塞

1. 欣维尔自制3.3高硼硅广口瓶，采用优质的玻璃原材料可以承受激变温差,耐热性好。广口瓶瓶身整体加厚设计,增加了广口瓶的抗机械冲击强度。适用于储存固体，液体等化学品。
2. 瓶口具标准锥度内磨口，由金刚砂精密研磨。瓶塞由高精度无心磨精细打磨，保证密封，减少溶剂挥发和污染。
3. 具刻度及书写标设计，方便观察，便于标记。
4. 注：切勿暴力开塞，容易刮伤磨口砂面

品号	容量 (ml)	规格
B160500	500	50/28




扫码查看，今日实时优惠价



广口瓶，高硼硅，防抱死，尼龙塞

1. 欣维尔自制3.3高硼硅广口瓶，采用优质的玻璃原材料可以承受激变温差,耐热性好。广口瓶瓶身整体加厚设计,增加了广口瓶的抗机械冲击强度。适用于储存固体，液体等化学品。
2. 瓶口具标准锥度内磨口，由金刚砂精密研磨，减少溶剂挥发和污染。
3. 具刻度及书写标设计，方便观察，便于标记。
4. 注：切勿暴力开塞，容易刮伤磨口砂面

品号	容量 (ml)	磨口型号
B470060	60	29/21
B470125	125	34/24
B470250	250	40/25
B470500	500	50/28
B471000	1000	65/35

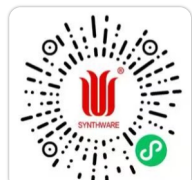

扫码查看，今日实时优惠价

选配配件：

品号	规格	材质
S530029	29/21	四氟
S530034	34/24	四氟
S530040	40/25	四氟
S530050	50/28	四氟
S530065	65/35	四氟



瓶塞为尼龙材质

- 具防抱死，辅助推出环设计,有效解决了因溶剂挥发或结晶导致的瓶口瓶塞难打开，无需额外辅助工具，旋转黑色螺环即可将塞子取下。
- 此物理辅助脱塞设计可均匀施力，降低磨口磨损。
- 可选配聚四氟乙烯瓶塞,更耐腐蚀。

扫码观看 视频讲解



广口瓶，高硼硅，刻度，仅瓶身

- 欣维尔自制3.3高硼硅广口瓶，采用优质的玻璃原材料可以承受激变温差，耐热性好。适用于储存固体，液体等化学品。广口瓶瓶身整体加厚设计，增加了广口瓶的抗机械冲击强度。
- 具刻度及书写标设计，方便观察，便于标记。



品号	容量 (ml)	磨口型号	价格
B470060W	60	29/21	 扫码查看，今日实时 优惠价
B470125W	125	34/24	
B470250W	250	40/25	
B470500W	500	50/28	
B471000W	1000	65/35	

瓶塞，防抱死，尼龙

瓶塞为尼龙材质。

品号	规格	材质
S850029	29/21	尼龙
S850034	34/24	尼龙
S850040	40/25	尼龙
S850050	50/28	尼龙
S850065	65/35	尼龙
扫码查看，今日实时 优惠价		

瓶塞，防抱死，PTFE

瓶塞为聚四氟乙烯材质。

品号	规格	材质
S530029	29/21	四氟
S530034	34/24	四氟
S530040	40/25	四氟
S530050	50/28	四氟
S530065	65/35	四氟
扫码查看，今日实时 优惠价		



具防抱死，辅助推出环设计，可有效解决因溶剂挥发或结晶导致的瓶口瓶塞难打开的情况，无需额外辅助工具，旋转黑色螺环即可将塞子取下。此物理辅助脱塞设计可均匀施力，降低磨口磨损。

试剂瓶，GL45，镀膜

- 欣维尔自制厚壁高强度试剂瓶，采用优质的玻璃原材料可以承受激变温差，耐热性好。
- 适用于生化试剂的液体存储。试剂瓶瓶身整体加厚设计，增加了试剂瓶的抗机械冲击强度。
- 瓶身外部选用进口镀膜材料包覆,从而有效避免实验过程中发生爆裂的危险,有效提高实验安全系数。
- 标配PP材质的工字型密封环。

货号	容量	配件	价格
B140100D	100ml	GL45-L (含密封圈) 绿色	 扫码查看，今日实时优惠价
B140250D	250ml	GL45-H (含密封圈) 黄色	
B140500D	500ml	GL45-F (含密封圈) 粉色	
B141000D	1000ml	GL45-C (含密封圈) 红色	
B142000D	2000ml	GL45-C (含密封圈) 红色	



使用提示：

- 盖子和密封圈最高耐温140°，不可烤箱加热,请在规定温度范围环境下使用。
- 由于镀膜产品材料特性，使用后会出现表面发黄或不平整褶皱等情况，但并不影响使用效果。且镀膜产品需要在 - 40℃至 80℃（融化温度：90° -100°）之间使用，不可用于高温灭菌，微波或烘箱，过高温度会导致镀膜融化。

螺纹盖，PP

PP材质螺纹盖，适配B14系列GL45螺纹口试剂瓶。标配PP材质工字型密封圈。

货号	规格配件
GL45-C-5	PP材质，红色螺纹盖 含密封圈，5个/包
GL45-F-5	PP材质，粉色螺纹盖 含密封圈，5个/包
GL45-H-5	PP材质，黄色螺纹盖 含密封圈，5个/包
GL45-L-5	PP材质，绿色螺纹盖 含密封圈，5个/包



扫码查看，今日实时优惠价



使用提示:盖子和密封圈最高耐温140°，不可烤箱加热,请在规定温度范围环境下使用。

密封环，PP

货号	规格配件
R45-MFQ	PP材质工字型密封环



扫码查看，今日实时优惠价



试剂瓶，GL45螺纹盖，PTFE/硅胶

- 1、欣维尔自制厚壁高强度试剂瓶，采用优质的玻璃原材料可以承受激变温差，耐热性好。
- 2、适用于生化试剂的液体存储。试剂瓶瓶身整体加厚设计，增加了试剂瓶的抗机械冲击强度。
- 3、标配PTFE/硅胶垫片，更耐腐蚀。



货号	容量 (ml)	配件品号	价格
B140050S	50ml	GL45L R45	 扫码查看，今日实时 优惠价
B140100S	100ml	GL45L R45	
B140250S	250ml	GL45H R45	
B140500S	500ml	GL45F R45	
B141000S	1000ml	GL45C R45	
B142000S	2000ml	GL45C R45	
B143000S	3000ml	GL45C R45	
B145000S	5000ml	GL45C R45	

使用提示:盖子和密封圈最高耐温140° ,不可烤箱加热。
PTFE/硅胶垫片耐温-20°~200°,请在规定温度范围环境下使用。
安全提示:在高温灭菌时,需把瓶身和盖子分开,密封状态下高温灭菌会造成瓶身应力开裂。



试剂瓶盖，实心，PP

PP材质螺纹盖，适配B14系列GL45螺纹口试剂瓶。
标配PP材质工字型密封圈。(5个/包)

货号	颜色	 扫码查看，今日实时 优惠价
GL45C-5	红色螺纹盖	
GL45F-5	粉色螺纹盖	
GL45H-5	黄色螺纹盖	
GL45L-5	绿色螺纹盖	

使用提示:盖子和密封圈最高耐温140° ,不可烤箱加热，请在规定温度范围环境下使用。




垫片，PTFE/硅胶


PTFE/硅胶垫片，耐腐蚀，耐温-20-200℃。
可搭配GL45系列PP材质螺纹盖使用。

货号	规格	包装
R45-5	45mm	5个/包
 扫码查看，今日实时 优惠价		

1. 可用于气体纯化，尾气吸收，气体-液体传质以及保护真空泵的缓冲瓶。
2. 瓶身采用优质的玻璃原材料，整体加厚设计，增加了洗气瓶的抗机械冲击强度。
3. 标配GL45具孔垫片，保证上端通气管与具孔盖的密封。
4. 螺纹口设计较传统磨口或瓶塞式洗气瓶，气密性更好,减少气/液体泄漏。无需真空脂,旋紧即可密封,拆卸方便。

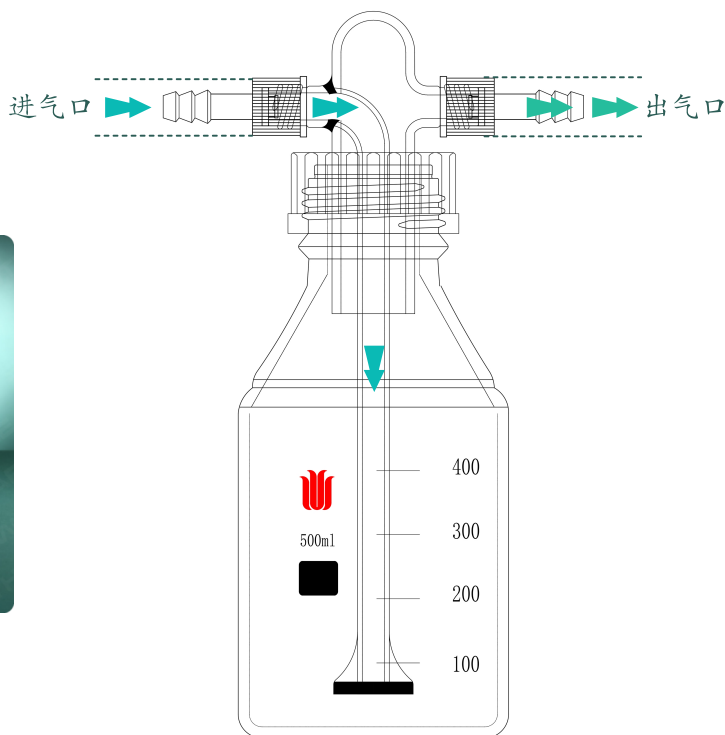

推荐搭配产品:

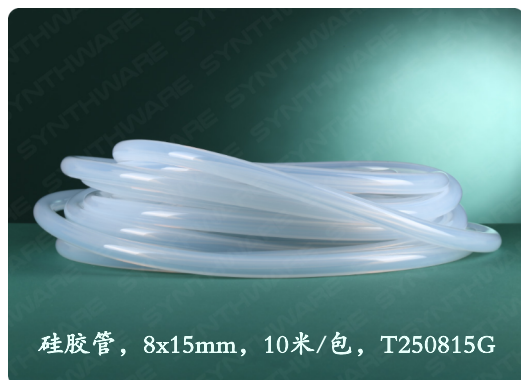

硅胶管，8x15mm，10米/包，T250815G

洗气瓶，GL45，G2砂芯，可拆卸小咀

货号	容量ml	内芯规格	价格
N170100C	100	G2 (C) 砂芯	
N170250C	250	G2 (C) 砂芯	
N170500C	500	G2 (C) 砂芯	
N171000C	1000	G2 (C) 砂芯	
标配配件:			
RC14	#14具孔尼龙盖		
R201402	可拆式小咀(直管), 8mm外径		
GL45JK	GL45具孔螺纹盖		
R45JK	GL45具孔垫片		

扫码查看，今日实时
优惠价

洗气瓶，GL45，直管，可拆卸小咀


货号	容量ml	内芯规格	价格
N170100	100	直管	
N170250	250	直管	
N170500	500	直管	
N171000	1000	直管	
标配配件:			
RC14	#14具孔尼龙盖		
R201402	可拆式小咀(直管), 8mm外径		
GL45JK	GL45具孔螺纹盖		
R45JK	GL45具孔垫片		

扫码查看，今日实时
优惠价

通气管口具砂芯设计，
可将气体均匀分散，与
溶剂充分接触，提高吸
收效率。




1. GL45多口流动相溶剂瓶, 相较于多管路置于单口瓶, 多口瓶的多通道设计可有效避免管线缠绕, 瓶盖掉落等风险, 也可清晰辨别每条流动相管路, 不易弄混。
2. 标准GL45螺纹口, 标配硅胶垫片及PE材质工字密封圈。也可匹配GL45具孔流动相盖或流动相安全盖, 可保证密封性, 防止溶剂挥发和污染。
3. 瓶身刻度清晰, 易读取, 方便流动相配制。

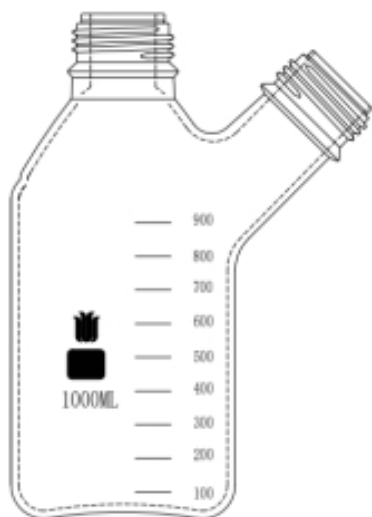

溶剂瓶, 流动相, 两口瓶, 刻度, GL45

货号	容量ml	螺纹型号
N650250	250	GL45
N650500	500	GL45
N651000	1000	GL45
N652000	2000	GL45

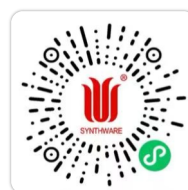

扫码查看, 今日实时
优惠价

溶剂瓶, 流动相, 三口瓶, 刻度, GL45

货号	容量ml	螺纹型号
N630250	250	GL45
N630500	500	GL45
N631000	1000	GL45
N632000	2000	GL45




扫码查看, 今日实时
优惠价

溶剂瓶, 流动相, 四口瓶, 刻度, GL45

货号	容量ml	螺纹型号
N640250	250	GL45
N640500	500	GL45
N641000	1000	GL45
N642000	2000	GL45



扫码查看, 今日实时
优惠价

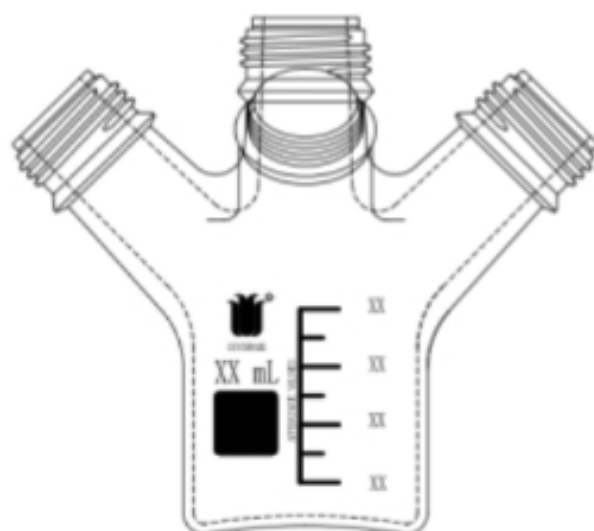

洗瓶，带标签，LDPE

低密度聚乙烯（LDPE）洗瓶是实验室常见的液体分装和清洗工具。瓶身印有试剂名称，CAS号及相应的NFPA 704标识和GHS形象图，方便区分液体并提示使用者正确识别安全风险和操作安全规范。

货号	规格	价格
P440001	(丙酮) 250ml	 扫码查看，今日实时 优惠价
P440002	(甲醇) 250ml	
P440003	(乙醇) 250ml	
P440004	(蒸馏水) 250ml	
P440005	(异丙醇) 250ml	
P4566004	(次氯酸钠) 500ml	
P4566006	(异丙醇) 500ml	



洗瓶，广口，LDPE

低密度聚乙烯（LDPE）洗瓶是实验室常见的液体分装和清洗工具。洗瓶瓶身半透明，便于观察液体余量。瓶身厚实，可单手挤压控制液体流速。

货号	容量ml	盖子颜色	价格
P360250	250	白色	 扫码查看，今日实时 优惠价
P360500	500	白色	
P361250	250	红色	
P361500	500	红色	
P362250	250	绿色	
P362500	500	绿色	
P363250	250	蓝色	
P363500	500	蓝色	
P364250	250	黄色	
P364500	500	黄色	
P365250	250	橙色	
P365500	500	橙色	



洗瓶，广口，LDPE

低密度聚乙烯（LDPE）短口洗瓶较长口洗瓶更易控制流量。洗瓶瓶身半透明，便于观察液体余量。瓶身厚实，可单手挤压控制液体流速。

货号	容量ml
P430250	250
P430500	500


 扫码查看，今日实时
优惠价

