


防倒吸鼓泡器，大容量

1. 大容量防倒吸设计，在体系负压时，可有效防止油和空气吸入系统。
2. 倒油口漏斗式设计，方便硅油倒入及更换。
3. 可拆卸小咀设计为连接或断开体系提供了一种安全和简便的连接方式。

货号	高度mm
B482815	150
B485017	175
标配配件：	
RC18	尼龙帽,11mm孔,#18
R201801	可拆式小咀,#18,直
 扫码查看，今日实时优惠价	

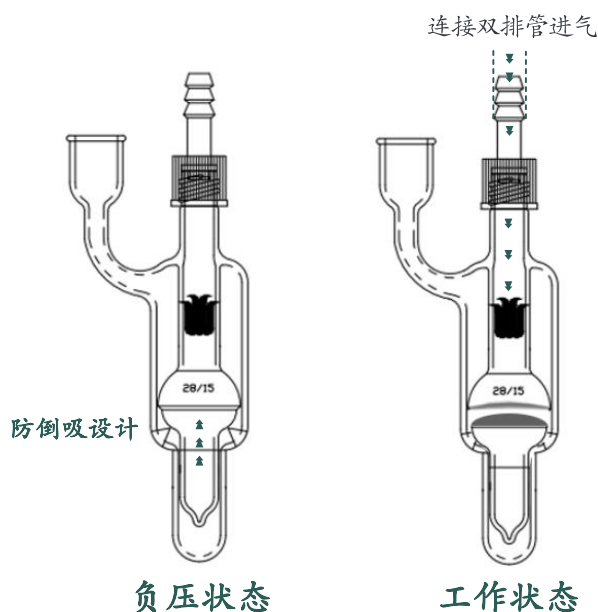


防倒吸鼓泡器，可拆卸小咀

1. 内置防倒吸止回阀，阀体顶部精密研磨，确保体系负压时的密封性。
2. 倒油口漏斗式设计，方便硅油倒入及更换。
3. 可拆卸小咀设计为连接或断开体系提供了一种安全和简便的连接方式。

货号：B250005	
标配配件：	
R201402	可拆式小咀，直管
RC14	尼龙帽，9.5mm孔，GL14
 扫码查看，今日实时优惠价	

选配配件：

R201401 可拆式小咀，弯管

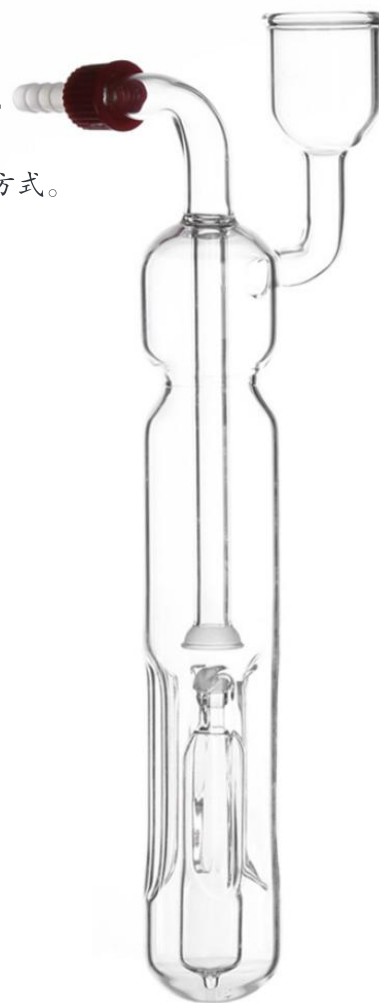

防倒吸鼓泡器，可调式，可拆卸小咀

1. 倒油口漏斗式设计，方便硅油倒入及更换。
2. 可拆卸小咀设计为连接或断开体系提供了一种安全和简便的连接方式。



货号：B25-KT-14

标配配件：

R201402	可拆式小咀，直管
RC14	尼龙帽，9.5mm孔，GL14
RB25	B25-KT专用密封圈
THB25	B25-KT专用弹簧
GLB25	B25-KT专用具孔盖

扫码查看，今日实时
优惠价

选配配件：

R201401 可拆式小咀，弯管



在具备常规鼓泡器可查看气体流量的功能基础上，通过旋转顶部四氟压力杆，调节弹簧压力，控制气体出口阻力和气体流量。

鼓泡器，可调式，无水无氧，SCHLENK

鼓泡器具可调式通气管，标配尼龙盖和Viton O型圈固定通气管插入硅油中的高度。

货号：B460002

标配配件：

RC009	具孔盖,尼龙,13mm
R108	棕色, O型圈,内径*线径 6*2.62mm




扫码查看，今日实时
优惠价



选配配件：

货号	描述
R108EP	黑色O型圈,抗极性溶剂型, 内径×宽度,6.0×2.62mm
Q108	全惰性白色O型圈(进口材质), 内径6线径2.62mm

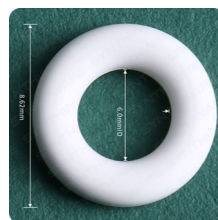

鼓泡器，防倒吸，泄压腔，新型

1. 具泄压腔鼓泡器，可安装在系统中段，实现气体流量控制和监测，避免系统压力过载即超压。
2. 当进气压力过高时，自动从泄压腔泄压。可调节泄压腔顶部泄压弹簧阀，改变泄压范围。
3. 鼓泡器具防倒吸设计，当体系处于负压时止回阀被抽起，密封通气口，防止硅油倒吸回反应体系。

货号：B250004

标配配件：

S600004H	弹簧 0-4 mm
R201402	可拆式小咀，直管
RC14	尼龙帽, 9.5mm孔, GL14



扫码查看，今日实时
优惠价

选配配件：

R201401	可拆式小咀，弯管
---------	----------

